


機械器具 62 歯科用切削器
一般医療機器 歯科用スケーラ 35320000

インサート P A

【形状・構造及び原理等】

形状：

- ・ 25kHz 用 または 30kHz 用

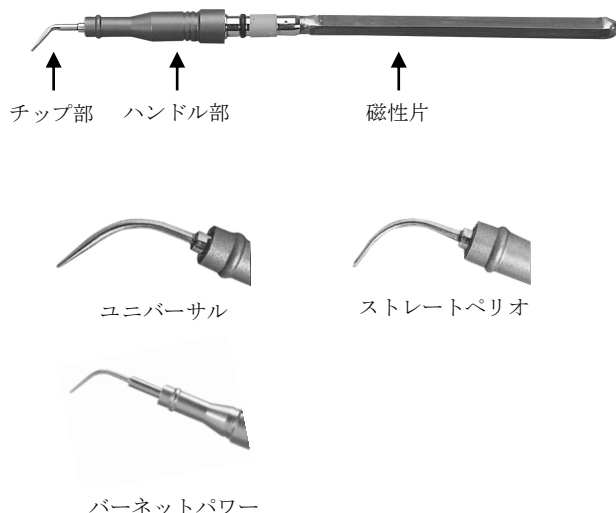

- ・ 本品はターボ SENSOR 及びターボ 25-30 専用のインサートである。

チップ部材質：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

口腔内清掃及び歯周治療時に歯の表面から歯石等の沈着物を除去するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用前に滅菌する。（高压蒸気滅菌/各医療機関により検証された滅菌条件による。例 132℃～135℃ 15 分間）
2. 使用に適した形状のインサートを選択し、ハンドピースへ固定する。
3. 使用する機器の添付文書・取扱説明書に従い、歯石、歯垢を除去する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・ インサート挿入時に緩みを感じた場合は、ハンドピースシースまたはインサートの O リングを交換すること。
(25kHz 用：黒、30kHz 用：オレンジ)

【使用上の注意】

- ・ 機器本体の取扱説明書を必ず読むこと。
- ・ 本品は、未滅菌品のため、初めて使用する前及び使用前に毎回必ず滅菌（【保守・点検に係る事項】参照）を行うこと。
- ・ 折損、破損等の原因となるので、本品に対する曲げ・切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
- ・ ストレートペリオを「MED」（ミディアム）以上の出力で使用しないこと。
- ・ 古くなっている、磨耗している、あるいは鈍くなっているインサートを使用すると、良いスケーリング効果が期待できない上、過

剰な熱が発生するため、直ちに交換すること。また、折れ曲がったインサートは使用しないこと

- ・ 使用時、ハンドピース及びインサートを冷却するために十分な水がチップを通して流れるようにすること。
- ・ スケーリングの際は、必ずインサートのハンドル部を把持すること。ハンドピースシースのみを把持して使用しないこと。
- ・ スケーリングの際は、リトラクターを使用し、唇、頬、舌がチップに触れないようにすること。
- ・ インサートのチップ部の側面を用いて沈着物を歯から除去すること。チップ部の先端を用いて歯を削り取らないこと。また、インサートに過度の力をかけないように注意すること。
- ・ 血液、生理食塩水と長時間接触させたままにしないこと。
- ・ 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 歯科医療有資格者以外は機器を使用しないこと。
- ・ 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・ 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥すること。
- ・ 滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。
- ・ 「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 高温、低温、多湿、直射日光、火気、水分（水濡れ）、オゾン、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・ 洗浄または消毒する際は、感染予防のためゴム手袋、保護メガネ、マスク等を着用すること。
- ・ 本品を本体より取り外し、下記の方法で洗浄、滅菌する。
 - (1) 滅菌前に、インサート上の付着物を除くため、丁寧に中性洗剤と水で擦り洗いし、流水で充分すすいだ後、乾燥させる。または、超音波洗浄器にて洗浄し、流水で充分すすいだ後、乾燥させる。
 - (2) 洗浄後、132～135℃、15分間の高压蒸気滅菌をする。
- ・ セットまたは包装は、関連器材の仕様を熟知して行うこと。
- ・ 本品の品質を損なう恐れがあるので、滅菌時 135℃を超えて加熱しないこと。
- ・ アンモニウム系の洗剤及び消毒剤は使用しないこと。
- ・ 本品を腐食、劣化させる恐れがあるため、磨き粉、金属ウール、金ブラシは使用しないこと。
- ・ インサートの O リングやシリコン部の劣化の原因となるため乾熱滅菌及び薬液滅菌はしないこと。
- ・ 完全に乾燥していることを確認してから保管（【保管方法及び有効期間等】参照）すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者 : パーケル インク (アメリカ合衆国)
(Parkell, Inc.)