


ベクストミルレジン歯

【形状・構造及び原理等】

形状：
前歯；

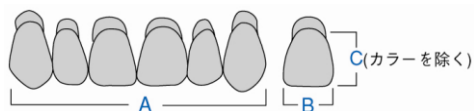


上顎前歯部形状 TP：テーパー型
OV：卵円型
TL：テーパーロング型
下顎前歯部形状 LW：コンビネーション型
LS：スクエア型

単位：mm

	A	B	C
TP6	48.0	8.5	11.5
TP5	46.5	8.5	11.5
TP4	45.0	8.0	10.5
TP3	45.0	8.0	11.5
OV4	47.0	8.5	10.0
OV3	44.0	8.0	10.0
OV2	41.5	7.5	9.5
TL6	49.5	9.0	11.5
TL5	47.0	9.0	11.0
TL4	44.5	8.5	11.0
LW8	36.5	5.5	11.0
LW7	36.0	5.5	10.5
LW6	34.0	5.0	9.5
LW5	33.0	5.0	9.0
LW4	33.5	5.5	9.5
LW3	32.5	5.0	9.0
LS4	34.5	5.0	8.5
LS3	32.5	5.0	8.5

臼歯；

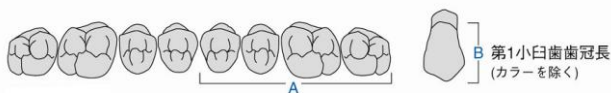

単位：mm

		A	B
29	上顎	29.5	7.5
	下顎	30.5	7.5
30	上顎	30.5	8.0
	下顎	32.5	8.0
31	上顎	31.0	8.0
	下顎	33.0	8.5

寸法は、上記の±5%以内。

材質：ポリメチルメタクリレート、メチルメタクリレート
色調：A2、A3、A3.5の3種類

【使用目的、効能又は効果】*

義歯に植立する既製人工歯である。

【品目仕様等】

「JIS T 6506:2005（レジン歯）」に適合する。

【操作方法又は使用方法等】*

1. 欠損部に通法によりろう堤を作成する。
2. ろう堤を温めて、通常の義歯排列法により人工歯を排列し、ワックスで固定する。
3. 咬合調整をする。
4. 通法に従いフラスコに石膏を用いて埋没・流ろうしたのち、床用レジンを充填し重合する。
5. 補綴物を割り出し、研磨、仕上げする。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・ 本品上の余分な分離材はすみやかに除去すること。
- ・ 義歯床を作製するときには本品基底面に維持孔を作製することが望ましく、また石膏分離材使用時に分離材が基底面に付着しないように注意すること。
- ・ 本品が化学的結合しない床用樹脂を用いる場合、機械的維持の付与や接着剤（専用プライマー）を塗布して使用する等、床用樹脂メーカーの指定する方法に従って前処理すること。
- ・ 破損の原因ともなるため、本品を過度に削合したりしないこと。
- ・ 義歯床掘り出し時には破損のおそれがあるため、石膏鉗子の取り扱い等十分注意すること。

【使用上の注意】

- ・ 使用前に必ず製品の点検をし、破損、ヒビ、変色等の異常が確認された場合使用しないこと。
- ・ 研磨作業時には、目の損傷を防ぐために保護メガネ等を着用すること。
- ・ 研磨作業時には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないよう努めること。
- ・ 【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・ 本品に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・ 本品に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・ 患者が義歯を使用する上での一般的な注意として、以下を指導すること。
- ・ 清掃の際、研磨剤の入った練り歯磨きは用いないこと。また、軟らかい義歯用歯ブラシを用いること。義歯用洗浄剤等を併用すればより効果的である。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

「貯蔵・保管方法」

- ・ 高温多湿、直射日光を避けて、外圧（物理的負荷）を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

前歯	6 歯／ケース
臼歯	8 歯／ケース
バラ臼歯	50 歯／パック

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売者：フィード株式会社
神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-3
クイーンズタワーB 19F
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：山八歯材工業（常熟）有限公司（中華人民共和国）
（YAMAHACHI DENTAL MATERIAL（CHANGSHU）Co., LTD.）