

アドバンス金属アタッチメント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・ニッケルまたは本品に対する発疹、皮膚炎等の過敏症状の既往歴がある患者には使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

本製品は、前歯及び小臼歯に使用されるステンレス製のブラケットである。

1) 形状

ブラケットの構造によりロス型とエッジワイズ型の 2 タイプと、それぞれベースの違いによりフォーミュラー型とインテグラ型があり、寸法及び角度により各種類がある。

スロットの幅；0.018 インチ、0.022 インチ

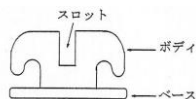

ベース：



インテグラ型



フォーミュラー型

ロス	
インテグラ	上顎中切歯
	上顎側切歯
	上顎犬歯
	上顎小臼歯
	下顎第 2 小臼歯
	下顎第 1 小臼歯
	下顎犬歯
フォーミュラー	下顎切歯
	上顎中切歯
	上顎側切歯
	上顎犬歯
	上顎犬歯(フック付)
	上顎小臼歯
	下顎第 2 小臼歯
	下顎第 1 小臼歯
	下顎犬歯
	下顎犬歯(フック付)
	下顎切歯

エッジワイズ	
インテグラ／ フォーミュラー	上顎中切歯
	上顎側切歯
	上下顎犬歯・小臼歯
	下顎切歯

2) 原材料

ステンレス鋼：SUS 304L, SUS 316L
(鉄、ニッケル、クロム、モリブデン、マンガン、その他含有)

3) 作動・動作原理

歯面に接着したブラケットにワイヤーを通し、歯牙に圧力を加えて移動することで歯列矯正を行う。

【使用目的、効能又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

【操作方法又は使用方法等】

本品は一回限りの使用で再使用しないこと。

1. 本品を装着する歯面を清掃したのちエッチング剤で処理する。
2. エッチング剤を水洗除去して、歯面を十分乾燥させる。
3. 使用する接着材を用法に従い、歯面に一層塗布する。
4. 適合するブラケットを選択し、接着面に接着材を一層塗布する。
5. 矯正用プライヤーを用いてブラケットを歯面の正確な位置に圧接し、十分に硬化するまで保持する。
6. セットされたブラケットにワイヤーを装着する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・使用する接着材の添付文書等の指示に従うこと。
- ・ボンディングベースが油分等で汚れていると、適切な接着力を得られないため注意して扱うこと。

【使用上の注意】

- ・ニッケル又は本品に対する発疹、皮膚炎等の過敏症状の既往歴がある患者には使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・院内感染防止のため、本品を装着、交換、廃棄する際はディスポーザブルグローブを使用すること。
- ・使用前に必ず製品の点検をし、破損、腐食（錆）、変形等が確認された場合使用しないこと。
- ・【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品の装着患者に対し、粘膜に当たる場合、粘膜保護材を使用するよう指導すること。
- ・装着したブラケットを取り外す際は、破損、欠け、エナメル質損傷の要因となりうるため、ディボンディングインスツルメント等適切な器具を用い、注意して行うこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

埃や水分などが付かないように保管すること。

【包装】

ディスペンサー

5 症例セット（左右、上下） 100 個入り

単品包装

10 個パック（10 個／パック）

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売者：フィード株式会社
神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-3
クイーンズタワーB 19F
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：アドバンスド オーソドンティック
システムズ インク
(Advanced Orthodontic Systems, Inc.)
(アメリカ合衆国)