

歯科材料 04 歯科用根管充填材料
管理医療機器 歯科用根管充填ガッタパーチャポイント（31872000）

Endo all ガッタパーチャポイント

再使用禁止


【禁忌・禁止】

「適用対象（患者）」
本品の使用に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある患者
には使用しないこと。

「使用方法」
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

主成分：酸化亜鉛、1,4-トランスポリイソプレン、硫酸バリウム
形状：
メインポイント(マーク付) 全長 30mm
D:先端の直径
d3:先端から 3mm の直径
d16:先端から 16mm の直径

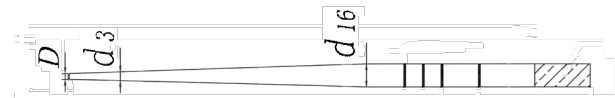

メインポイントの寸法及びカラーコード
(先端から 18mm、19mm、20mm、22mm の位置にマーク)

テーパー：2% 長さ：30mm

サイズ	径			カラーコード
	D	d3	d16	
15	0.15	0.21	0.47	白
20	0.20	0.26	0.52	黄
25	0.25	0.31	0.57	赤
30	0.30	0.36	0.62	青
35	0.35	0.41	0.67	緑
40	0.40	0.46	0.72	黒
45	0.45	0.51	0.77	白
50	0.50	0.56	0.82	黄
55	0.55	0.61	0.87	赤
60	0.60	0.66	0.92	青
70	0.70	0.76	1.02	緑
80	0.80	0.86	1.12	黒
90	0.90	0.96	1.22	白
100	1.00	1.06	1.32	黄
110	1.10	1.16	1.42	赤
120	1.20	1.26	1.52	青
130	1.30	1.36	1.62	緑
140	1.40	1.46	1.72	黒

テーパー：4% 長さ：30mm

サイズ	径			カラーコード
	D	d3	d16	
15	0.15	0.27	0.79	白
20	0.20	0.32	0.84	黄
25	0.25	0.37	0.89	赤
30	0.30	0.42	0.94	青
35	0.35	0.47	0.99	緑
40	0.40	0.52	1.04	黒
45	0.45	0.57	1.09	白

テーパー：6% 長さ：30mm

サイズ	径			カラーコード
	D	d3	d16	
15	0.15	0.33	1.11	白
20	0.20	0.38	1.16	黄
25	0.25	0.43	1.21	赤
30	0.30	0.48	1.26	青
35	0.35	0.53	1.31	緑
40	0.40	0.58	1.36	黒
45	0.45	0.63	1.41	白

原理：歯科用根管充填材をつけた本品を、形成された根管に挿入することにより、根管を封鎖する。

【使用目的又は効果】

本品は歯の根管の充填に用いる。

【使用方法等】

1. 根管の形成後、根管内を洗浄・消毒し、乾燥させる。
2. 適当なサイズのメインポイントを選択し、次亜塩素酸ナトリウム溶液で消毒後、根管充填用シーラーを塗布して根管の先端まで挿入する。
3. メインポイントの周囲の隙間に、2. と同様に消毒した適当なサイズのアクセサリポイントが必要分挿入し、スプレッダーを用いて圧接しながら充填する。
4. 加熱したインスツルメントを用いて余分なポイントを取り除き、ブラガーで垂直加圧し、根管を完全に封鎖する。

「使用方法等に関連する使用上の注意」

- ・使用前に必ず消毒すること。
- ・高圧蒸気滅菌及び乾熱滅菌は行わないこと。
- ・ポイント挿入時には根尖孔から突出させないように注意すること。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検、消毒をし、異常が確認された場合、使用しないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

「重要な基本的注意」

- ・本品は天然ゴムを使用している。本品の使用により患者に発疹等のアレルギー反応が認められた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・多湿、直射日光を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に室温で保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

「有効期間」

包装に記載の使用期限までに使用すること。

〔使用期限は自己認証（製造元データ）による。〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：シェンチェン スーパーライン テクノロジー
カンパニー リミテッド（中華人民共和国）
(SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO.,
LTD.)