


バキュームチップ TV-2H

【形状・構造及び原理】

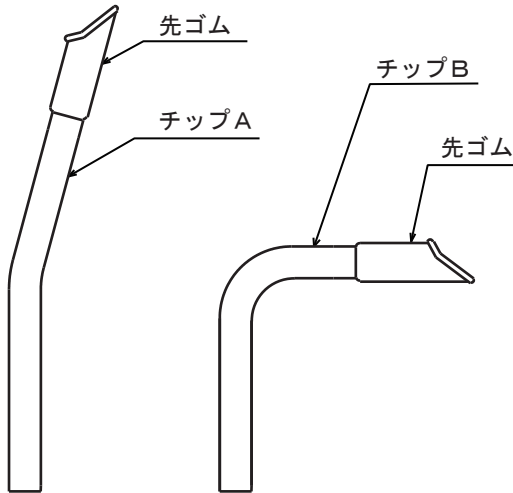

バキュームチップA

バキュームチップB

【使用目的・効能又は効果】

口腔内に貯留する水分や切削片を除去する。

【品目仕様】

以下の規格に適合

表面状態、耐滅菌性、接続部適合性

【操作方法、使用方法等】

- (1) 任意のバキュームチップの選定をする。
- (2) 吸引用ハンドピースに接続して吸引を行う。

【使用後のお手入れ】

- (1) オートクレープ滅菌は以下の条件で行うこと。
 - ① 滅菌・乾燥温度は135℃以下で使用する。
 - ・変色、変形のおそれがあります。
 - ② 薬品、異物が付着している際は、十分な清掃、洗浄後にオートクレープ滅菌を行うこと。
 - ・変色のおそれがあります。
- (2) 操作方法又は使用方法に関して
機器の詳細な操作方法及び使用方法是付属の取扱説明書を使用前に必ず読むこと。

【使用上の注意】

- (Ⅰ) 落下等の過度の衝撃を与えない。
- (Ⅱ) 歯科医師及び法的資格者以外は使用しないこと。
- (Ⅲ) 本品は改造しないと。

【保守・点検に係わる事項】

- (1) 日常（使用前）点検及び定期保守点検は以下の項目に従って行うこと。

「使用者が行う保守点検」

No	点検内容	点検頻度	点検方法
1	吸引力	毎回	吸引が適切に作動するか確認する。
2	本品の接続及び保持	毎回	吸引用ハンドピースと本品を接続した状態で、緩みやガタつきがないことの確認する。

【梱包】

- (1) チップA：10本入/箱
- (2) チップB：10本入/箱
- (3) 先ゴム：10個入/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者・製造業者

* 日本アイ・エス・ケイ株式会社 KINGデンタル事業部
〒300-4297
茨城県つくば市寺具1395-1
TEL：029-869-2001