


機械器具 84 前各号に掲げる物の付属品で、厚生労働省令で定めるもの
一般医療機器 モータなし画像診断用観察装置（JMDN コード：36488000）

シャーカステン SK-6

【形状・構造及び原理等】

〈形状・基本構造〉

1. 外観

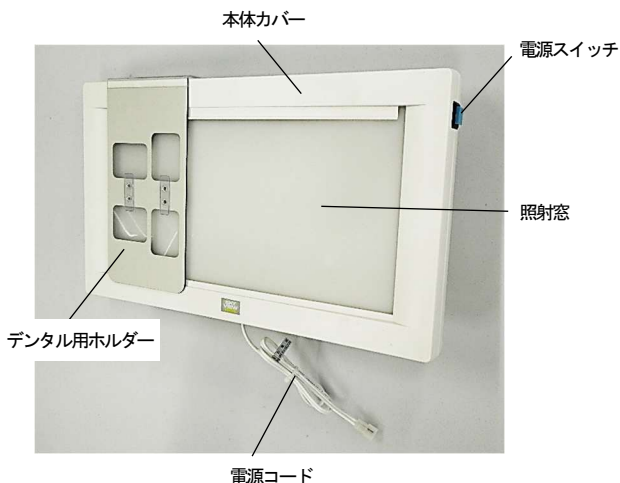

2. 寸法・質量

寸 法：W362×H212×D31 mm

照射窓寸法：W294×H144 mm

質 量：730 g

〈作動原理〉

本製品は、光源に熱陰極管を用い、X線フィルムの画像を観察する装置である。本体内部に内蔵した光源からの光を、反射板及び拡散板により観察に必要な照度を照射窓に保つことができる。

〈電氣的定格及び分類〉

電源電圧：AC10V 50/60Hz または DC12V

消費電力：14 VA

保護の形式：クラス I 機器

保護の程度：装着部無し

〈使用環境条件〉

下記の条件にて使用すること。

(1) 周囲温度：10～40℃

(2) 相対湿度：30～75%（結露しないこと）

(3) 気 圧：700～1,060hPa

【使用目的又は効果】

X線撮影されたX線フィルムの画像を観察する。

【使用方法等】

〈使用方法〉

1. 準備

1-1 歯科用ユニットに取り付けする。

取り付けは、当社または当社指定の業者が行うこと。

2. 使用方法

2-1 電源スイッチを入れる。

2-2 撮影したX線フィルムを照射窓に装着し観察する。

・デンタルX線フィルムの場合は、付属のデンタル用ホルダーを使用する。

2-3 電源スイッチを切る。

3. 使用後の処置

3-1 使用後、外装面を柔らかい布等で清掃する。

【使用上の注意】

- (1) 落下等の過度の衝撃を与えないこと。（故障の原因）
- (2) 照射窓を強く押したり、曲げたりしないこと。（故障の原因）
- (3) 乾燥の不十分なX線フィルムは使用しないこと。（故障の原因）
- (4) 本製品を改造しないこと。
- (5) アルコールや、変質や溶解のおそれがある薬品、液体、気体等は用いないこと。（故障の原因）

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

下記の条件にて保管すること。

- (1) 周囲温度：-10～55℃
- (2) 相対湿度：10～90%RH（結露しないこと）
- (3) 気 圧：700～1,060hPa

〈耐用期間〉

製造の日から、正規の使用方法、保守点検、消耗品の交換を行った場合に限り、5年とする。（自己認証（社内データ）による）

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項（日常点検）〉

- ・使用前に点灯状況を確認すること。
- ・使用前に外装面をきれいに清掃すること。

〈業者による保守点検事項（定期保守点検）〉

- ・なし

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者、製造業者〕

日本アイ・エス・ケイ株式会社 デンタル事業部

〒300-4297

茨城県つくば市寺具 1395-1

電話番号 029-869-2001

付帯する歯科用ユニットの取扱説明書を必ず確認してください。