

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器、一般的名称：電動式骨手術器械(JMDN コード 70959010)

販売名 サーボトロニックⅢ
単回洗浄チューブセット (品番 92.11.36)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

使用方法

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
滅菌水又は生理食塩水用
バック接続部

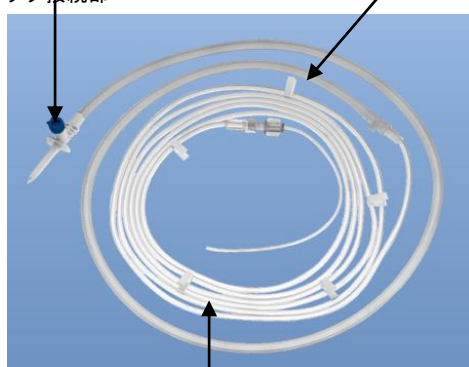

ハンドピース接続用チューブ

本品はシリコン、ABS、PVC、PP、PTFE を使用している。

2. 原理

本品は電動式骨手術器械(販売名「サーボトロニックⅢ」)のポンプヘッド、滅菌水又は生理食塩水用バック及びハンドピースに接続し、接続したハンドピース先端より術野への送水を行う。

【使用目的又は効果】

本品は電動式骨手術器械(販売名「サーボトロニックⅢ」)のポンプヘッド、滅菌水又は生理食塩水用バック及びハンドピースに接続し、接続したハンドピース先端より術野への送水を行う。

【使用方法等】

機器の詳細な操作方法及び使用法は、電動式骨手術器械(販売名「サーボトロニックⅢ」)に付属している取扱説明書を必ず参照のこと。

1. 本品をパッケージから取り出す。
2. 本品のハンドピース接続用チューブの端をハンドピースの注入接続部等に接続する。
3. 本品のチューブ本体を、サーボトロニックⅡのポンプヘッドにはめ込む。
4. 滅菌水又は生理食塩水用バック接続部を滅菌水又は生理食塩水用バックに差し込む。
5. サーボトロニックⅡ EC100 の操作方法に従い、送水量を決定し送水を行う。また必要に応じて送水量を調節する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

詳細については電動式骨手術器械(販売名：サーボトロニックⅢ)に付属している取扱説明書を必ず参照のこと。

1. 本品は滅菌済み製品であるため、開封は使用直前に行い、かつ無菌的に扱うこと。
2. 本品をハンドピースに接続する場合、接続部にしっかりとめ込むこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵方法

- (1) 水のかからない、乾燥した場所に保管すること。
- (2) 害虫のいない準無菌の場所に保管すること。
- (3) 高温になる場所や直射日光の当たる場所を避け冷暗所に保管すること。
- (4) 保管中は、結露を発生させないようにするため、温度、湿度の大きな変動は避けること。
- (5) 気圧、湿度、風通し、ほこり、塩分、イオウ分、を含んだ空気などにより悪影響が生ずる恐れのない場所に保管すること。
- (6) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- (7) 保管室の壁、床、天井は、平滑で、清掃・消毒しやすいものとする。棚板は、床から 30 cm 以上離さなければならない。

2. 有効期間

本品は包装に記載の使用期限内に使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社 メディックスジャパン
国内製造業者： 株式会社 メディックスジャパン
海外製造業者： Medicon eG