

キーラーLEDヘッドランプ



【警告】

- ・本製品に損傷がある場合には使用しないこと。また、定期的に目視で点検すること。
- ・ACアダプターを壊れたコンセントに差し込まないこと。
- ・コードは歩く人がつまずいたり等の被害がないように配慮すること。
- ・バッテリーパックを分解しないこと。

【禁忌・禁止】

- ・ヒトの眼を直接照射しないこと。また、光を凝視しないこと。
- ・可燃性ガスが充満している状況に放置しないこと。
- ・いかなる液体にも浸さないこと。


【形状・構造及び原理等】

1. 外観図、構造

本機器はライト本体、バッテリーパック、充電台、ACアダプターから構成される。

本機器はルーペに取り付けて、手術時に術者手元の影部分の照明に使用する。

電球の代わりにLEDライトを用いて電球交換の頻度を削減している。

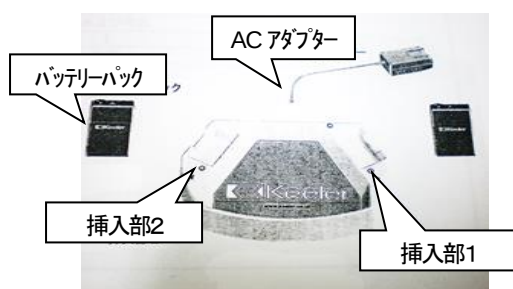

2. 品目仕様等

- 1) 入力 : AC100V 50/60Hz 700mA
- 2) 出力 : DC12V 2.5A
- 3) 専用充電機 : リチウムイオン DC12V 2.5A
- 4) 電撃に対する保護の形式 : クラスII/内部電源機器
- 5) 操作時周囲気温度 : +10℃～+35℃
- 6) 輸送時温度 : -40℃～+70℃、湿度 : 10%～95%

【使用目的又は効果】

本機器はルーペに取り付けて、手術時に術者手元の影部分の照明に使用する。


【使用方法等】

1. 注意

- 1) 本機器は+10℃～+35℃間の周囲気温度で正常に作動するように設計されています。
- 2) 充電は専用充電台をお使い下さい。
- 3) 充電電池の廃棄は各市町村のリサイクル条例に沿って行って下さい。
- 4) 小児の手の届かないところに保管してください。

2. 本機器のルーペへの取り付け

- 1) ルーペ本体をヒンジから一旦取り外します。
一方の手でヒンジを持ち、ルーペバーを一方の手の人差し指と親指でつかみ、力を入れながら抜きます。

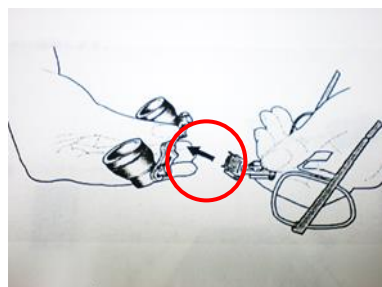


- 2) ルーペバーに本機器をイラストのように取り付けます。
取り付けましたら、本機器が正しく固定されているか確認してください。




取扱説明書を必ずご参照下さい。

3) ルーペ本体にヒンジを取り付けます。

ルーペなしで本機器を使用する場合は、イラストのようにスペーサ（別売）を取り付けてヒンジに取り付けます。

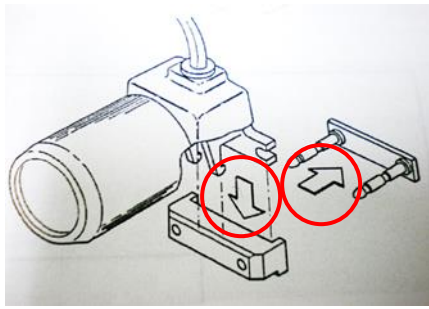

4) 附属のケーブルクリップでフレームにコードを這わせて下さい。

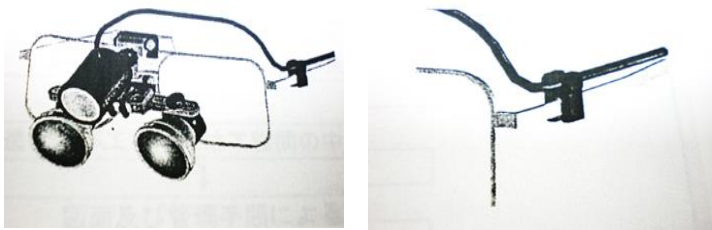

コードのシャックをバッテリーパック上部のプラグに接続します。


5) 充電について

① ACアダプター的一方を充電台に接続し、アダプター本体をコンセントに接続します。

正しく接続されていると、バッテリーパック挿入部近くのランプが緑になります。

② 充電時はバッテリーパックのスイッチはOFFにしてください。

挿入部にバッテリーパックを差し込むと、ランプが黄色になります。

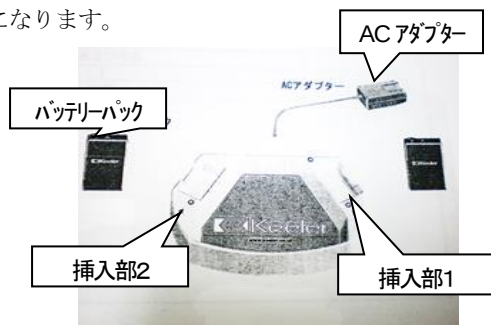

③ 挿入部1及び挿入部2では充電時間が異なりますのでご注意ください。

挿入部1：約2時間、挿入部2：約4時間

お急ぎの場合は挿入部1を使用してください。

④ 黄色で点灯→急速充電

黄色で点滅→充電終了間近

黄色点灯点滅しない→充電済み

バッテリーパックが充電途中でも本機器を使用できます。

再度、充電台に差し込むと途中で充電を開始します。

⑤ 充電が終了すると、充電機能は自動ストップします。

バッテリーパックを差し込んだままで保管できます。

【使用上の注意】

1. ヒトの眼を直接照射しないこと。また光を凝視しないこと。
2. 可燃性ガスが充満している状況に放置しないこと。
3. コードは歩く人がつまずいたり等の被害がないように配慮すること。
4. バッテリーパックを分解・改造しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

特別な保管方法はなし。

【保守・点検に係る事項】

定期的を目視で点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者：
株式会社 キーラー・アンド・ワイナー
TEL：03-3815-7787
2. 製造業者：
Keeler Ltd.
(キーラー社：英国)

取扱説明書を必ずご参照下さい。