



バンテージ プラス LED ワイヤ付きタイプ

【警告】

- ・装置を落下させるなどして故障した場合には勝手に分解せずに、すみやかに修理を依頼すること。
- ・改造しないこと。

【禁忌・禁止】

- ・故障の場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図、構成



本体



ウオールパック



スマートパック

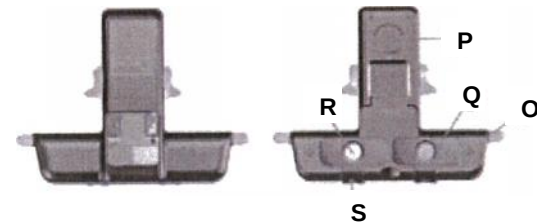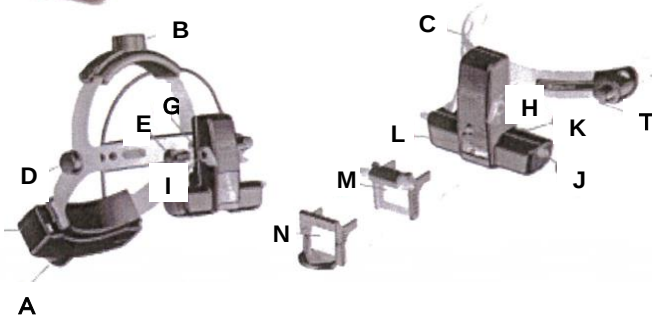

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A: ヘッドバンドサイズ調整ノブ | L: フロント保護ガラス |
| B: ヘッドバンド高さ調整ノブ | M: ハイマグネツ |
| C: 前額バー | N: バイミラー |
| D: 前額バー調整ノブ | O: 鏡体 |
| E: ヒンジ調整ノブ | P: 光源ランプ |
| G: ヒンジ | Q: 接眼部ゴムカバー |
| H: ワンタッチレバー(絞り切換) | R: 鏡体(ビューイングボックス) |
| I: フィルター切換レバー | S: PD 調整ノブ |
| J: ミラーアングルノブ | T: 光量コントロール |
| K: 接眼部 | |

2. 品目仕様等

照明系	照明光束絞り	: 照野径 20、40、60mm 及び開放散乱光
	照明光のアングル調整	: 約220mm±20mm (440mm 焦点位置で)
	光源	: 白色LED
観察系	検者瞳孔間距離(PD)調整	: 48mm~76mm
内蔵フィルター種類	レッドフリーフィルター	: 眼底血管観察用
	コバルトブルーフィルター	: 蛍光アンギオスコープ用 角膜瘻瘻や角膜上皮剥離の発見及び検査に用いる。
寸法 (W×D×H)/ 重量	倒像鏡本体(鏡帯共)	: 横250mm×長さ270mm×高さ157mm/約510g
	ウオールパック	: 83mm(W)×44mm(D)×123mm(H)/約510g
	スマートパック	: 83mm(W)×44mm(D)×95mm(H)/約368g(充電電池込)
	電源(AC/DC)アダプター	: 65mm(W)×37mm(D)×105mm(H)/約290g

操作温度 : +10℃ ~ +35℃

ACアダプター入力 : 100 50/60Hz 0.8A

ACアダプター出力 : 12V 2.5A

ウオールパック・スマートパック入力 : 12V 2.5A

【使用目的又は効果】

本器は非球面レンズと併用して、ヒトの眼底を倒像で立体的に精密観察する為の双眼倒像検眼鏡である。本器は3段階の光束絞り(散大瞳孔、中瞳孔、小瞳孔)を備え、被検眼の瞳孔径にあわせて適切な照明光束を選択できる。

又、光路には眼底血管観察用のレッドフリーフィルターのほか、無フィルター状態及び蛍光アンギオスコープ用コバルトブルーフィルターも選択挿入できる。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書参照のこと。

【使用上の注意】

1. 充電電池はあらかじめ充電しておくこと。
2. ランプが点灯することを確認すること。

【取扱い上の注意】

ヘッドバンドはしっかりと頭部に固定すること。

【保管方法及び有効期間等】

特別な保管方法はない。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【保守・点検に係る事項】

接眼ガラス、反射鏡表面、使用レンズ類のほこり、汚れを消毒用アルコール又はレンズ専用のクリーニングクロスで清拭しておくこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者：

株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

TEL：03-3815-7787

2. 製造業者：

keeler Ltd.

(キーラー社：イギリス)

取扱説明書を必ずご参照下さい。