

スターブライトLEDヘッドライト



【警告】

- ・本製品を落下させたり、強い衝撃を与えると故障の原因となる恐れがある。
- ・本製品は精密医療機器であり、知識及び経験のない者が分解しないこと。
- ・本製品を改造しないこと。

【禁忌・禁止】

- ・可燃性ガスの前では使用しないこと。爆発の恐れがある。
- ・いかなる液体にも浸さないこと。故障の原因になる。
- ・故障・損傷の際には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図、構成



スターブライトLEDヘッドライト I



スターブライトLEDヘッドライト II

本製品は白色 LED を光源とする光源部と電池を組み込んだ電池ケース及びヘッドバンドより構成されており、ヘッドバンドの種類及び電池ケースの取り付け位置により型式名称が区別されている。

	型式名称
1	スターブライトLEDヘッドライト I
2	スターブライトLEDヘッドライト II

本製品の各部の説明は次のとおり。



スターブライトLEDヘッドライト I



スターブライトLEDヘッドライト II

2. 品目仕様等

	項目	仕様
1	使用する電源	単四形電池
2	電源電圧	DC4.5V
3	光源	白色LED
4	光源の明るさ	1W (電源電圧4.5V時)

【使用目的又は効果】

本製品は医師等医療従事者が手術等の際に手術部位を光源で照らし、手術部位を明るくする為の照明として使用する。


【使用方法等】

1. 使用前に電池ケースの電源スイッチを投入し、白色LED光源の発光量を確認すること。


白色LED光源の発光量が弱く成った場合には速やかに全ての電池を交換すること。

電池を交換する際は電池ケースの蓋を横に引いて外すこと。

電池交換後、電池ケースの蓋を横から挿入し、しっかりと取り付けられたことを確認すること。

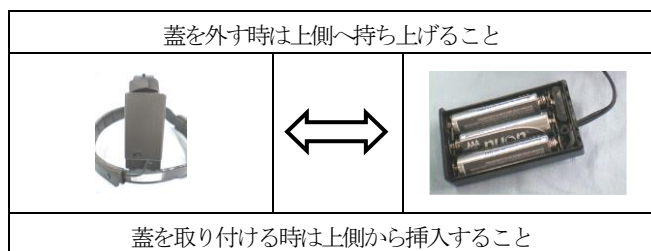

スターブライトLEDヘッドライトⅠ

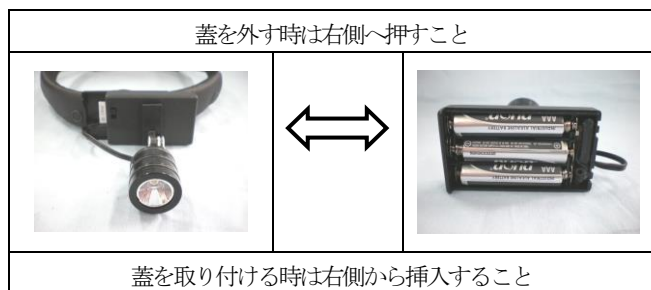

スターブライトLEDヘッドライトⅡ

注 意

電池を交換する際は3本全ての電池を一度に交換すること。

また、電池の極性に注意し、電池ケースの電池収納部に描かれた絵を参照して電池を挿入すること。

2. 本製品を術者の頭部に装着し、ヘッドバンドの位置を調整する。
3. 電池ケースの電源スイッチを投入し、術野部位の照明として使用する。
4. 使用後は本製品を頭部から外し、必ず電池ケースの電源スイッチを切ること。

注 意

長時間使用しない場合には、電池の液洩れを防ぐ為に電池ケースから電池を外すこと。

5. 本製品が汚れた場合には、光源レンズ表面の汚れはレンズ清掃用布で清掃するか、埃等はブロアーで空気を吹き付けて清掃すること。本体外装の汚れは中性洗剤を塗布した布等で拭くこと。
6. 本製品は精密医療機器であり、埃等の付着を防ぐために使用後は必ず埃等を被らない場所に保管すること。

【使用上の注意】

1. 使用前に照明用光源LEDの点灯を確認すること。
2. 照明用光源LEDの光量が弱い時には3本全ての電池を新しいものに交換すること。
3. 電池の極性に注意し、電池ケースの電池収納部に描かれた電池の絵を参照して電池を挿入すること。
4. 電池を交換する際には電池ケースの蓋を横に引いて外すこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本製品は精密医療機器であり、埃等の付着を防ぐために必ず埃等を被らない場所に保管すること。
2. 長期間使用しない場合には本製品より電池を抜いて保管すること。

【取扱い上の注意】

本製品は精密医療機器であり、取り扱いには充分注意を払うこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 定期的に目視で点検し、レンズ部分はレンズクリーニングクロスで清掃すること。
2. 電池は定期的に新しいものと交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者：
株式会社キラー・アンド・ワイナー
TEL：03-3815-7787
2. 製造業者：
QED（キューイーディー社：米国）