



CUDA 3.5mm 径 シングルファイバーケーブルヘッドライト

【警告】


・本体に損傷がある場合には使用しないこと。また、定期的に目視で点検すること。

【禁忌・禁止】

・ヒトの眼を直接照射しないこと。また光を凝視しないこと。
・可燃性ガスが充満している状況に放置しないこと。
・いかなる液体にも浸さないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図、構造

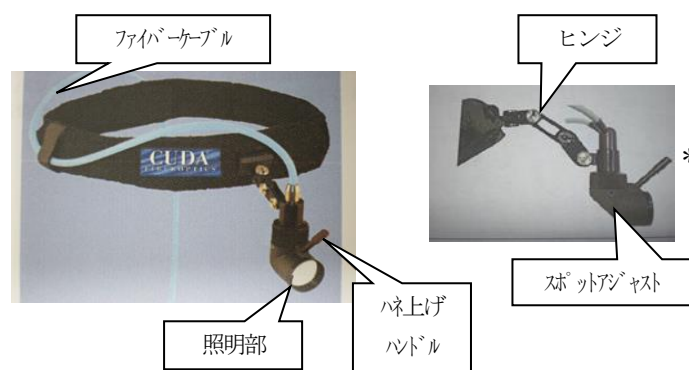

2. 寸法、重量

(1)ヘッドバンド長さ	71.1 cm
(2)ヘッドバンド高さ	3.8 cm
(3)ヘッドバンド重量(ライト除く)	76.5 g
(4)ファイバーケーブル長さ	275 cm
(5)ファイバーケーブル径	3.5 mm
(6)ファイバーケーブル重量	187 g

**【使用目的又は効果】

術者の頭部に配置し、手術中に術者手元の影部分を照射するものである。

【使用方法等】

取扱説明書を参照のこと。

** 使用の際は次のことを注意すること。

1. 本機器使用時は取扱に精通しておくこと。
2. 医療行為で使用する際は取扱説明書を良く読むこと。
3. 他社製の製品と組み合わせて使用する際は他社の取扱書にも従うこと。

4. 使用前にファイバーケーブルの手入及び滅菌(必要時)が適切に行われているか確認すること。
5. 光源装置は光と同時に熱も発生するため、装置本体も熱くなるので注意すること。
6. グラスファイバーが折損するおそれがあるため、ファイバーケーブルを60度以上曲げないこと。
7. 目に強い不快感をもたらすため、ファイバーケーブル及び光源装置の光を直接見ないこと。
8. 火災の原因となるため、使用中の光源装置及びファイバーケーブルに布などをかぶせないこと。また、燃えやすい物の上に乗せないこと。
9. 可燃性ガスが充満している状況に放置しないこと。
10. いかなる液体にも浸さないこと。
11. ファイバーケーブルの光源装置接続部は熱くなるため注意すること。装置本体は最低5分間放置して冷却すること。

**【保管方法及び有効期間等】

特別な保管方法はなし。

【取扱い上の注意】

本体に損傷がある場合には使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

定期的に目視で点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者:

株式会社 キーラー・アンド・ワイナー
TEL: 03-3815-7787

2. 製造業者:

Sunoptic Technologies

(サンオプティック・テクノロジーズ社: アメリカ合衆国)

取扱説明書を必ずご参照下さい。