




フレーム型瞳孔距離計 SM-PD

【形状・構造及び原理等】

計測距離から約 4 mm 足した値)

1. 外観形状、構造

本製品は眼鏡フレームの前方にスケールを固定した瞳孔間距離計である。被検者が本製品を装着した顔写真を撮影することで、スケール上に被検者の両眼が配置された状態の静止画像が得られるため、この目盛を読むことで、簡便に瞳孔間距離を計測することができる。（計測範囲は 40～80 mm）。

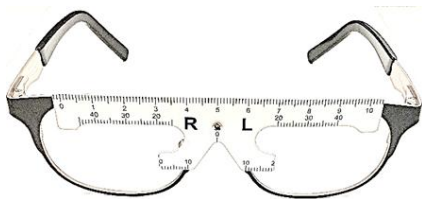


体に接触する部分の組成：チタン、アセテート（酢酸セルロース）、シリコーン

2. 寸法及び重量

寸法：内幅 132 mm、長さ 131 mm (±1.0 mm)

重量：22 g (±0.1g)

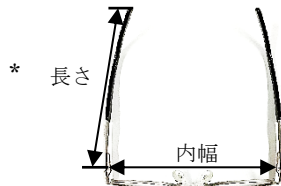

【使用目的又は効果】

本製品は処方レンズ又は双眼ルーペを適切に装着するため、瞳孔間等の両眼間の距離を測定することを目的とする。

【使用方法等】

1. 検査前準備

- (1) 撮影用のカメラを用意する。
- (2) 検査者は被検者に眼鏡フレームを装着させ、以下の調整を行う。
 - 1) 眼鏡フレームを水平にする。
 - 2) ノーズパッドの調整を行う。
 - 3) テンプルの調整を行う。

2. 検査手順

- (1) 被検者が本製品を装着した状態で検査を行う。
- (2) 被検者の正面から視線の高さに合わせて約 40～50 cm 離れた位置にカメラをセットし、被検者がカメラに注視した状態で顔写真の撮影を行う。
- (3) 撮影した写真から被検者両眼の瞳孔中心の目盛を読み、瞳孔間の距離を計測する。（遠用眼鏡を処方する時は

【使用上の注意】

<その他の注意>

- ・ 塩分、イオンを含む空気の影響を受けない場所で使用する。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光を避け、温度や湿度の影響を受けない 0～40℃ の乾燥した場所に保管する。
- ・ 汚れ、塩分、イオンを含む空気の影響を受けない場所に保管する。
- ・ 有効期間は特になし。

【保守・点検に係る事項】

詳細は取扱説明書を確認のこと。

- ・ 濃度 70 %w/v 以下の消毒用アルコールに湿らせて絞った、柔らかい布や綿を用いて清拭消毒する。
- ・ 汚れがある場合は希釈した中性洗剤を含ませて固く絞った柔らかい布で、外面を清拭後、乾燥させる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

TEL: 03-3815-7787

製造業者：Surgimag Co., Ltd.（大韓民国）