

**** キーラー アプラネーショントノメータ D-KAT の付属品**



再使用禁止

(トノジェット L 900)

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図、構造



- (1) 原材料 : PMMA (メタクリル酸メチル樹脂)
- (2) 本体色 : 全体に半透明
- (3) 重量 : 1.5 g

【使用目的又は効果】

眼球内の圧力を眼球壁の緊張度に基づいて角膜を介して測定し、情報を診断のために提供すること。

【使用方法等】

1. 外装包装から滅菌個別包装を抜き出す。



2. 滅菌個別包装を目視確認する。




3. 滅菌個別包装を開封する。




4. 滅菌個別包装の開封口を開き、本製品を取り出せる状態にする。




5. 滅菌個別包装ごと本製品を指で保持する。

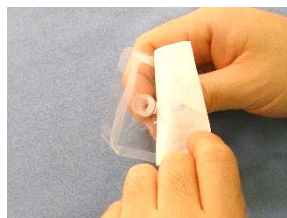

6. 眼圧計のマーク線と本製品のマークとを合わせる。

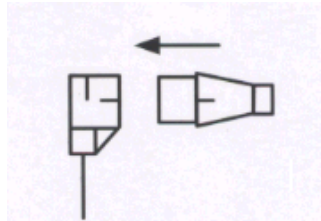

7. 眼圧計の眼圧測定部に本製品を押し込んで嵌める。

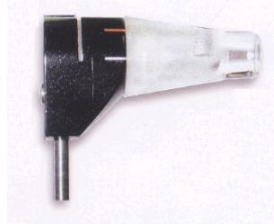

8. 眼圧計を用いて被検者の眼球内の圧力を測定する。
9. 眼圧計を用いた被検者の眼球内の圧力の測定が終わった後、本製品を眼圧計から外す。
10. 本製品を使用後は感染症の感染を防ぐため、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に従って廃棄すること。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・ 滅菌個別包装を目視にて確認し、滅菌個別包装自体に破損が見られる場合には滅菌状態が保たれていない恐れがあるので使用を中止し、廃棄医療機器として速やかに廃棄すること。
- ・ 本製品は滅菌医療機器であり、手指等で触れると汚染する恐れがあるので取り扱いに注意すること。
- ・ 被検者の眼球内の圧力を測定する際は、必ず眼圧計の取扱説明書を参照すること。
- ・ 本製品は単回使用の医療機器であり、被検者が代わる際には必ず新しい製品に交換すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本製品は単回使用製品である。使用は1回限りとし、再滅菌、再使用はしないこと。
2. 使用前に必ず滅菌個別包装の状態を確認し、破損やシールの剥がれ等の異常が認められる場合には使用せず、廃棄すること。

取扱説明書を必ずご参照ください

3. 使用前に必ず圧平面に傷や異物が付着していないか確認し、異常が認められる場合には使用せず、廃棄すること。【被検者の角膜に損傷を与える恐れがある】
4. 本製品の保管、開封、使用に際しては本紙及び眼圧計並びに細隙灯顕微鏡等の取扱説明書に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

乾燥冷暗所保管

<有効期間>

有効期間 3年

外包装側面及び滅菌個別包装面に年月を表示。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者：
株式会社キーラー・アンド・ワイナー
TEL：03-3815-7787
2. 製造業者：
Luneau Technology operations（フランス）