


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用研削・研磨器材キット 70906000

チタンポリッシングキット

【形状・構造及び原理等】

形状

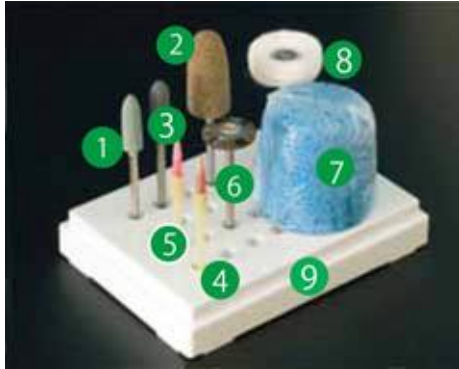

- ・チタンルージュは目に入らないように注意して下さい。
万一目に入った場合はこすらず直ちに水で十分洗い流して下さい。
- ・目の損傷を防ぐ為、保護メガネ等を装着して使用して下さい。
- ・研磨作業を行う時は粉塵による人体への影響を避ける為局所吸引装置、防塵マスクなどを使用して下さい。
- ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・室温保管
- ・水分・腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管して下さい。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社キクタニ
電話番号：073-432-7135
FAX 番号：073-424-3902
製造元：株式会社キクタニ

仕様

	商品名	形状 技工用 HP 用	最高 回転数
①	カーボランダムポイント	Φ5 mm長さ 17 mm砲弾型	30,000
②	ビッグバフポイント	Φ11 mm長さ 24 mm砲弾型	15,000
③	スモールバフポイント	Φ5.5 mm長さ 15.5 mm砲弾型	30,000
④	スティックポイント ワインミニ	Φ2.35 mm長さ 16.5 mm砲弾 型	30,000
⑤	スティックポイント レッドミニ	Φ2.35 mm長さ 16.5 mm砲弾 型	30,000
⑥	馬毛ブラシ	Φ15 mm厚さ 1 mmホイール状	15,000
⑦	チタンルージュ	Φ30 mm長さ 25 mm円柱形	
⑧	フェルトバフ	Φ22 mm厚さ 10 mmホイール状	15,000

原理

本セットはチタン補綴物の咬合面調整時に使い、仕上げを容易にする。

【使用目的又は効果】

本材は番号の順番に歯科用ハンドピースに装着し、歯科鑄造物を口腔外で研削・研磨する際に使用する。

【使用方法等】

- スプールカットの後①のカーボランダムポイントで全体の面をスムーズに整える。
- ②ビッグバフポイントで全体の面を整える。
- ③のスモールバフポイントで咬合面の小窩裂溝など細部の面を整える。
- ④、⑤のスティックポイントミニ ワイン、レッドで咬合面や小窩裂溝などの溝を整える。⑦チタンルージュを付着させ回転させた⑥馬毛ブラシや⑧フェルトバフで研磨すると光沢が得られる。

【使用上の注意】

- ・それぞれ通法により HP に確実に装着し、回転数を守って使用して下さい。
- ・馬毛ブラシにチタンルージュを付着させるとき、強く押し付けかない下さい。