


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用研削・研磨器材キット 70906000
義歯・レジン冠ポリッシングキット

【形状・構造及び原理等】

・本キットは義歯・レジン冠補綴物の咬合面調整時に使い、仕上げを容易にする。

*キット写真

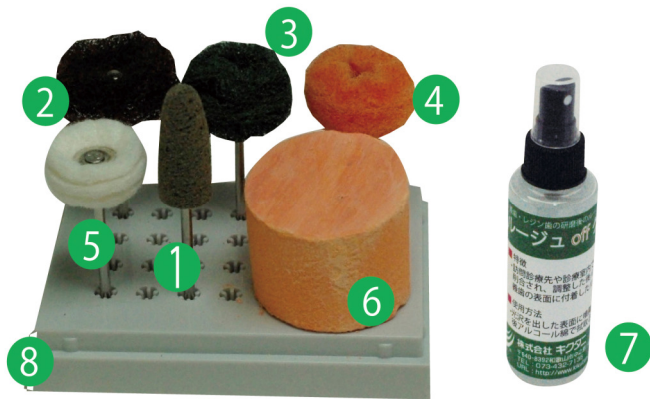

- ・長時間連続で使用すると過熱を帯びることがあるので、断続的に使用するように注意すること。
- ・オレンジルージュは目に入らないように注意して下さい。万一目に入った場合はこすらず直ちに水で十分洗い流して下さい。
- ・目の損傷を防ぐ為、保護メガネ等を装着して使用して下さい。
- ・研磨作業を行う時は粉塵による人体への影響を避ける為局所吸引装置、防塵マスクなどを使用して下さい。
- ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・室温保管
- ・水分・腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管して下さい。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 ： 株式会社キクタニ
電話番号 ： 073-432-7135
FAX 番号 ： 073-424-3902
製造元 ： 株式会社キクタニ

【使用目的又は効果】

本キットは義歯・レジン冠歯科補綴物を口腔外で研削・研磨する際に使用する。

【使用方法等】

本材は番号の順番に歯科用ハンドピースに装着し、歯科補綴物を口腔外で研削・研磨する際に使用する。

- ①のビッグバフポイントで全体の面を整える。
- ②から④のアフロブラシで順番に削合の面を滑らかに整える。
- ⑥のオレンジルージュを付着させ回転させた⑤のフェルトパフで研磨すると光沢が得られる。
- ⑦ルージュオフをスプレーして数分後、研磨面を水洗する。

【使用上の注意】

- ・それぞれ通法により HP に確実に装着し、回転数を守って使用して下さい。
- ・変形、損傷（錆、まがり、汚損）等のものは使用しないこと。