

## NeoConnect フィーディングキット

## 再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

- (1) 再使用禁止
- (2) 再滅菌禁止


## ＜使用方法＞

経腸栄養ライン以外の投与ラインには接続しない。[経腸栄養ラインに投与されるべき内服液剤等により、重篤な症状になる可能性がある。]

## 【形状・構造及び原理等】

## 外観図


## 《シリンジ》

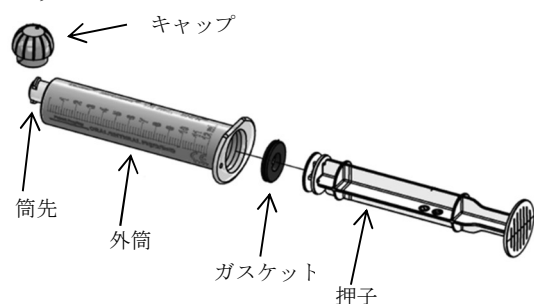

筒先は ISO80369-3 (ENFit) 対応

容量：1、3、6、12、20、35、60、100 mL

## 《ストロー》

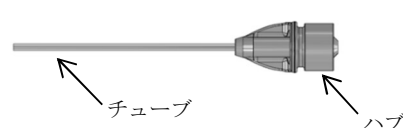


全長：80mm、152mm

ハブは ISO80369-3 (ENFit) 対応


## 《エクステンションチューブ》

## (タイプ 1)

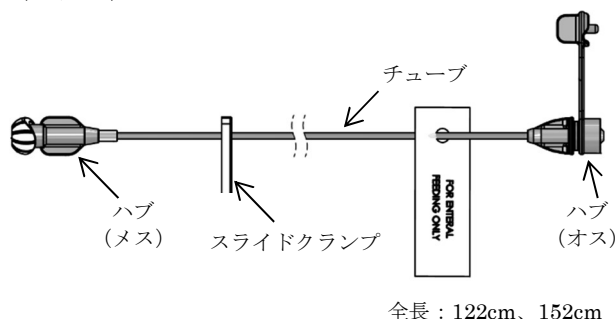


全長：122cm、152cm

## (タイプ 2)

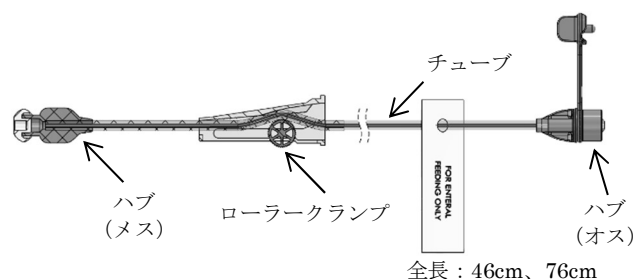

全長：46cm、76cm

## (タイプ 3)

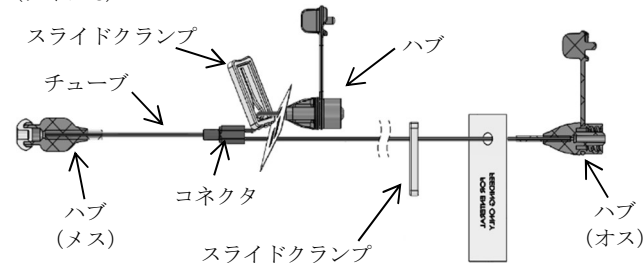


全長：20 cm、152cm

ハブは ISO80369-3 (ENFit) 対応

## 《経口投与用アクセサリ》

## (タイプ 1)

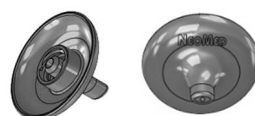

ISO80369-3 (ENFit) 対応

## (タイプ 2)



## 《シリンジアダプター》



ISO80369-3 (ENFit) 対応

## 血液・体液に接触する部分の原材料：

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| シリンジ         | ポリプロピレン、シリコーン          |
| ストロー         | ポリ塩化ビニル*、ABS 共重合体      |
| エクステンションチューブ | ポリ塩化ビニル*、ABS 共重合体、MABS |
| 経口投与用アクセサリ   | ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル*       |
| シリンジアダプター    | ポリプロピレン                |

\*可塑剤としてフタル酸ジ・2 エチルヘキシルは使用していない (DEHP フリー)

**原理**

本品は、シリンジ、ストロー、エクステンションチューブ等からなる経腸栄養注入セットである。本品を経腸栄養チューブに接続して使用する。本品の構成部品は単品で輸入・販売されることがある。

**【使用目的又は効果】**

本品は胃又は腸に挿入した経腸栄養ラインと連結して経腸栄養剤等を投与するために使用する。

**【使用方法等】**

## 《シリンジ》

1. 本品を包装から取り出す。
- 2-1. 直接吸引する場合
  - ① 押子を引き薬液等を吸引する。
- 2-2. ストローを使用する場合
  - ① ストローを包装から取り出しシリンジ筒先に接続する。
  - ② 押子を引き薬液等を吸引する。
  - ③ 吸引後ストローを取り外す。
3. 薬液等を本品に入れた状態で一時的に保管する場合は、本品の筒先にキャップを装着し保管する。また、別のサイズのシリンジに薬液等を移し替える場合、シリンジアダプターを使用する。装着したキャップは注入の際に外す。
4. 注入
  - ① カテーテル等と接続する場合  
カテーテル等と接続して、押子を押して薬液等を注入する。
  - ② 経口投与する場合  
経口投与用アクセサリをシリンジの筒先に接続し、経口投与する。

## 《エクステンションチューブ》

1. 本品を包装から取り出す。
2. 本品をシリンジ等の筒先に接続する。
3. チューブ内を薬液等で満たす。
4. 栄養カテーテル等と接続し、投与を開始する。

## (廃棄方法)


1. 廃棄する場合、各施設の感染性廃棄物の処理規定に従って処分する。

**＜使用方法等に関連する使用上の注意＞**

- (1) 投与量を正確にするため、余分な気泡を排出すること。
- (2) 詰まりの可能性を最小限に抑えるために、投与前に薬液等を十分に混ぜて均一な状態にすること。
- (3) 余分な気泡を抜きカテーテル等と接続すること。

**【使用上の注意】****＜重要な基本的注意＞**

- (1) シリンジサイズ6mL以下の場合、用量精度を確保するために、チップのくぼみ部分（下図参照）に薬剤等流体を流れ込ませないこと。

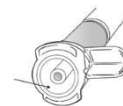

- (2) 既定の最大容量（目盛り）を超える量は吸い込まないこと。
- (3) 経腸投与以外の用途での本品は使用しないこと。
- (4) エクステンションチューブを24時間以上連続で使用しないこと。
- (5) パッケージが開封または破損している場合は使用しないこと。
- (6) 鉗子、クランプや鋭利な器具を使用しないこと。
- (7) 吸引前に押子を完全に押し込み、バレル内の空気を抜くこと。
- (8) 患者が誤ってキャップを飲み込む等しないよう注意すること。

**＜不具合・有害事象＞**

- (1) その他の不具合
  - ・チューブの閉塞、破損、変形
  - ・チューブからの漏れ
  - ・接続部の接続不良、破損

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法  
高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて保管すること。
2. 有効期間  
包装材に表示のとおり

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：

アバノス・メディカル・ジャパン・インク  
TEL: 045-682-5150

外国製造業者：

アバノス メディカル インク（米国）  
Avanos Medical, Inc