

*2023 年 5 月 作成 (第 2 版)
2022 年 11 月 作成 (第 1 版)

認証番号: 226ADBZX00194000

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 短期的使用胃瘻栄養用チューブ 35419002
(短期的使用胃瘻用ボタン 38565002)

MIC* 栄養チューブ

(モデル番号: 8140 製品タイプ: バルーン・ボタン型 ISO80369-3 対応)

再使用禁止

【警告】

1. チューブ留置後及び栄養剤等の投与前には、バルーンが完全に胃内にあることを必ず確認すること。[バルーンが腹腔内にある状態で栄養剤等を投与すると、腹膜炎等の重篤な合併症を引き起こすことがある。]
2. 胃壁と腹壁を過度に圧迫しないよう、適切な長さの本品を選択し、瘻孔長よりも短いものは使用しないこと。[組織の圧迫壊死あるいはチューブの逸脱を生じるおそれがある。]
3. チューブ抜去の際、チューブが瘻孔に癒着している場合は無理に引き抜かず、内視鏡的に抜去すること。[瘻孔粘膜組織の損傷又はチューブの破損が生じるおそれがある。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
＜適用対象（患者）＞
以下の患者には適用しないこと。
 - ・ 交換用として本品を使用する場合、胃瘻孔が完全に形成されていない患者 [瘻孔破損のおそれがあるため]
 - ・ 腹水症
 - ・ 門脈圧亢進症
 - ・ 腹膜炎
 - ・ 病的肥満
 - ・ 結腸移植経験のある患者

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品には下記構成部品が含まれている。

- | | |
|-------------------------------|-------|
| (1) 栄養用チューブ (MIC-KEY バルーンボタン) | : 1 本 |
| (2) 接続チューブ | |
| 1) 直角接続チューブ | : 1 本 |
| 2) ボーラスストレート接続チューブ | : 1 本 |
| (3) シリンジ | |
| 1) ルアーチップシリンジ (6mL) | : 1 本 |
| 2) ISO80369-3 対応シリンジ (35mL) | : 1 本 |
| (4) ガーゼ | |

2. チューブサイズ (表 1)

チューブ シャフト長 外径	12 Fr	14 Fr	16 Fr	18 Fr	20 Fr	24 Fr
0.8 cm	○	○	○	○	○	—
1.0 cm	○	○	○	○	○	—
1.2 cm	○	○	○	○	○	—
1.5 cm	○	○	○	○	○	○
1.7 cm	○	○	○	○	○	○
2.0 cm	○	○	○	○	○	○
2.3 cm	○	○	○	○	○	○
2.5 cm	○	○	○	○	○	○
2.7 cm	○	○	○	○	○	○
3.0 cm	○	○	○	○	○	○
3.5 cm	○	○	○	○	○	○
4.0 cm	○	○	○	○	○	○
4.5 cm	—	○	○	○	○	○

3. バルーン充填量 (表 2)


チューブ 外径	バルーン充填量	
	推奨	最大
12Fr	3mL	5mL
14～24Fr	5mL	10mL

4. 形状及び構造等

(1) 栄養用チューブ <MIC-KEY バルーンボタン>

フィーディングポートにエクステンションセットを接続し、栄養剤等を投与するために留置されるボタン型チューブである。


表 1 のチューブ長及びチューブ径はそれぞれ瘻孔長及び瘻孔径に相当する。

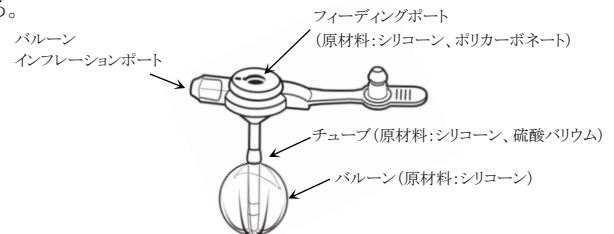

* (2) 接続チューブ


1) 直角接続チューブ

栄養用チューブのフィーディングポートに接続し使用する。

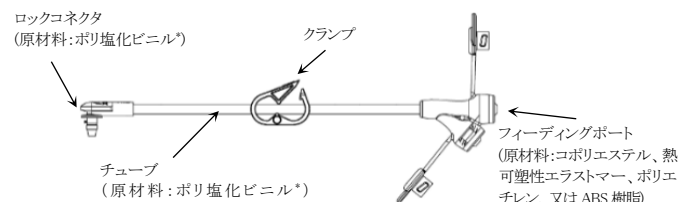

2) ボーラスストレート接続チューブ

栄養用チューブのフィーディングポートに接続し使用する。

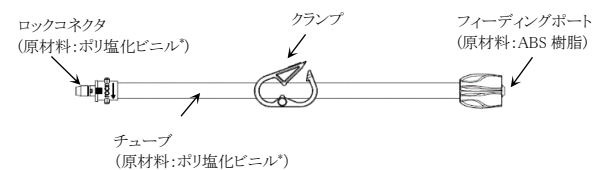

*可塑剤としてフタル酸ジ-2 エチルヘキシルは使用していない (DEHP フリー)

(3) シリンジ


1) ルアーチップシリンジ (6mL)

栄養用チューブのバルーンインフレーションポートに接続し、バルーンの拡張又は収縮に使用する。



2) IS080369-3 対応シリンジ (35mL)

接続チューブのフィーディングポートに接続し、栄養投与又は胃内容物（液体）の吸引に使用する。

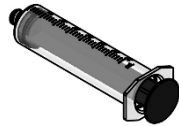

(原材料:ポリプロピレン、イソブレンゴム)

【使用目的又は効果】

本品は、栄養剤等を経管的に胃若しくは腸に投与すること又は胃内の減圧を行うことを目的として、胃瘻を通して短期的に留置して使用されるチューブである。

【使用方法等】

* 1. チューブの選択

- 1) 瘻孔長測定器具を用いて瘻孔の長さを測定し、適切な長さのチューブを選択する。栄養用チューブのサイズは【形状・構造及び原理等】の表 1 の通りである。瘻孔長の測定方法は MIC * ストーマメジャリングデバイス（届出番号：14B1X10005000220）の電子添文を参照すること。

2. チューブの準備

- 1) バルーンインフレーションポートにルアーチップシリンジを差し込み、滅菌蒸留水又は精製水でバルーンを拡張させる（充填量は【形状・構造及び原理等】の表 2 参照）。
- 2) バルーン等から漏れがないこと、バルーン形状が均等であることを確認した後に、シリンジを再挿入してバルーンから水を抜き、チューブに水溶性潤滑剤を塗布する。

注意 バルーン形状が均等でない場合は、もみほぐして形を整えること。

注意 鉱物油や石油系のゼリーを潤滑剤として使用しないこと。

3. チューブの留置

(1) 胃瘻を初期造設した場合

- 1) 造設した際に設置したガイドワイヤ等に沿ってチューブを瘻孔に通し、胃内部に挿入する。
- 2) チューブが胃内部にあることを確認した後に、ガイドワイヤ等を取り除く。
- 3) バルーンインフレーションポートにルアーチップシリンジを差し込み、滅菌蒸留水又は精製水でバルーンを拡張させる。

(2) 既に留置されているチューブの交換を行う場合

- 1) 留置されているチューブを適切な方法で抜去した後に、チューブを瘻孔から胃内部に挿入する。
- 2) バルーンインフレーションポートにルアーチップシリンジを差し込み、滅菌蒸留水又は精製水でバルーンを拡張させる。

注意 チューブ留置の際には、チューブ又はバルーンを傷つけないよう注意すること。チューブを鉗子等で把持しないこと。

注意 バルーンの破裂又は破損を防ぐため、【形状・構造及び原理等】の表 2 に記載の最大充填量を超えないこと。

注意 空気によるバルーンの拡張はしないこと。[短時間で脱気してバルーンが収縮するおそれがあるため。]

注意 造影剤によるバルーンの拡張はしないこと。[造影剤成分が凝固し、バルーンの収縮ができなくなるおそれがあるため。]

注意 生理食塩水によるバルーンの拡張はしないこと。[結晶化してバルーンのパルプやルーメンが詰まるおそれがあるため。]

4. 接続チューブとの接続

注意 コネクタ形状に適合したシリンジ又は栄養ラインを接続すること。

- 1) 接続チューブ（直角接続チューブ又はボラスストレート接続チューブ）をチューブのフィーディングポートに接続する。
- 2) IS080369-3 対応シリンジを用いて 10mL の水又は微温湯でフラッシュし、瘻孔周囲に漏れがないことを確認する。

注意 接続チューブを栄養用チューブに接続するときは、接続チューブのコネクタにある黒色ラインを栄養用チューブのフィーディングポートの黒色ラインにそろえて差し込み、軽く抵抗が感じられるまで（約 3/4 回転）時計回り方向に回し、それ以上回転させないこと。[爪が破損し、固定できなくなるため。]

5. 栄養投与

- 1) シリンジを用いて、接続チューブのポートからチューブ内をフラッシュして湿らせる。
- 2) 栄養剤を充填したシリンジ又は栄養ラインを接続チューブのポートに接続し、栄養を投与する。
- 3) 栄養投与後、シリンジを用いて接続チューブのポートから水又は微温湯を流して接続チューブ及びチューブ内を洗浄し、接続チューブを取り外す。

注意 栄養剤等を投与する際は、バルーンが正常に拡張し、胃内に留置されていることを確認すること。

注意 20～30mL の水又は微温湯（乳幼児及び新生児の場合は 10～15mL）を使用して、栄養剤等の投与前後に必ずフラッシュを行うこと。長時間持続投与の場合でも、6 時間に 1 度はフラッシュしてチューブ内腔を洗浄すること。[乾燥しているとチューブ内腔に栄養剤等が堆積しチューブ異常の原因となるため。]

注意 本品に IS080369-3 対応のシリンジ又は栄養ラインを接続するときは、きつく締め過ぎないこと。

注意 粘性の高い栄養剤等を使用する際は、接続チューブ（直角接続又はボラスストレート）を使用し、閉塞に注意して管理を行うこと。

6. 減圧

- 1) 接続チューブを栄養用チューブのフィーディングポートに接続し、減圧を行う。
- 2) 減圧後、シリンジを用いて接続チューブのポートから水又は微温湯を流して接続チューブ及びチューブ内を洗浄し、接続チューブを取り外す。

注意 減圧の際に、高圧での連続的/間歇的吸引は行わないこと。[胃腔の虚脱の原因となるため。]

【使用上の注意】

<使用注意（次の患者には慎重に適用すること）>

- 1) 高度の胃食道逆流がある患者に使用する場合は、注意して使用すること。[胃瘻からの栄養投与によって、胃食道逆流の症状が悪化するおそれがあるため。]
- 2) 新生児や乳幼児の場合は、胃瘻造設部位に注意すること。[バルーンを拡張させたときにバルーンが幽門を閉鎖する可能性があるため。]

<重要な基本的注意>

- 1) チューブの留置及び抜去は必ず医師が行い、介護者自らの留置又は抜去は行わないこと。
- 2) 閉塞解除の目的として、スタイレットやワイヤーブラシ等をチューブ内に挿入しないこと。
- 3) シリンジ等を用いた栄養剤等の投与及びフラッシュ操作の際、抵抗を感じたら無理な加圧操作は行わないこと。また、詰まりが解消しない場合には新しいチューブと交換すること。[チューブの破裂等が生じるおそれがあるため。]
- 4) チューブを介しての散剤等（特に添加剤として結合剤を含む薬剤）の投与は、チューブ詰まりのおそれがあるので注意すること。

- 5) 胃液・腸液の逆流が認められた場合は、チューブをフラッシュすること。〔チューブ閉塞や破裂のおそれがあるため。〕
- 6) チューブ及び接続チューブは、挿入、留置中及び抜去の際、無理に引っ張ったり折ったりせず注意して丁寧に扱うこと。〔チューブが破損又は断裂するおそれがあるため。〕
- * 7) 接続チューブは、中鎖脂肪酸等の油性成分、又は、これらを含む栄養剤等を投与する場合、及び、アルコールを含む消毒剤を使用する場合、フィーディングポートのひび割れについて注意すること。〔接続時の締めつけ等でひび割れが生じ、液漏れ等のおそれがある。〕
- 8) 胃瘻孔が完全に形成されるまでチューブ交換は行わないこと。
- 9) チューブを抜去するときは、チューブを 360 度回して容易に動くことを確認し、瘻孔周囲やチューブにトラブルがないことを確認すること。
- 10) バルーンの収縮が早くなった場合は、バルーンの破裂、ピンホール（バルーン充填液量が過剰、又は胃液の量、pH、薬剤等による影響）又は、バルーンインフレーションポートからの漏れの可能性があるため、新しいチューブに交換すること。
- 11) 本品は、留置後 30 日以内に交換すること。
- 12) 栄養投与及び留置後の管理は医師の指示において適切に行うこと。
- 13) 痛み、圧迫感、不快感の症状がないか、患者の評価を毎日行うこと。チューブのサイズ（特にチューブ長）がきつくないことを観察すること。異常が認められた場合は、適切な処置を行うこと。
- 14) 1 週間に 1 回を目安にバルーン充填液を全て抜き、推奨充填量の滅菌蒸留水又は精製水を再注入すること。また、抜き取った水の量、注入した水の量、及び日時を記録すること。〔バルーン充填液は胃内の浸透圧等の影響を受けて自然に減少し、バルーンが収縮するため。〕
- 15) 毎栄養投与後、瘻孔周囲の観察を行い、皮膚は清潔で排膿のない乾燥した状態を保つようにすること。
- 16) 瘻孔及び周辺部は、毎日 1 回、微温湯と低刺激性の石鹸で洗浄し、自然乾燥させること。
- 17) 本品若しくは接続チューブのフィーディングポートは定期的に綿棒や柔らかい布を用いて清拭し、清潔に保つこと。〔接続部の汚れ・油分等の付着により接続部の外れが生じるため。〕
- 18) 使用後の接続チューブ及びカテーテルチップシリンジ又は ISO80369-3 対応シリンジは、微温湯と中性洗剤で洗浄した後に十分にすすいで自然乾燥させ、清潔に保管すること。高温下での洗浄及び乾燥は行わないこと。
- 19) 非臨床試験によって本品は MR Conditional であることが示されている。本品を装着した患者に対して、以下に示される条件下においては、安全に MR 検査を実施することが可能である。（自己認証による）
- ・静磁場強度：1.5T 又は 3T
 - ・静磁場強度の勾配：1,960Gauss/cm (19.6T/m) 以下
 - ・MR 装置が示す全身最大 SAR：2W/kg（通常操作モード）
- 上記条件で 15 分のスキャン時間において本品に生じ得る最大の温度上昇は 1.3℃以下である。
- 本品が 3T の MR 装置における勾配磁場エコー法による撮像で生じうるアーチファクトは本品の実像から 45mm である。
- 20) 使用中は以下のトラブルシューティングを参照して、適切な管理を行うこと。

問題	原因	対処手順
瘻孔周囲からの漏洩。	バルーンの収縮。	バルーンの充填液量を適切な量に調整し直す。
	バルーンが胃壁に接していない。	1. 適度にチューブを引き上げ皮膚との隙間が 2mm 程度であることを確認する。 2. 2mm 以上ある場合は、適切なサイズのチューブに交換する。

栄養補給ラインが外れる。	接続チューブのフィーディングポート内腔の油分による汚れ。	1. イソプロピルアルコール、又は炭酸水等を含ませた綿棒で接続チューブのフィーディングポート内を清掃する。 2. 改善しない場合は、新しい接続チューブを使用する。
栄養用チューブのフィーディングポートカバーが閉まらない。	カバーのオス側とメス側の摩擦が大きくなっている。	1. フィーディングポートカバーの先端を水で濡らして閉める。 2. 改善しない場合は、新しいチューブに交換する。
接続チューブのチューブ部分に変形してつぶれている。	クランプを閉めたまま放置された。	新しい接続チューブを使用する。また、クランプは使用しないときは常に開けた状態にする。
胃内容物が栄養用チューブのフィーディングポートから漏れ出てくる。	フィーディングポート内にある逆流防止弁に乾燥した栄養剤等の異物が挟まっている。	1. 予防策として、水又は微温湯や綿棒を使用してフィーディングポート内を常に清潔に保つ。 2. フィーディングポート内を観察し異物がある場合は、綿棒や爪楊枝などを用いて注意深く異物を取り除く。 3. 改善しない場合は新しいチューブに交換する。
	フィーディングポート内にある逆流防止弁が経時的に変形した。	長期間にわたり接続チューブが接続された状態が続いた場合、弁の変形が発生する場合がある。このような場合には新しいチューブに交換する。
	フィーディングポート部の接着が劣化した（フィーディングポート部の周囲から漏れてくる場合）。	新しいチューブに交換する。
チューブ閉塞。	栄養剤等の堆積（栄養剤のカード化現象等）。	1. 毎回の栄養剤等の投与の前後に必ずフラッシュする。 2. 栄養用チューブ又は、接続チューブのいずれかが詰まっているのか確認し、新しいチューブに交換する。
減圧ができない。	チューブ閉塞。	10～15mL の水又は微温湯でフラッシュする。水又は微温湯の流れが悪い場合、あるいは抵抗を感じる場合は新しいチューブに交換する。
バルーンが収縮しない。	バルーンインフレーションポートが機能していない	1. バルーンインフレーションポートの内側に栄養剤等が付着していないことを確認する。栄養剤等があれば清拭する。 2. 代替品を用意した上で、ペーパークリップ等で、バルーンインフレーションポート内部を押して、水を排出させる。 3. 新しいチューブに交換する。

<不具合・有害事象>

(1) 重大な有害事象

1) 腹膜炎

チューブ先端が腹腔内にある状態で栄養剤等を投与すると、腹腔内へ栄養剤等が漏出し、腹膜炎を生じることがある。（チューブ先端が適切な位置にあることを確認してから投与を行うこと。）

2) 圧迫壊死

栄養用チューブのチューブ長が実際の瘻孔長に比べ短過ぎる場合には、圧迫壊死を起こすことがある。（留置中は、圧迫し過ぎていないか定期的な観察を行い、チューブを軽く引き上げた際に 2mm 程度の余裕を保つようにする。）

3) びらん、潰瘍、出血又は穿孔

胃瘻チューブの継続的接触により粘膜にびらん、潰瘍、出血又は穿孔を生じることがある。（留置中は定期的な経過観察を行うこと）

- 4) バルーンによる十二指腸閉塞(Ball valve syndrome)
胃瘻造設部位が幽門に近接している場合等に、胃の蠕動運動により、バルーンが幽門（十二指腸）に引き込まれることがある。

* (2) その他の不具合

- 1) バルーンの破損（破裂、ピンホール）
- 2) バルーンの収縮不良
- 3) チューブの閉塞、破損、変形
- 4) チューブからの漏れ
- 5) 各接続部の接続不良、破損
- 6) 栄養チューブの機能不良（逆流防止弁、フィーディングポートカバー）

(3) その他の有害事象

- 1) 瘻孔部周辺の発赤、炎症、膿瘍
- 2) 過度の肉芽腫
- 3) 事故(自己)抜去
- 4) 蠕動運動の減弱又は消失
- 5) 誤嚥・誤嚥性肺炎
- 6) 瘻孔損傷・閉鎖
- 7) 瘻孔の開大
- 8) 感染症

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて保管すること。

2. 使用期間

30 日以内

3. 有効期間

包装材に記載のとおり

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

アバノス・メディカル・ジャパン・インク

TEL：045-682-5150

外国製造業者：

アバノス メディカル インク（米国）

Avanos Medical, Inc.