

医04 整形用品 一般医療機器
家庭用温熱パック JMDNコード 71019000**再使用禁止****販売名:ミニホットンc**

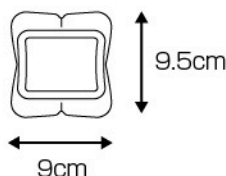
Heat Pad for Stiffness

この説明書をよく読み、ご使用ください。**【禁忌・禁止】****1. 再使用禁止****2. 次の方は使用しない**

①自らの意思ですぐにはがせない方 ②手や足に血行障がいのある方[①②重度のやけどになることがある]

3. 次の部位には使用しない

①粘膜、顔(目のまわりなど)[重度のやけどになることがある] ②湿疹・かぶれ ③傷口 ④打撲・ねんざ[②～④症状が悪化することがある]

【形状・構造及び原理等】鉄の酸化反応による
発熱で患部を温める**【使用目的又は効果】**

使用目的: 温熱治療

効果 : 温熱効果

- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 疲労回復
- 胃腸の働きを活発にする

【使用方法等】

- ① 貼る前に患部の汗を拭きとる。
- ② 1日1回6時間を限度として患部に直接貼付する。

<使用方法等に関する使用上の注意>

●就寝時やふとんの中で使用しない。●本品を使用した状態でさらに上から押さえつけたり、長時間圧迫しない。●コタツや電気カーペットその他暖房器具と併用しない。●熱いと感じたときに、すぐにはがせない状態での使用はさける。●運動時には使用しない。●過度な動きでは使用しない。●強い刺激を感じることがあるので、入浴の60分前から入浴後30分までは使用しない。

【使用上の注意】**1. 使用注意(次の方は慎重に使用すること)**

①皮膚の弱い方 [やけどになりやすい] ②高齢者[生理機能が低下していることが多く、やけどすることがある]

2. 重要な基本的注意

- 1) 貼り薬や塗り薬など医薬品の使用直前、使用中、使用直後には使用しない。
- 2) 次の方は使用前に医師または薬剤師に相談する。
①今までに薬や化粧品などによるアレルギー症状(例えば発疹、発赤、かゆみ、かぶれなど)をおこしたことがある方 ②糖尿病など、温感や血行に障がいをお持ちの方 ③妊娠中の方 ④ばんそうこうなどでかぶれた経験のある方 ⑤香料の刺激に弱い方
- 3) 肌にやけどの症状、赤み、かゆみ、痛みなどが続く場合はすぐに使用を中止し、皮膚科専門医等に相談する。(刺激により一時的に肌にかゆみを感じることがある)

4) 使用中の注意事項**①低温やけど防止のための注意**

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると紅斑、水疱等の症状をおこすやけどを言う。なお、自覚症状をとみなわないで低温やけどになる場合もあるので注意する。

②熱いと感じたときや異常が認められる場合は、すぐにはがす。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光をさけ、涼しい所に保管する。
- 小児の手の届かない所に保管する。

【取り扱い上の注意】

- 温熱シートの発熱が終了したらすぐにはがす。●保温性の高い服を着る場合や、服を重ね着した場合には、熱くなりすぎることがある。1時間に1回程度、肌の状態を確認する。●はがすときはシートの端を持ち、ゆっくりとはがす。一気にはがしたり、無理にはがすと肌を傷めることがある。●食べられないので口に入れない。間違えて飲み込んだときは、うがいをして医師の診断を受ける。●目に入った場合はこすらずすぐに流水で15分以上洗い流し、医師の診断を受ける。●捨てるときは、市区町村で定める区分に従う。●有効期間内に使用する。●使用目的以外に使用しない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

桐灰小林製薬株式会社

〒669-1339 兵庫県三田市テクノパーク18-9

【販売業者】

桐灰化学株式会社

〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目10番5号

製品のお問合せ先(お客様相談室)**☎ 0120-081-331**

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kiribai.co.jp>