

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 綿状パッド 32572000

パイテック メディピタ PyteQ MediPita

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用、再滅菌はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、ポリアクリル酸、ポリビニルピロリドン、およびヒアルロン酸ナトリウムとの混合物とコットン不織布から構成されている。

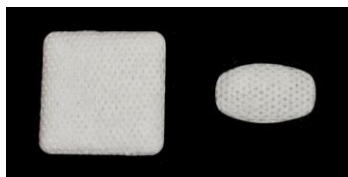

一部素材がはがれている場合があるが、接着剤を使用していないためであり、不良品又は粗悪品ではない。また、製造工程の都合で個々の商品の外観が異なる場合があるが、効能又は効果に影響はない。

2. 寸法

本品のサイズは下記のとおりである。（公差：± 20%）

サイズ S	全長の寸法 2.8cm、幅の寸法 1.7cm
サイズ L	3.6cm×3.6cm

3. 原理

本品を出血面（部位）に適応すると、血液、体液、あるいは消毒液などの水分、アルコール分を吸収し、柔軟な膨潤ゲルとなって組織に強く接着し、創傷部位が保護され、止血される。

【特徴】

- 全ての原料が医薬品添加物として認可されたものであり、生体への安全性が確認されている。
- 動物性のタンパクを含まないため、感染、免疫原性などの心配がない。
- 優れた接着能力を持ち、衣服等との摩擦で剥がれにくい。
- 剥がすときには瘡蓋が傷口に残り、治癒、回復が早い。

【使用目的、効能又は効果】

止血の為に用いる

【品目仕様等】


- 生物学的安全性：適合すること。
- 無菌性保証水準（SAL）： 10^{-6} に適合すること。

【操作方法又は使用方法等】

- 滅菌包装を開封し、本品を取り出してください。
- 使用前に本品が湿らないようにご注意ください。
- 傷が乾いているときには、消毒液、清潔な水、消毒用アルコールなどで傷及びその周辺を洗浄し、湿らせてください。少し濡れた状態のまま、




裏あてのコットン不織布面を上にして、創傷部に直接本品の接着面をあて、上からそっとおさえて接着させてください。接着後は放置すると、創傷部に貼り付いたまま乾いた状態になり、傷口を保護し続けます。

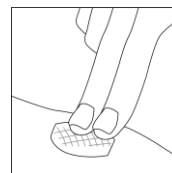

※ 洗浄液、消毒液、血液、体液などの水分、アルコールは、本品が膨潤して柔軟なゲルとなり、傷口に密着するために必要です。

- 本品を貼った上から水がかかると、中にしみ込み全体が濡れた状態になりますが、そのまま放置すると乾いて元の状態に戻ります。
- 本品を剥がす時は、端からそっと持ち上げるようにして剥がしてください。本品が乾燥してからの方が傷を痛めずにスムーズに剥がすことができます。

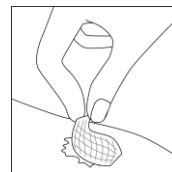

【廃棄】

使用後は医療用廃棄物として処理してください。また、ご家庭では各自治体の指定する方法に従って廃棄してください。

【使用上の注意】

- 包装の破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
- 本品は単回使用製品であり、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- 本品は外用専用である。体内に使用しないこと。
- 再滅菌しないこと。
- 本品は滅菌包装を開封後直ちに使用すること。
- 本品使用中に過敏症状が現れた場合には使用を中止し、適切な治療を行うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 直射日光、および高温・多湿を避けて室温で保管すること。
- パッケージを開封後はしっかりと封をして高温を避けて保管し、早めに使い切ること。

2. 使用期限 包装に記載されている

（製造業者の自己認証による）

【包装】

サイズ S：5 枚／1 パック

サイズ L：2 枚／1 パック

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

[製造販売元・製造元]

金蘭兄弟有限会社

〒164-0012 東京都中野区本町 3-28-16 OMS ビル

お問い合わせ先 電話 03 (3374) 2847

受付時間 9：30～17：00（土、日、祝日は除く）