

機械器具(80) はり又はきゅう用器具
一般医療機器 非能動型接触鍼（JMDN コード：70613001）

首 ま く ら

【禁忌・禁止】

子供、妊娠（または妊娠の可能性のある方）月経中の女性（体格の弱い方）、脳梗塞患者、高血圧患者、糖尿病患者、心臓機能障害のある方、ペースメーカを装着している方はお勧め致しません。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観形状・構造

本製品を首の背面の下に置いて使用することで、本体の凹凸等が首関節等を圧迫し、末梢神経を刺激します。



4. 原理


本製品を頸椎の下に設置し、突起面が椎間関節へ接触し、末梢神経を刺激します。

【使用目的又は効果】


本製品は、首の疼痛緩和、他の治療効果を促進するため、皮膚内に挿入せず、皮膚への接触によって末梢神経を刺激する再使用可能な非能動型器具です。

【使用方法等】


1. 製品を平らに置いて、ゆっくり身体を横にして仰向けになります。

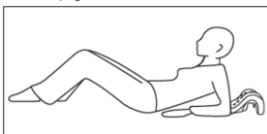


2. 製品の突起面に首や肩を乗せて、首を自然に緩める。頭の重さで首が自然に伸びるようにします。

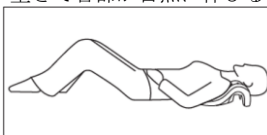

3. ひじを自然に曲げて、左図のように両手を頭の上に上げます。また、膝を立てます。

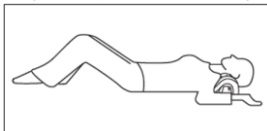

4. 後頭部から地面の距離は 1cm 程度にします。

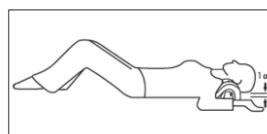

【使用上の注意】

1. 初めは 5 分程度からのご使用をお勧め致します。慣れたら、お身体の状態に合わせて少しずつ使用する時間を増やしてください（長くても 30 分程度）※ご使用回数が多すぎますと、頸椎や筋肉の損傷を引き起こす可能性がありますので、適度にご使用ください。（1 日に 1-2 回のご使用をお勧め致します）
2. 商品の目的以外でのご使用はお避けください。
3. 病気の方や首に異常のある方はご使用をお避けください。
4. 使用中にめまいや吐き気等の症状が現れた場合には、使用を中止し、医師に相談してください。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、適切な場所に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

水洗いはできるが、汚れが目立つ場合は中性洗剤などで優しくふき取ってください。

水にぬらした後はよくふき取り乾かしてから使用してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：熙臣国際株式会社

住所：東京都北区豊島 5-4-1-113

電話番号：03-6789-7591

製造業者

名称：Shenzhen Xinxiyang Home Furnishings Co., Ltd.

中国

取扱説明書を必ずご参照ください。