


機械器具（55）医療用洗浄器
一般医療機器 鼻用洗浄器（JMDN コード：41599000）
電動鼻用洗浄器 R S O 1

【禁忌・禁止】

- ・お子様が使用する際は保護者指導の下で使用する。
- ・内耳と耳膜手術後の場合は使用しないこと。
- ・口腔咽頭部損傷または外科手術を受けたばかりの場合は使用しないこと。
- ・鼻や耳に出血や外傷、外耳道炎等の疾患がある場合は使用しないこと。〔症状が悪化するおそれがある〕。
- ・使用中や使用後になんらかの異常を感じた場合は、使用を直ちに中止すること。
- ・洗浄後に鼻をかむ必要があるため、鼻をかむことのできない方や小さなお子様は使用を控えること。
- ・耳の痛みや中耳炎などの原因となるため、使用直後に鼻を強くかまないこと。
- ・鼻づまりがひどい時や耳に疾患のある際は、医師と相談の上、使用すること。

【形状、構造及び原理等】**1. 外観形状・構造**

本製品は、本体 1 台、充電ケーブル 1 本、水タンク 1 個、鼻洗浄ノズル 1 個、キャップ 1 個、取扱説明書 1 部で構成される。

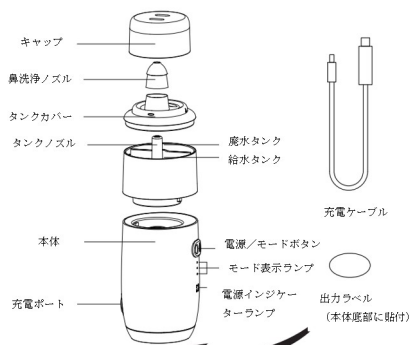**取り外し可能な部品および消耗品について**

本製品の取り外し可能な部品には、キャップ、鼻洗浄ノズル、水タンクカバー、水タンクが含まれる。
鼻洗浄ノズルは交換可能であり、使用者ごとに専用で使うことが推奨される。

2. 電氣的定格

電源：①リチウム電池：3.7V、容量：1400mAh

②電源アダプターを使用：DC5V/1A

3. 原理

本体への電源供給によりウォータータンク内の洗浄水がノズルの先端から噴出され、鼻腔内の洗浄を行う。

4. 性能

ウォータータンク容量：20mL±4mL

5. 原材料

本体：ABS 樹脂

水タンク：ABS 樹脂

キャップ：ABS 樹脂

ノズル：シリコーンゴム

電源ボタン：シリコーンゴム

【使用目的又は効果】

本製品は、電源供給により水タンク内の洗浄水がノズルの先端から噴出され、鼻腔内の花粉、ほこり、雑菌、不快感の除去の為の鼻用洗浄器である。

【使用方法等】

初回使用前に洗浄および消毒を行う必要がある。

1 初回使用前の洗浄と消毒

- ① 洗浄：ノズルとウォータータンクを取り外して、推奨水温（15℃～30℃）で手洗いする。
 - ② 洗消毒：純水（90℃）をウォータータンクに入れて 5 分そのまま放置してから水を捨てる。純水でノズルを洗い流し、乾かす。ノズルは純水に浸けないこと。
- ※注意：沸騰したお湯に浸けたり、電子レンジで加熱したりしないこと。

2 水タンクに塩水を入れる

水タンクのキャップを開け、塩水を貯水タンクに注ぐ（※廃水タンクに注がないよう注意すること）。

3 電源／モードボタンを押して電源を入れる。

- ① 電源／モードボタンを押して電源を入れる。
 - ② 再度ボタンを押すことでモードを切り替えることができる。ボタンを押すたびに、「弱 → 中 → 強」の順にモードが変わる。
- （メモリー機能：洗浄器は、前回の使用時に設定されていたモードを記憶し、次回使用時にその設定を再現する。）

4 使用方法

使用時は口を軽く開け、自然な口呼吸を保ちながら会話を避け、唾液を飲み込まないようにご注意ください。
ゆっくりとノズルを鼻孔に向けて。この時、洗浄ノズルが鼻孔を完全に塞がないようにし、ノズルと鼻孔の間に一定の隙間を空けて、水がその鼻孔から流れ出るようにする。

- ・左鼻洗浄時：頭を右に傾け、水槽の方向を右側に向けて、廃水が廃水タンクに流れるようにする。
- ・右鼻洗浄時：頭を左に傾け、水槽の方向を左側に向けて、廃水が廃水タンクに流れるようにする。

5 使用後の処理


電源ボタンを約 0.8 秒間長押しして、鼻洗浄器の電源を切る。機器の電源を切った後、水タンクに残った塩水と廃水を捨てる。その後、水タンクに約 20mL の清水を注ぎ、電源を入れて清水が使い切られるまで運転する。（機器内部に残った塩水が腐食を引き起こすのを防ぐことができる。）
使用済みの洗鼻ノズルをタンクカバーから取り外し、適切に洗浄・消毒し徹底的に乾かした後、再びタンクカバーに取り付ける。

6 電源表示ランプの説明

バッテリー残量不足：バッテリー残量が不足すると、電源表示ランプが点滅し、充電が必要であることを知らせる。
充電中：充電中は電源表示ランプが点滅し続ける（充電中は製品の使用不可）。

取扱説明書を必ずご参照ください。

充電完了：充電が完了すると、電源表示ランプは点滅から点灯に変わる。

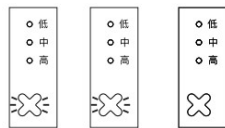

電量不足 充電中 満充電

（その他詳細、使用上の注意は取扱説明書を参照）

【使用上の注意】

1. 正しく安全にご使用いただくために、取扱説明書を必ず読むこと。
2. 本品を使用中に異常を感じた際はすぐに使用を中止し、医師の診察を受けること。
3. 子供は保護者の指示のもとで使用すること。
4. 鼻洗浄ノズルは交換可能であり、交差感染を防止する為に、使用者ごとに専用で使うことが推奨される。
5. 使用の前後には必ず洗浄および消毒を行う必要がある。
[交差感染を防ぐため。]
6. シャワーやお風呂に入る時に使用しないこと。[感電の原因になる。]
7. 手が濡れ状態で充電ケーブルを抜かないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管環境
保管環境温湿度 -40℃～55℃、≤90%R.H.
大気圧:70 ~ 106 kpa
2. 保管場所については次の事項に注意すること。
 - ・高温・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスが発生する場所では保管しないこと。
 - ・使用後は、清潔な状態で保管すること。
3. 耐用期間
 - ・標準的な使用期間：3 年（自己認証による）。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後は、ノズル、タンクカバーとウォータータンクを洗浄すること。
2. ウォータータンクは、毎回使用後に空にすること。
※詳しい使用方法及び保守方法等は取扱説明書でご確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：熙臣国際株式会社
住所：東京都北区豊島 5-4-1-113
電話番号：03-6789-7591

製造業者

名称：Shenzhen Xunyi E-commerce Co., Ltd.
住所：Room 11C2S2, 11th FL, Tianxiang
BLDG, Tianan Cyber Park, No. 12, Tairan 5th RD,
Tianan Community, Shatou, Futian, Shenzhen, China
(中華人民共和国)

取扱説明書を必ずご参照ください。