

機械器具（55）医療用洗浄器
一般医療機器 鼻用洗浄器（JMDN コード：41599000）

U m i o t o 電動鼻用洗浄器


【禁忌・禁止】

- ・お子様が使用される場合は、必ず保護者の監督のもとでご使用ください。
- ・内耳または鼓膜の手術後は使用しないでください。
- ・口腔・咽頭部に損傷がある場合、または手術直後の場合は使用しないでください。
- ・鼻や耳に出血、外傷、外耳道炎などの症状や疾患がある場合は使用しないでください。〔症状が悪化するおそれがあります。〕
- ・使用中または使用後に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・洗浄後には鼻をかむ必要があるため、鼻をかめない方や小さなお子様は使用をお控えください。
- ・耳の痛みや中耳炎の原因となるおそれがあるため、使用直後は強く鼻をかまないでください。
- ・鼻づまりがひどい場合や耳に疾患がある場合は、医師に相談のうえ使用してください。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観形状・構造

各部の名称

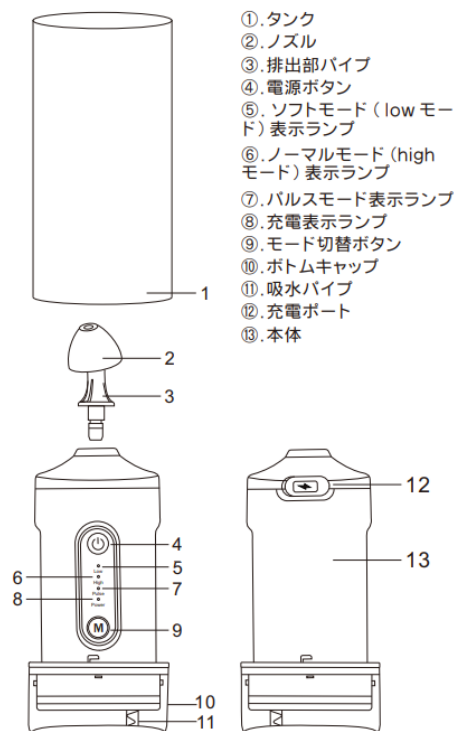

本体への電源供給によりウォータータンク内の洗浄水がノズルの先端から噴出され、鼻腔内の洗浄を行う。

2. 原理

本体への電源供給によりウォータータンク内の洗浄水がノズルの先端から噴出され、鼻腔内の洗浄を行う。

3. 商品仕様

商品仕様

商品名	電動鼻用洗浄器
電源	DV3.7V
タンク容量	200ml
出水量	ソフトモード：約6ml/s ノーマルモード：約11ml/s パルスモード：約8ml/s カスタムモード：約6～11ml/s
防水性	IP22
使用環境	温度：5℃～40℃ 湿度：≤93% 気圧：700hPa - 1060hPa
充電時間	約3H

【使用目的又は効果】

本製品は、電源供給により水タンク内の洗浄水がノズルの先端から噴出され、鼻腔内の花粉、ほこり、雑菌、不快感の除去の為の鼻用洗浄器である。

【使用方法等】


1. 準備

①初めて使用する際に、フル充電してから使用してください。

※充電中は本製品の使用はできません。

②取り付ける方法

タンクを反時計回りにして取り外します → ボトムキャップを時計回りにして取り外します → タンクを底部に取り付けます

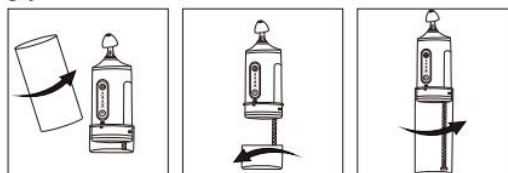

ノズルを交換する際は、本体のノズル部分を持って引き抜き、その後、新しい交換用ノズルを取り付けてください。

※ノズルを取り付ける時、「カチッ」と鳴るまで、確実に奥まで押し込んでください

③初めて使用する際に、あるいは長時間使わないで保管された際に、一度水を通してからご使用ください。

④使用前に、洗浄液を注入してから、図のようにタンクをしっかりと本体に装着してください。



• タンクの取り付け方：反時計回りにして固定します。

取扱説明書を必ずご参照ください。

2. 使い方

①前かがみになって、洗浄機を持ち上げ、口を軽く開け、口で呼吸しながら、ノズルヘッドを軽く片側の鼻孔に入れて、電源ボタンを押すと洗浄が開始します。

※使用中は口を軽く開け、呼吸し、飲み込む動作はしないでください。

※耳に圧力をかけ過ぎることを防ぐため、ノズルと鼻孔は密閉せずに、少し隙間を空けてご使用ください。

②更にモード切り替えを押し、「ソフトモード」、「ノーマルモード」、「パルスモード」、「カスタムモード」のいずれを選択してください。

※ソフトモード（初心者向け）、ノーマルモード（日常）、パルスモード（より細かく）、カスタムモード（モードボタンを長押しして、「ソフトモード」から「ノーマルモード」に循環するモード）

③洗浄液を一方の鼻孔から入れ、もう一方の鼻孔から出します。

※右側の鼻孔を洗浄する場合は、頭を左に傾けてください。左側の鼻孔を洗浄する場合は、頭を右に傾けてください。

④片側の鼻孔を洗浄した後、もう一方の鼻孔も同じ方法で洗浄します。



⑤長時間連続して使用しないでください。毎回連続使用時間は5分を超えないでください。

⑥電源ボタンをもう一度押したら、洗浄が停止されます。

3. 使用後

①使用後に軽く鼻をかんで、鼻内部に残った洗浄液を出してください。

②タンクを本体から取り外し、タンクに残った洗浄液を捨ててください。

●タンクの取り外し方：時計回りして取り外します。




③タンクに新しい水を半分入れ、電源ボタンを押し、ノズルから水を噴出させ、ノズル、パイプとタンク内の洗浄を行ってください。

※塩分をきれいに洗い流さないと、塩の結晶が付き、噴射できなくなる恐れがあります。

④全ての水を出し切ったら、電源ボタンをオフにします。

⑤ノズルとタンクを取り外して、水洗い後、徹底的に乾かした後、本体に取り付け、清潔な場所に保管してください。

●ノズルを取り外し方：ノズルの部分を持って、引っ張るように取り外します。

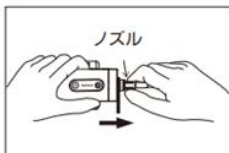

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管環境

保管環境温湿度 5℃～40℃、≤ 93%

大気圧範囲 700hPa ～ 1060hPa

2. 保管場所については次の事項に注意してください。

- ・高温・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスが発生する場所では保管しないこと。
- ・使用後は、清潔な状態で保管すること。

3. 耐用期間

- ・標準的な使用期間：3 年（自己認証による）。

【保守・点検に関する事項】

1. 使用後は、ノズル、タンクカバー、およびウォータータンクを洗浄してください。

2. ウォータータンク内の水は、使用後毎回必ず空にしてください。

※詳細な使用方法およびお手入れ方法については、取扱説明書をご確認ください。

【使用上の注意】

1. 安全かつ正しく使用するため、必ず取扱説明書をお読みください。

2. 使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。

3. お子様が使用する場合は、保護者の指導・監督のもとで使用してください。

4. 鼻洗浄ノズルは交換可能です。交差感染防止のため、使用者ごとに専用で使用することを推奨します。

5. 使用前後には必ず洗浄および消毒を行ってください。
[交差感染防止のため。]

6. シャワー中や入浴中には使用しないでください。[感電のおそれがあります。]

7. 手が濡れた状態で充電ケーブルの抜き差しをしないでください。。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：熙臣国際株式会社

住所：東京都北区豊島 5-4-1-113

電話番号：03-6789-7591

製造業者

名称：Shenzhen Heearly Technology Co., Ltd

（中華人民共和国）

取扱説明書を必ずご参照ください。