

機械器具 76 医療用吸入器
一般医療機器 超音波ネブライザ 12719000 (JMDNコード)
Umio to ネブライザー

【警告】

1. 本品を使用する際は必ず医師の指導に従うこと。
2. 薬液の種類、用量、用法については、必ず医師の指導に従うこと。[症状悪化の恐れがある]
3. 本体、マウスピース、マスクは、使用後に必ず洗浄・消毒すること。洗浄・消毒後は、速やかに乾燥させ、汚染を防ぐこと。[雑菌の繁殖、感染の恐れがある]
4. 本品を複数の患者が共有する場合は、必ず使用する患者ごとに本体、マウスピース、マスクを使用すること。[感染の恐れがある]

【禁忌・禁止】

次の患者には使用しないこと。


- ペンタミジン製剤を使用する患者
- 肺水腫の患者
- 急性喘息発作時の患者
- 急性肺塞栓症の患者

禁止事項

- 油性薬剤、粘性の高い薬剤又は本品の使用に適さない薬剤を使用しないこと。
- 人工呼吸器又は麻酔用呼吸回路と接続して使用しないこと。
- 可燃性ガス、酸素又は可燃性麻酔ガスの存在する環境では使用しないこと。
- 本体を分解、改造又は修理しないこと。
- 本体を水中に浸漬したり、水洗いしたりしないこと。
- 電子レンジ、乾燥機等を用いて本品又は付属品を乾燥・消毒しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観形状・構造
パッケージ構成

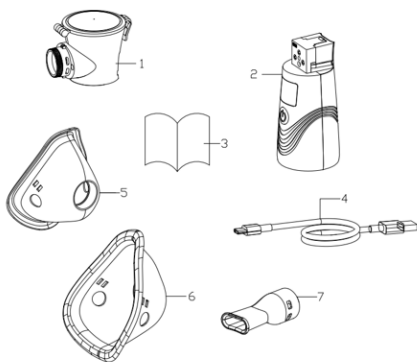

⇐	パッケージ構成品名⇐	⇐
1 ⇐	薬液ボトル⇐	⇐
2 ⇐	ネブライザー本体⇐	⇐
3 ⇐	取扱説明書⇐	⇐
4 ⇐	Type-C 充電ケーブル⇐	⇐
5 ⇐	子供用マスク⇐	⇐
6 ⇐	大人用マスク⇐	⇐
7 ⇐	マウスピース⇐	⇐

【保管方法及び有効期間等】


保管方法

【使用目的又は効果】


本製品は、機械的振動により発生させたエアロゾル化した水又は医薬品を供給する装置です。

【使用方法等】


1. 初回使用前に本体を十分に充電する。
2. 薬液カップを本体に確実に装着する。

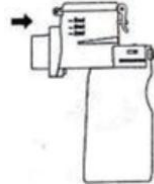


3. 医師の指示に従い、所定量の薬液を薬液カップに注入する。

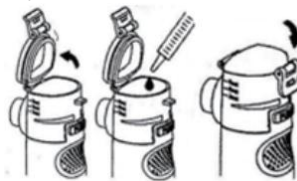

4. 吸入マスク又はマウスピースを装着する。

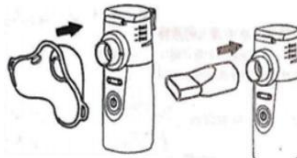

5. 電源を入れ、安定した姿勢で薬液を吸入する。

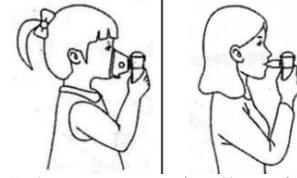

6. 薬液がなくなると自動的に運転を終了する。
7. 使用後は薬液カップ、メッシュ部、吸入マスク又はマウスピースを洗浄・消毒し、十分乾燥させる。

<使用上の注意>

1. 粘性の高い薬液、油性薬液及び適応外の薬液は使用しないこと。
2. 使用時は薬液がメッシュ部に十分接触するよう、本体の傾きを約 15° 以内とすること。
3. 本体は水洗いしないこと。
4. 小児が使用する場合は保護者等の監督下で使用するこ

【原理】

振動子の超音波振動エネルギーを薬液タンク内の薬液に伝えます。
薬液は噴霧メッシュの作用で霧状になり外部に噴霧されます。
マスクまたはマウスピースを通過して患者の呼吸器系に誘導されます。

取扱説明書を必ずご参照ください。

1. 高温、多湿、直射日光及び腐食性ガスを避け、清潔で換気の良い場所に保管すること。
2. 保管環境は以下の条件とする。
3. 温度：－ 40～55℃
4. 相対湿度：93%RH 以下
5. 気圧：50～150kPa
6. 使用後は各部品を洗浄・消毒し、十分乾燥させてから保管すること。
7. 落下や強い衝撃を避けること。

有効期間（耐用期間）

耐用期間：3 年

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前後の点検を励行し、異常が認められたときには、メーカーに点検依頼をしてください。
2. 使用後は、部品を消毒・乾燥し、ちりやほこりが入らないように清潔に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：熙臣国際株式会社

住所：東京都北区豊島 5－4－1－1 1 3

電話番号：03-6789-7591

製造業者

名称：Guangdong Precision Medical Technology Co., Ltd

（中華人民共和国）

取扱説明書を必ずご参照ください。