

機械器具(09) 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
管理医療機器 アーム型 X 線 CT 診断装置 JMDN 70006000 (デジタル式歯科用パノラマ X 線診断装置 JMDN 37640000)

プレビスタ アイスリーディー グリーン


特定保守管理医療機器／設置管理医療機器

- 【警告】**
- ・ 本品は、X 線診療室・管理区域で使用する。
 - ・ 使用中は、X 線診療室・管理区域への出入りを制限する措置を講じること。
 - ・ 患者は必ず X 線防護服を着用すること。
 - ・ 撮影中、操作者等がやむを得ず X 線診療室・管理区域に留まる場合は必ず X 線防護服を着用すること。
 - ・ 位置決め用のレーザービームが目に入らないようにすること。また、患者にレーザービームを見ないように注意すること。[レーザービームが目に入ると目に障害を与える恐れがある。]
 - ・ 再撮影等の操作をする場合には、必ず患者を一旦 X 線診療室外へ誘導してから操作を行うこと。[本品が万一誤作動した場合、患者と接触し、事故につながる危険性がある。]
 - ・ 操作中に緊急事態が発生した場合、赤色の緊急停止ボタンを押して、すべての作動部分を速やかに停止すること。
 - ・ 植込み型心臓ペースメーカ又は植込み型除細動器の植込み部位に X 線を連続的に照射する検査を行う場合、これらの機器に不適切な動作が発生する可能性がある。検査上やむを得ず、植込み部に X 線を照射する場合には、植込み型心臓ペースメーカ又は植込み型除細動器の添付文書の「重要な基本的注意事項」の項及び「相互作用」の項等を参照し、適切な処置を行うこと。
 - ・ 妊婦及び妊娠の可能性のある女性に本品を使用する場合は、医師の指示の下で慎重に行うこと。

- 【禁忌・禁止】**
- ・ 本品の近傍で携帯電話などの無線設備を使用しないこと。[電波の影響で本品が誤作動する恐れがある。]
 - ・ 引火性物質の周辺では本品を使用しないこと。(消毒スプレー等は使用しないこと) [引火の恐れがある。]

【形状、構造及び原理等】

1) 形状

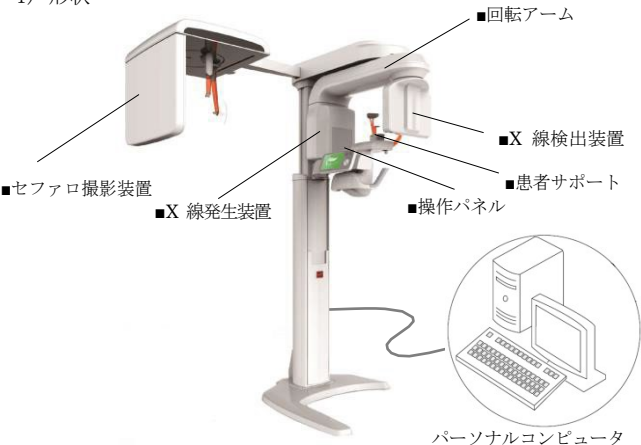

2) 選択可能な形式

X 線検出装置は、2 種類の画面サイズを選択することができる。セファロ撮影装置は、X 線検出装置が左右に移動して撮影するスキャンタイプと、固定型の検出器により撮影するワンショットタイプの 2 種類がある。ワンショットタイプは、2 種類の画面サイズを選択することができる。

型式	CT／パノラマ		セファロ		
	160×100 マルチ	100×80 マルチ	スキャン タイプ	ワンショットタイプ	
				スタンダード	ワイド
スタンダード	○	○	－	－	－
SC タイプ	○	○	●	－	－
OS タイプ	○	○	－	●	－
OP タイプ	○	○	－	－	●

○：選択可能なスペック ●：当該型式に存在するスペック
－：当該型式に存在しないスペック

3) 構成

- 3)-1 アイスリーディー グリーン本体
- 3)-2 パーソナルコンピュータ (患者環境外にて使用)
- 3)-3 セファロ撮影装置
- 3)-4 付属品
 - (A) 患者サポート
 - ・ バイトブロック
 - ・ 顎サポート
 - ・ シリコン顎当
 - ・ テンプルサポート
 - ・ イヤーロットキャップ
 - (B) 専用ソフトウェア CD

4) アイスリーディー グリーン本体の寸法及び重量

寸法：1985mm(最大幅)×1325mm(最大奥行)×2340mm(最大高さ)
質量：200kg (セファロ撮影装置あり)
160kg (セファロ撮影装置なし)

5) 電気的定格及び機器の分類

定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz
電源入力：2.0kVA
電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器
電撃に対する保護の程度：B 形装着部

6) 作動原理等

100V 電源から供給された電力は、アイスリーディー グリーン本体で高電圧に変圧され、X 線発生装置内にある X 線管に供給されることで X 線ビームを生成する。この X 線ビームは、コリメータにより直線状に絞られ、回転型のアームにより 360° 回転しながら、患者の頭部及び顎部へ照射される (セファロ撮影装置は回転せずに患者の頭部へ照射される)。患者の頭部及び顎部を透過した X 線ビームは、X 線検出装置内の CMOS イメージセンサ (セファロ撮影装置ワンショットタイプはアモルファスシリコンシンチレータ) の蛍光作用により光の明暗として再現される。再現されたこの画像データは、デジタル化された画像として再構成され、ソフトウェア CD をインストールされたパーソナルコンピュータに送られる。この画像データはパーソナルコンピュータに表示され、データとして記録される。

【使用目的又は効果】

本品はアーム構造を利用して、患者に関する多方向からの X 線透過信号をコンピュータ処理し、再構成画像を診療のために提供する。また人体の頭部を透過した X 線の蛍光作用を利用して、歯科診療のための頭部、歯及び顎部の画像情報を提供する。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用方法等】

＜使用前の準備＞

- 1) アイスリーディー グリーン本体と、専用ソフトウェア CD がインストールされたパーソナルコンピュータを接続する。
- 2) 電源ケーブルを商用電源に接続し、電源スイッチを ON にして電力を投入する。
- 3) X線 CT 診断、パノラマ X線診断、セファロ撮影診断を選択し、撮影条件等を入力する。

＜使用中の操作＞

X線 CT 診断及びパノラマ X線診断の場合：

- 1) 患者の身長に合わせ、操作パネルの上下ボタン、又は昇降スイッチでコラムを上下させて、回転アームの高さを調整する。
- 2) 患者を回転アームの下に立たせ、ハンドルを握らせて、患者サポートに患者の顎部を配置する。
- 3) 患者サポートは複数の種類があるので、使用状況に合わせてあらかじめ選択しておく。患者サポートのうち、バイトブロックを使用する場合は、汎用のカバーを被せてから、患者にくわえさせる。
- 4) 患者位置決め用レーザを基準として、操作パネルのチンレスト上下ボタン及び調整ダイヤルを操作し、患者サポートの高さや角度を調整する。
- 5) 照射準備が整うと LED インジケータが青く点灯する。
- 6) 照射スイッチを押すと X線の照射が開始され、LED インジケータが赤く点灯する。非常の場合は、緊急停止ボタンを押すことで、全ての動作を停止することができる。
- 7) 撮影が終了したら、患者の顎部を患者サポートから外し退出させる。
- 8) 撮影された画像は、パーソナルコンピュータに表示され保存される。

セファロ撮影の場合：

- 1) 患者をセファロ撮影装置の下に立たせ、イヤールットや鼻ポジションナーの長さを調整して患者の頭部を固定する。
- 2) 照射準備が整うと LED インジケータが青く点灯する。
- 3) 照射スイッチを押すと X線の照射が開始され、LED インジケータが赤く点灯する。非常の場合は、緊急停止ボタンを押すことで、全ての動作を停止することができる。
- 4) 撮影が終了したら、患者の頭部をイヤールット・鼻ポジションナーから外し、退出させる。
- 5) 撮影された画像は、パーソナルコンピュータに表示され保存される。

＜使用後の措置＞

- 1) 電源スイッチを OFF にして電力を遮断する。
- 2) 洗剤入りのぬるま湯につけた布で清拭する。汚れが落ちたら水に濡らせた布で拭き取る。

＜使用方法等に関する使用上の注意＞

詳細については、取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。

- 1) X線機器の操作と設置は法律に準じて行うこと。
- 2) 本品を液状物質または噴霧に曝さないこと。[感電またはシステムの破損に至る恐れがある。]
- 3) 患者や操作者が可動部に接触しないように注意すること。
- 4) パーソナルコンピュータは患者から 1.5m以上離して使用すること。
- 5) 患者サポート（バイトブロック、顎サポート、シリコン顎当、テンブルサポート、イヤールットキャップ等）はオートクレープを行うと熱で変形する恐れがある。オートクレープ滅菌を行わないこと。
- 6) 可動部の可動範囲内に障害物が入らないように注意すること。
- 7) 撮影の前に、患者の眼鏡、ネックレス、イヤリング、ピアス、ヘアピン、可撤式義歯等の金属類を外すこと。
- 8) 以下のような患者の場合、診断できる画像が得られない場合がある。
 - ・ 歯に充填物・補綴物などの金属材料がある患者。
 - ・ 頭蓋内の動脈瘤クリップを身につけた患者。
 - ・ 眼球や内耳に磁性体が入った患者。

- ・ 人工関節、プレートなど広範囲の金属性の埋め込み具・補助具を身に付けている患者。

- 9) 患者に対して、撮影中はアナウンスに従い、目を閉じて動かないように注意すること。[撮影の失敗や水晶体への被爆の恐れがあるため]
- 10) 患者サポートにもたれかかったり、過度な荷重をかけないように注意すること。
- 11) 患者サポートの調整の際は、適切な位置になるよう注意して操作すること。
- 12) 撮影の際は、X線診療室・管理区域の外に出て操作を行うこと。
- 13) アームの動作開始後、動作終了まで患者を監視すること。患者が患者サポートから顎を外す等の指示外の行動を示したり、機器が命令外の動作をする、またはその他異常があると認められた場合は、撮影を中止し、本体の電源を切り、患者を X線診療室外へ誘導した後、必要な処置を行うこと。
- 14) X線管の冷却中は、パーソナルコンピュータを操作したり再起動をしないこと。[数秒～数十秒の冷却終了後に、冷却中に入力された命令に基づき、意図しない動作をする原因になる可能性がある。]
- 15) パーソナルコンピュータがフリーズした場合は次の手順で処置を行うこと。
 - ・ 患者を X線診療室外へ誘導する。
 - ・ パソコンの電源を切る。
 - ・ 本体の電源を切る。
 - ・ 1～3 分後、パーソナルコンピュータ、本体の順で電源を入れ直す。再起動後はパーソナルコンピュータ・本体の動作に異常が無いことを確認すること。
- 16) 再撮影やモードを変えて撮影する場合は、必ず患者を一旦 X線診療室外へ誘導してから操作を行うこと。[警告欄参照]
- 17) 清掃・消毒等の際は必ず電源を切った状態で行うこと。
- 18) 他の医用電気機器やパソコン等を本品の周辺で使用する際は、本品の影響による誤作動などに注意すること。
- 19) 植込み型心臓ペースメーカ
本品を植込んだ患者の X線 CT 検査に際し、本体に X線束が連続的に照射されるとオーバーセンシングが起これ、本品のペーシング出力が一時的に抑制される場合があるので、本体に X線束を 5 秒以上照射しないよう十分に注意すること（相互作用の項参照）。
- 20) 植込み型除細動器本品を植込んだ患者の X線 CT 検査に際し、本体に X線束が連続的に照射されるとオーバーセンシングが起これ、適切な治療の一時的な抑制又は不適切な頻拍治療を行う可能性があるため、本体に X線束を照射しないよう十分に注意すること（相互作用の項参照）。

・ 医用電気機器の使用上(安全及び危険防止)の注意事項

- 1) 熟練した者以外は機器を使用しないこと。
- 2) 本品を設置するときには、次の事項に注意すること。
 - 2)-1 水のかからない場所に設置すること。
 - 2)-2 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
 - 2)-3 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意すること。
 - 2)-4 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
 - 2)-5 電源の周波数と電圧及び許容電流値(又は消費電力)に注意すること。
 - 2)-6 アースを正しく接続すること。
- 3) 電源は AC100V のアース付専用コンセントを使用すること。
- 4) 他の本品と同一のコンセントから分岐して使用しないこと。[個体間にわずかでも電位差があると、患者及び操作者が電撃を受けることがある。]
- 5) 周辺本品に対する注意
 - 5)-1 指定外の機器を接続しないこと
 - 5)-2 指定外の機器を接続すると、漏れ電流により患者及び操作者が電撃を受けることがある。また、火災や故障の原因になる可能性がある。

- 6) 本品を使用する前には次の事項に注意すること。
 - 6)-1 スイッチの接触状態、極性、ダイヤル設定、メーター類などの点検を行い、機器が正確に作動することを確認すること。
 - 6)-2 アースが安全に接続されていることを確認すること。
 - 6)-3 すべてのコードの接続が正確でかつ安全であることを確認すること。
 - 6)-4 他の機器との併用は、正確な診断を誤らせたり、危険を起す恐れがあるので、十分注意すること。
- 7) 本品の使用中は次の事項に注意すること。
 - 7)-1 診断に必要な時間・量を超えないように注意すること。
 - 7)-2 本品全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
 - 7)-3 本品及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で本品の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。
 - 7)-4 本品に患者が触れることのないよう注意すること。
- 8) 機器の使用後は次の事項に注意すること。
 - 8)-1 定められた手順により操作スイッチなどを使用前の状態に戻したのち、電源を切ること。
 - 8)-2 コード類の取り外しに際してはコードを持って引抜くなど無理な力をかけないこと。
 - 8)-3 付属品などは清浄にしたのち、整理してまとめておくこと。
 - 8)-4 次回の使用に支障のないよう必ず清浄にしておくこと。
- 9) 故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は専門家にまかせること。
- 10) 改造しないこと。

【使用上の注意】

＜使用注意＞

- 1) 認知症またはその他精神的障害のある患者。[指示に従わない場合、撮影画像の不良、装置可動部と接触する恐れがある。]

＜相互作用＞

1) 植込み型心臓ペースメーカ

相互作用	対策・処置方法
X線束が連続的に照射されるCT検査に際し、本体内部の C-MOS 回路に影響を与えること等により、オーバーセンシングが起こり、植込み型心臓ペースメーカのペーシングパルス出力が一時的に抑制されることがある。	・本体植込み部位に X線束を 5 秒以上連続照射しないようにすること。 ・やむを得ず、本体植込み部位に X線束を 5 秒以上連続して照射する検査を実施する場合には、患者に“両腕挙上”をさせる等してペースメーカ位置を照射部分からずらすことができないか検討すること。それでも本体植込み部位に X線束を 5 秒以上連続的に照射することが避けられない場合には、検査中、競合ペーシングをしない状態で固定ペーシングモードに設定するとともに、脈拍をモニターすること。又は一時的体外 ペーシングの準備を行い、使用すること。

2) 植込み型除細動器

相互作用	対策・処置方法
X線束が連続的に照射されるCT検査に際し、本体内部の C-MOS 回路に影響を与えること等により、オーバーセンシングが起こり、植込み型除細動器のペーシングパルス出力が一時的に抑制されたり、不適切な頻拍治療を行うことがある。	・本体板植込み部位に X線束を照射しないようにすること。 ・やむを得ず、本体植込み部位に X線束を照射する検査を実施する場合には、患者に“両腕挙上”をさせる等して除細動器位置を照射部分からずらすことができないか検討すること。それでも本体植込み部位に X線束を照射する場合には、検査中、頻拍検出機能をオフにした後、脈拍をモニターすること。又は一時的体外除細動器や一時的体外ペーシングの準備を行い、使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 保管環境
 - 温度：-10℃～50℃
 - 湿度：10～75%
 - 気圧：860～1,060hPa
- 2) 使用環境
 - 温度：10℃～35℃
 - 湿度：30～75%
 - 気圧：860～1,060hPa
- 3) 保管場所については次の事項に注意すること。
 - 3)-1 水のかからない場所に保管すること。
 - 3)-2 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
 - 3)-3 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
 - 3)-4 化学薬品の保管場所やガスが発生する場所に保管しないこと。
- 4) 廃棄方法について

本品を廃棄する場合は、産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則等に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【保守・点検に係る事項】

1) 使用者による保守点検事項

- 1)-1 使用開始前に点検は必ず行うこと。
- 1)-2 点検項目とその概要：日常点検
 - ・ 外装の清掃
 - ・ 駆動部の可動性、動作テスト
 - ・ 照射テスト
 - ・ 緊急停止テスト
- 1)-3 点検項目とその概要：定期点検
 - ・ 照射ランプの点灯確認
 - ・ 座標のずれの確認

※ その他、詳細な内容については取扱説明書の保守の点検項目を参照すること。

2) 業者による保守点検事項

- 2)-1 点検時期

最適な状態で使用するために 6 ヶ月に 1 回、定期点検を行うこと。
- 2)-2 点検内容等
 - ・ 電気的安全性及び性能の確認
 - ・ 校正
 - ・ 交換部品・消耗品の交換

※ 詳細な内容については、弊社または販売業者にご確認下さい

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

京セラメディカル株式会社
TEL：0120-923725

2. 製造業者

VATECH Co., Ltd.
Republic of Korea（大韓民国）