

【警告】

- ・ 熟練した者以外は、機器を使用しないこと。
- ・ ロータやバケットは、最高回転数および許容荷重を超えて使用しないこと。
- ・ ロータやバケットに傷、腐食、さび、変形がある場合は、直ちに使用を中止すること。
- ・ 危険物質（爆発性物質、可燃性物質、化学反応物質）の遠心分離は行わないこと。
- ・ ロータは、オートクレーブの回数制限を超えてオートクレーブを行わないこと。


【禁忌・禁止】

- ・ 耐用年数を過ぎたロータは必ず交換すること。ロータや遠心機が破損し、人身事故、物損事故の原因となります。
- ・ 改造したり、指定外の部品を使用しないこと。

【形状・構造】

1) 構成、外観

本医療機器は、本体部で構成されています。

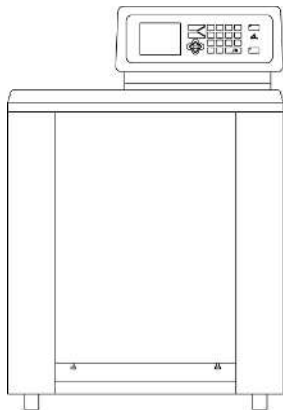

2) 寸法、重量

幅 76cm, 奥行き 82cm, 高さ 111cm, 重量 310kg

3) 電氣的定格

定格電圧 AC 200 V

定格電流 14.8 A

電源条件 電圧 AC 200 V+10, -5 %以内
電流 30 A 以上, 周波数 50/60 Hz

消費電力 2.3 kW

発熱量 8.3 MJ/h

4) 電撃に対する保護の形式

クラス I

【操作方法又は使用方法】

詳細は取扱説明書の第 3 章『使用方法』を参照してください。

【使用上の注意】

- ・ 機器に異常が発見された時は、直ちに使用を中止すること。
- ・ アース線は、必ずアース端子に接続してください。
- ・ 遠心機の周囲は、30cm 以上あけてください。
- ・ 詳細は取扱説明書の第 2 章『設置方法と電源』を参照してください。

【保管方法及び使用期間等】

- ・ 保管環境
周囲温度 10℃～40℃
相対湿度 30%～85%
気圧 70～106 kPa
- ・ 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウなどを含んだ空気などにより悪影響を生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ・ 水のかからない場所に保管すること。
- ・ 傾斜、振動、衝撃などのない、安定した場所に保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。

【保守・点検に係る事項】

詳細は取扱説明書の第 4 章『保守と点検』を参照してください。

【包装】

1 台単位で梱包

【廃棄のお願い】

医療関係機関で使用した遠心機は、廃棄物処理法により感染性廃棄物に指定され、特別管理産業廃棄物に該当します。

このため弊社で廃棄のためにお引取りすることはできません。「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を持った会社にご依頼ください。

【遠心機・高圧蒸気滅菌器の中古品再使用（再利用）

中止のお願い】

- (1) 中古品の医療機器（遠心機・高圧蒸気滅菌器）を、リサイクル店やホームページ等で購入し再使用（再利用）はしないでください。
- (2) 前項で再使用（再利用）した場合は、機器のトレーサビリティと安全性確保のため、弊社では事故・故障等の一切の責任が負えません。
- (3) 薬事法によって、製造元の事前許可を得ない医療機器の譲渡は禁止されています。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

氏名又は名称 株式会社久保田製作所

第三種医療機器製造販売業

住 所 群馬県藤岡市中大塚 1065-3

電話番号 0274-22-6111

製造業者 株式会社久保田製作所 藤岡工場

住 所 群馬県藤岡市中大塚 1065-3

電話番号 0274-22-6111（お問合せ・緊急連絡先）

【使用目的、効能又は効果】

病院の一般検査、研究室の試料分離。

【品目仕様等】

最高回転数 22,000 rpm

最大遠心力 51,946×g

最大処理量 3,000 ml