

【警告】

- ・ 熟練した者以外は、機器を使用しないこと。
- ・ ロータやバケットは、最高回転数および許容荷重を超えて使用しないこと。
- ・ ロータやバケットに傷、腐食、さび、変形がある場合は、直ちに使用を中止すること。
- ・ 危険物質 (爆発性物質、可燃性物質、化学反応物質) の遠心分離は行わないこと。
- ・ ロータは、オートクレーブの回数制限を超えてオートクレーブを行わないこと。
- ・ 耐用年数を過ぎたロータは必ず交換すること。
- ・ 遠心機の運転中は、遠心機の周囲 30cm 以内の場所に必要以上に長くともまらないこと。


【禁忌・禁止】

- ・ 改造したり、指定外の部品を使用しないこと。

【形状・構造】

(1) 構成、外観

本医療機器は、本体部で構成されています。

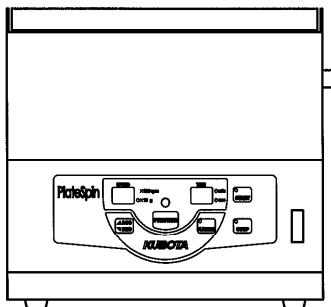

(2) 寸法、重量

幅 35cm, 奥行 42cm, 高さ 32cm, 重量 26kg

(3) 電気的定格

定格電源 AC 100 V
定格電流 1.3 A
電源条件 電圧 AC 100 V $\pm$ 10 %以内
電流 8 A 以上, 周波数 50/60 Hz
消費電力 60W
発熱量 220 kJ/h

(4) 電撃に対する保護の形式

クラス I
安全性適合規格 IEC61010-2-020 準拠

【使用目的、効能又は効果】

* 検体検査の前処理用

【品目仕様等】

最高回転数 2,500 rpm
最大遠心力 700 $\times$ g
最大処理量 ディープウェルプレート 2 枚

【操作方法又は使用方法】

詳細は取扱説明書の第 3 章『使用方法』を参照してください。

【使用上の注意】

- ・ 機器に異常が発見された時は、直ちに使用を中止すること。
- ・ 電源プラグは、必ず接地コンセントに接続してください。
- ・ 遠心機の周囲は、30cm 以上あけてください。
- ・ 詳細は取扱説明書の第 2 章『設置方法と電源』を参照してください。

【保管方法及び使用期間等】

(1) 遠心機の保管方法及び試用期間等

- ・ 保管環境
周囲温度 10 $^{\circ}$ C $\sim$ 40 $^{\circ}$ C
相対湿度 30 % $\sim$ 85 %
気圧 70 $\sim$ 106 kPa
- ・ 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウなどを含んだ空気などにより悪影響を生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ・ 水のかからない場所に保管すること。
- ・ 傾斜、振動、衝撃などのない、安定した場所に保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。

(2) ロータの耐用年数について

本遠心機に使用するロータの耐用年数は、納入後 7 年までです。納入後 7 年経過したときは、事故防止のため、速やかにロータの使用を中止し、新しいロータに交換してください。

【保守点検に係る事項】

詳細は取扱説明書の第 4 章『保守と点検』を参照してください。

【包装】

1 台単位で梱包

【廃棄のお願い】

医療関係機関で使用した遠心機は、廃棄物処理法により感染性廃棄物に指定され、特別管理産業廃棄物に該当します。このため弊社で廃棄のためにお引取りすることはできません。「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を受けた会社にご依頼ください。

【中古品再利用（再利用）について】

中古品をリサイクル店やホームページ等で購入した場合は、文書にて弊社までお知らせください。機器のトレーサビリティと安全性確保のため必要でございます。お知らせいただけないときは、弊社では事故・故障等、その他、一切の責任が負えません。お知らせいただきたい内容は、弊社 ホームページ <http://www.kubotacorp.co.jp> をご覧ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

氏名又は名称 株式会社久保田製作所
第三種医療機器製造販売業

* 住 所 群馬県藤岡市中大塚 1065-3
* 電話番号 0274-22-6111

製造業者 株式会社久保田製作所 藤岡工場
住 所 群馬県藤岡市中大塚 1065-3
電話番号 0274-22-6111 (お問合せ・緊急連絡先)