

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 血管造影キット 16545002

アングイライン （吸引管）

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

- ・本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みである。
- ・本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。¹⁾

〈形状〉

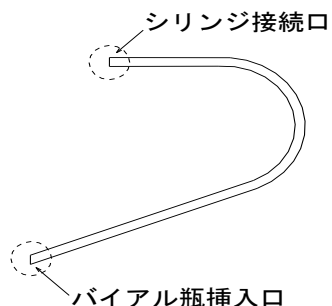

外 径	5mm
内 径	4mm
長 さ	280mm

〈原材料〉

ポリ塩化ビニル

〈原理〉

本品にシリンジをセットし、シリンジを操作することにより、本品を通じて薬液の吸引を行う。

【使用目的又は効果】

血管造影、血栓の除去、血管拡張等の血管・リンパ管内の処置及び診断の際に造影剤等薬液の注入用回路として使用する。

【使用方法等】

以下の使用方法是一般的な使用方法である。

- ①本品のシリンジ接続口をシリンジ先端に接続する。
- ②本品のバイアル瓶挿入口を、バイアル瓶の中に挿入する。
- ③シリンジのプランジャ（吸子）を操作し、ゆっくりと吸引する。
- ④シリンジ内に造影剤等の薬液が充填されたら速やかにシリンジから外す。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- ①本品とシリンジ先端が確実に接続されていることを確認すること。
[接続部の密閉性が低下し、充填(吸引)時の不必要なエアの吸引の原因となる。]

- ②油性の造影剤は使用しないこと。

[本品を劣化させる。]

- ③本品とシリンジ先端を接続したまま放置はしないこと。

[時間が経過すると造影剤等の薬液が固化し、本品とシリンジ先端が外れない等の不具合が発生する原因となる。]

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ①脂溶性の医薬品又は薬液等ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）が溶出する恐れがあるので注意すること。¹⁾
- ②使用中は本品の破損、接合部の緩み及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- ③本品を鉗子等で強く掴まないこと。
[本品の切断、内腔の閉塞を引き起こす恐れがある。]

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、殺菌灯等の紫外線避けて清潔に保管すること。

〈有効期間〉

適正な保管方法が保たれていた場合、個(包)装に記載の使用期限を参照のこと。

[自己認証（当社データ）による。]

【主要文献及び文献請求先】

〈主要文献〉

- 1) 医薬安発第1017003号 平成14年10月17日
ポリ塩化ビニル製の医療用具から溶出する可塑剤（DEHP）について

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

クリエートメディック株式会社
電話番号：044-577-7793＊
（文献請求先も同じ）

〈販売業者〉

株式会社根本杏林堂
電話番号：03-3818-3541