

販 売 名
骨髓生検針

【禁忌・禁止】

- 本製品を曲げ、切削等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。



【形状・構造及び原理等】

１）材 質

No	構成部分の名称	原材料	規 格	摘 要
1	針管 (パイプ管)	JIS G 4305 ステンレスパイプ管	SUS304	
2	心金 (マンドリン線)	JIS G 4309 ステンレス鋼線	SUS304	
3	針基	JIS H3250 快削黄銅棒材		クロームメッキ加工

２）再使用可能な生検用針の種類及び形状



①ジャムシディー式骨髓生検針

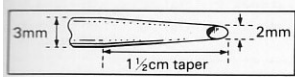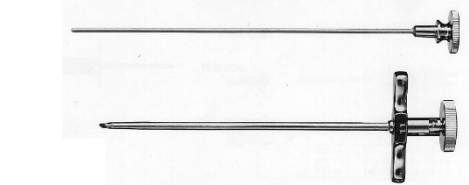

骨髓組織採取に必要な空腔が少なく、大きな組織片が採取できるよう、また患者の苦痛が少ないようにできている。外套穿刺を行うと同時に回転させ [左右] 内套管を引き抜き、サンプル採取をするよう特別な管構造となっている。

製品コード	サ イ ズ	単 位
K-23-01	大人用 11G 3.0 × 100mm	1 本
K-23-02	小児用 13G 2.4 × 90mm	1 本



②東大式骨髓生検針

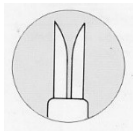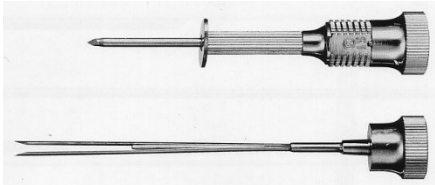

シルバーマン穿刺針と同様に細切法にて採取針を挿入してサンプル採取を行う。サイズは、13G (2.5mm)、小 14G (2.0mm) となり、寸法 2.5cm を標準としてできている。使用方法はシルバーマン式穿刺針と同じである。

製品コード	サ イ ズ	単 位
K-19-01	(大) 13G 2.5 × 25mm	1 組
K-19-02	(小) 14G 2.0 × 25mm	1 組



③天木式骨髓生検針

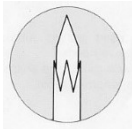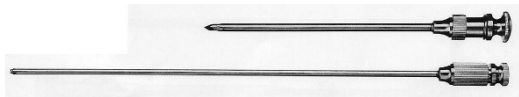

骨組織の採取が簡単、正確にできる構造に造られている。外套骨穿刺針と内套管採取針からできており、外套穿刺を行うと同時に骨組織を粉碎するように先端の部分がノコ刃になっており、内套管を挿入しやすいようにできている。

製品コード	サ イ ズ	単 位
K-20-01	11G 3.0 × 80mm	1 組

④棟方式骨髓生検針

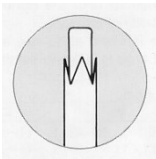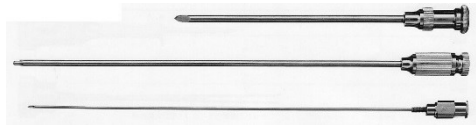

天木式の改良として骨組織の採取に便利のようにできている。誘導針は取り外しができるようになっている。

製品コード	サ イ ズ	単 位
K-21-01	11G 3.0 × 90mm	1 組

⑤日大式骨髓生検針



【使用目的又は効果】

生検標本を採取するために用いる。

【使用方法等】

使用方法

使用目的に応じて適切な品種、サイズを選択し、通常の外科手術手順に従って使用する。尚、使用前には必ず滅菌を行うこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) 本製品は未滅菌品であり、使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）をすること。
- (2) 使用目的（検査・治療等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。
- (3) 包装の破損等により製品に異常が認められる場合や折損していると疑われる製品は使用しないこと。
- (4) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- (5) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐蝕の原因になるので、出来るだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。
- (6) 廃棄する場合は、医療用廃棄物として適切に処理し、施設外における感染、環境への汚染が起きないようにすること。
- (7) 使用目的に応じて適切な品種選択を行い、通常の外科手術手順に従い使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- (1) 貯蔵保管にあたっては、洗浄をした後、腐蝕を防ぐために保管期間の長短に拘わらず乾燥をすること。高温、高湿、直射日光及び水漏れを避け、室温で保管すること。
- (2) 清潔で乾燥した場所に荷重のかからない状態で保管すること。
- (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。


【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄
 - ・使用後は、出来るだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止の為に洗浄・消毒すること。
 - ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な温度で使用する。
 - ・洗剤の残留が無いように十分にすすぎを行うこと。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを推奨する。
 - ・洗浄後は、腐蝕防止のために、直ちに乾燥すること。
2. 滅菌
 - EOG滅菌の場合 : 44℃～55℃で3～5時間
 - 高圧蒸気滅菌の場合 : 130℃で10分


【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者、製造業者
 有限会社栗田注射針製作所
 〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目25-7
 TEL 03-3814-0985 FAX 03-3818-2567
2. 販売業者（代理店）

⑥脛骨生検穿刺針

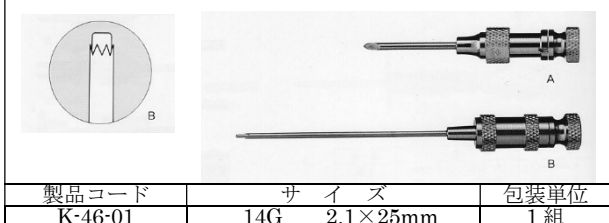

⑦ルーア型脛骨生検穿刺針

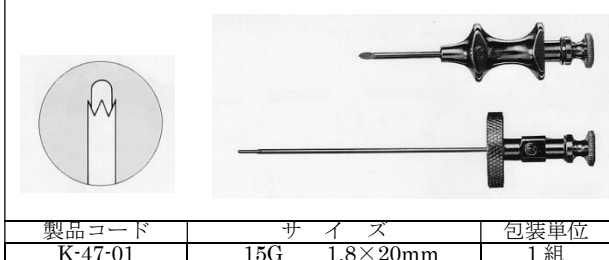

⑧東大式骨生検穿刺針

