

特定保守管理医療機器 減圧調整器OX-231 酸素用/ネジ式

**

*【警告】


- **・当製品は酸素用調整器です。容器の塗色(酸素は黒色)、容器の刻印等により酸素であることを確認すること。
(酸素容器以外に接続することは厳禁です。死亡を含む重篤な被害につながる可能性があります。)
- ・使用場所では火気厳禁、通風と換気に十分注意すること。
(酸素濃度が高くなると物質の燃焼性が著しく増加します。)
- **・酸素容器は転倒、転落等の防止処置を施さずに使用しないこと。
(容器転倒によるケガや、容器損傷、ガス漏れ等により重大な事故が起こります。)
- **・酸素容器の空吹きをせずに、当製品を取付けないこと。
(発火等、重大な事故に結びつくことがあります。)
- ・油脂類、また塵埃等の付着がないこと、またスプレー缶等可燃物との同時使用は厳禁です。(爆発的燃焼を起こすことがあります。)
- ・各接続部に緩みやガタツキが見られたら使用しないこと。
(部品が外れたり、酸素が漏れる可能性があります。)
- ・酸素容器のハンドルは急激に開けないこと。
(断熱圧縮熱等による発火の原因となります。)
- **・ガス漏れが発見されたら、直ちに当製品の使用を中止すること。
(爆発的燃焼を起こすことがあります。)
- **・当製品を転倒、転落等の衝撃を加えないでください。
(損傷し、安全性、性能及び操作性に不具合が生じます。)

**【禁忌・禁止】

- **・医療用酸素ガス以外での使用。(間違ったガスを患者が吸入し、重大な人身事故の原因となります。)
- **・不完全な修理や改造とパッキン等の正規部品以外による使用。
(正常に作動しない状態で使用した場合、重大な人身事故の原因となる。)
- **・漏れや各接続部に緩みやガタツキ等のある不具合状態での使用。
(故障により適正な量の酸素を供給できなくなり、重大な人身事故の原因となる。)
- **・転倒、転落等の衝撃を加えた場合の使用。
(損傷し、安全性、性能及び操作性に不具合が生じます。)

*【形状・構造及び原理等】

* 1. 形状

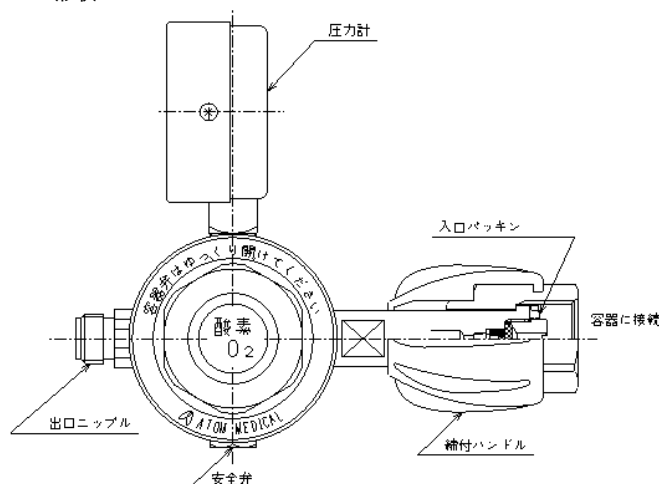

* 2. 性能

1) 圧力調整器

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| (1) 使用ガス | 酸素ガス |
| * (2) 容器内圧力 | 19.6MPa 以下 |
| (3) 設定圧力 | 0.43±0.02MPa 固定式(一次圧力 8MPa 時) |
| (4) 放出流量 | 標準 30L/min、最大 50L/min |
| (5) 安全弁吐出圧力 | 0.59~0.93MPa |
| * (6) 一次圧力計 | 0~35MPa(禁油) |
| (7) 入口継手 | W22-14 山 |
| * (8) 断熱圧縮熱発生防止機構内蔵 | |

* 3. 原理

酸素ガスは調整器で設定された圧力に減圧された後、出口金具(出口側)から供給される。

*【使用目的又は効果】

酸素容器に直接取付けて使用する減圧調整器で、2 次圧が固定され出口にホースを接続して必要な酸素ガスを供給する。

*【使用方法等】

1. 酸素容器への取付け
 - (1) 酸素容器の封印シールを綺麗にはがす。
 - (2) 容器弁のハンドルをゆっくりと少し開け閉めして、空吹き(ガス放出)を2~3回行ってください。
- * (3) 当製品を酸素容器の接続部に締付ハンドルで確実に固定する。
(この時、入口パッキンが正しく取付けられていることを、確認してください。)
2. 酸素容器の開け方
 - (1) 酸素ガスを供給する機器のホースを接続する。
 - (2) 顔が圧力計の正面にならない位置に立って、容器弁のハンドルをゆっくりと一回転以上回し、最後までは開けないこと。
3. 使用を止める時
 - (1) 容器弁のハンドルを時計方向に廻し、酸素を止める。
(ハンドルは過度に締付けないように注意する。)
 - (2) 圧力計の針が“0”になったことを確認する。
4. 酸素容器からの取外し
長時間使用しない場合は、当製品を酸素容器から取外して、保管ください。(入口パッキンが落下して紛失しないよう注意する。)

【使用上の注意】

1. 使用する前に必ず取扱説明書及び本添付文書をよく読み、操作方や保守点検を十分理解されたうえでご使用ください。
2. 酸素容器のねじに異常が見られたら、取付けないでください。
3. 酸素容器は転倒、転落防止処置を施さずに使用しないこと。
4. 酸素容器の空吹きをせずに、当製品を取付けないこと。
5. 油脂類又は塵埃等の付着がないこと。
6. 酸素容器の開閉ハンドルは急激に開けないこと。
7. 換気をせずに長時間、使用しないでください。
8. 出口側にホース差しでなく、酸素流量計を取付けて使用する場合は、酸素流量計の添付文書及び取扱説明書をお読みください。
9. 洗浄および分解しないでください。
10. 不完全な修理、調整は危険ですので納入業者に依頼ください。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - (1) 当製品はポリ袋などに収納し、所定の保管場所に保管する。
 - (2) 保管場所の条件
 - ・高温、ほこり、湿気等がない場所であること。
 - ・塩分、いおう分等を含んだ空気により悪影響の生じる恐れのない場所であること。
 - ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所でないこと。
2. 耐用年数・使用期間
当製品は上記の保管場所において耐用年数:5 年間
ただし、使用状況及び使用環境、保存環境などの影響によって、差が生じることがあります。

【取扱い上の注意】

1. 使用前に必ず保守点検し、異常が認められたら使用しないこと。
2. 酸素容器のねじに異常が見られたら取付けないこと。
3. 当製品に転倒、転落等の衝撃を加えないでください。
4. ガス漏れが発見されたら、直ちに使用を中止し、代替品と交換してください。
5. 当製品を廃棄処分する場合は、必ず殺菌・滅菌処理をしてから医療廃棄物処理業者に依頼してください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

1. 日常点検

1日1回使用時に行なってください。

- (1)使用前に各ねじ込み部分に緩みが無く、確実にセットされていることを確認する。
- (2)漏れチェック
操作方法の手順で酸素容器に取付け、容器弁をゆっくり開けて、各接続部に石けん水を塗布し、漏れが無いことを確認してください。
- (3)操作性の確認
 - ①外観に傷、変形がないこと。(入口パッキン含む)
 - ②圧力計により、酸素の残量が確認できること。

2. 定期点検

- (1)定期点検は6カ月に1度を目安に行ってください。
製造年月が古いもの、また長期間使用しないものはゴム製品、樹脂製品等に劣化が起きますので、下記項目を含めて、定期点検してください。
 - ・入口パッキン(ボドックシール)の状態(変形、傷、磨耗)
- (2)定期点検は、弊社又は納入業者に依頼してください。
不完全な修理・調整は危険です。

****【主要文献及び文献請求先】**

株式会社 群馬コイケ

〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町222-1

** TEL 0270-32-4318

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

株式会社 群馬コイケ

** TEL 0270-32-4318