



機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000

アダプタ (チェックフローアダプタ)

再使用禁止

【警告】

1. 使用方法

- 1) 本品に過剰な力を加えないこと。[本品が損傷するおそれがある]
- 2) 本品使用中に異常が認められたときは、速やかに使用を中止し、適切な処置を施すこと。[重篤な健康被害が発生するおそれがある]

【禁忌・禁止】


1. 使用方法

- 1) 再使用禁止
- 2) 再滅菌禁止[品質が劣化するおそれがある]


※ 【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造


- 本品はアダプタ単品である。
- 詳細は製品ラベルに記載のとおり。

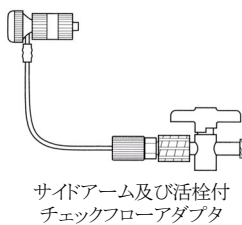


サイドアーム及び活栓付
チェックフローアダプタ

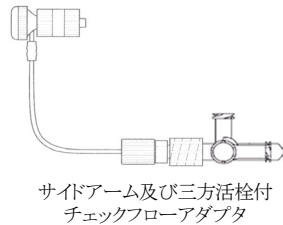

サイドアーム及び三方活栓付
チェックフローアダプタ

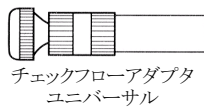

チェックフローアダプタ
ユニバーサル

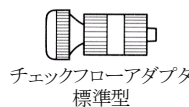

チェックフローアダプタ
標準型

2. 原材料

- ※ ● サイドアーム及び活栓付チェックフローアダプタ
ポリ塩化ビニル※/アセタール/シリコン/ポリカーボネート/ポリエチレン
※以下の可塑剤が含まれる:
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)、フタル酸ベンジルブチル
- サイドアーム及び三方活栓付チェックフローアダプタ
ポリ塩化ビニル/アセタール/シリコン/ポリカーボネート
- チェックフローアダプタ - ユニバーサル
アセタール/シリコン
- チェックフローアダプタ - 標準型
アセタール/シリコン

3. 原理

本品は、二つのカテーテル構成部品を接続したり、機器同士の接続に使用する。ドレナージ用カテーテル等への接続や液流の遮断等を行い、液漏れやエアースピレーションを防止する為にも使用される。

※ 【使用目的又は効果】

本品は、カテーテルを容器等の別の対象物に接続したり、灌注又は排液用カテーテル等を身体に挿入するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

- ① チェックフローアダプタを内視鏡の鉗子口に接続し、灌流液の漏れを防ぎながら、使用する器具を挿入する。
- ② 必要に応じ、サイドアームから薬液等を注入する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 目的に応じたサイズ、形状を選択して使用すること。
- 2) 接続が困難な場合は使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 3) 本品を強酸、強塩基に類する薬剤及び有機系溶剤にさらさないこと。
- ※ 4) 一部の構成品にはポリ塩化ビニルを使用しているが、可塑剤(フタレート)が溶出するおそれがあるため、注意すること。(「妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用」の項についても参照すること)

2. 不具合・有害事象

本品の使用に伴い、以下のような不具合が発生する場合がある。

- 1) 重大な不具合
(i) アダプタやコネクタの移動、破損、断裂、キンク

※ 3. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- 1) ポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタレートが妊娠/授乳中の女性、もしくは乳幼児、小児に暴露した場合の潜在的影響は明らかにされておらず、生殖系、または発育に影響がでる場合がある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、日光・蛍光灯・紫外線殺菌装置等の光、高温及び多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

使用期限は包装に表示されている。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》

- ※ クックメディカルジャパン合同会社
連絡先 TEL:0120-289-902