

類別:機械器具06 呼吸補助器
一般医療機器、一般的名称:人工呼吸器用マスク
JMDN70564000

販売名:クーフェイスマスク

再使用禁止

【警告】
使用方法

◆ マスクあるいは蘇生バッグの使用が適切でない、またはマスクあるいは蘇生バッグ自体の破損などにより正常動作が得られない場合、速やかに口対口または口対鼻による人工呼吸を実施してください。

◆ 換気が正しく行われていることを胸部の動きから目視確認してください。

◆ 使用方法について訓練を受けた方のみご使用下さい。
マスクを正しく当て、リーク（漏れ）のないように使うため訓練を受けてください。


【禁忌・禁止）

再使用禁止

【操作方法又は使用方法等】

- 1.操作方法
- (1)マスクのバルブに呼吸回路のコネクターを確実に接続する。
- (2)必要に応じてインフレーションバルブによりエアークッションの空気量を調節する。
- 2.使用方法
- (1)使用者はマスクを患者の顔に適正に当てる。
- (2)人工呼吸器と併用の場合は併用する人工呼吸器の使用方法に従って使用する。

【形状・構造及び原理等】

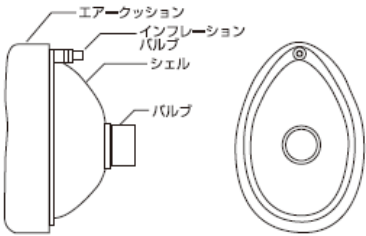

使用材料	
上蓋（シェル）	PVC
エアークッション	PVC
インフレーションバルブ	PVC
包装セロファン	CPP

【使用上の注意】

1. マスクは使用の直前にセロファン包装から取り出すこと。
2. 使用する前に破損、劣化などのない事を確かめること。
3. 呼吸回路との間に適正な連結がなされているか確認すること。
4. マスクの取扱いは医師免許所有者、看護師、救急救命士、救急隊員及び心肺蘇生訓練講習会の研修課程修了者が対象となる。
5. 本製品は再使用禁止。
6. 感染症を予防するために、単一の患者にのみ使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・高温多湿、直射日光を避け、できるだけ清潔な環境で室温保存すること。
- ・包装に記載されている「有効期限」までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
クー・メディカル・ジャパン株式会社
TEL03-5577-5901 FAX03-5577-5904

製造業者
KOO MEDICAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD
中国上海

【使用目的、効能又は効果】

本品は人工呼吸器の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口をおおい患者に人工呼吸器からのガスを供給する為のマスク。

6種類のサイズモデルを揃えており、あらゆる顔の輪郭にフィットする。

インフレーションバルブにより、患者の個々の顔の形状にあわせて空気量を調節できる。

【サイズ】

接続口径						
	KF211	KF212	KF213	KF214	KF215	KF216
外径(mm)	27	27	27	27	15	15
内径(mm)	22	22	22	22	9.5	9.5