

BVフィルタ

再使用禁止

【警告】

- ・ 本品を使用する前に、本書を必ず良く読んでください。
- ・ 本品は医師もしくは医師の指示を受けた専門の医療従事者のみが取り扱ってください。
- ・ 本品を呼吸回路と組み合わせて使用する場合は、必ず接続状態を確認してください。接続部が緩い場合は、外れる恐れがあるので使用しないでください。
- ・ 本品を使用する場合は、24 時間毎に交換してください。また、水分等が溜まっている場合、適宜交換してください。
- ・ 本品を人工呼吸器に接続する場合は、水分等の影響によって通気抵抗が変化しますので、低圧アラーム（下限圧）等を設定する際は十分注意してください。
- ・ 本品は水分や分泌物等によって通気抵抗が上昇しますので、使用中は監視を怠らないでください。

【禁忌・禁止】

- ・ 本品は使用一回限りの使い捨て製品です。再使用はしないこと。
- ＜併用禁忌＞
- ・ 本品とネブライザ及び吸入薬「アレベール（一般名：チロキサポール）」の併用はしないこと。もし、本品をネブライザの呼吸回路呼吸側（下流）に設置し吸入薬を用いると、本品が目詰まりを起こして患者が呼吸困難を起こす恐れがあります。

*【形状・構造及び原理等】

＜概要・構成＞

本品は人工呼吸器用呼吸回路または麻酔器用呼吸回路に接続し、粉塵などの除去を目的とした使い捨て型フィルタです。外観は半透明乳白色で接続部は内径／外径が 22F／15M、及び 15F／22M の円錐接続となっています。また、気道内圧または炭酸ガスのサンプリングポートを備えています。

【図 1：外観】



品 名	BVフィルタ
商品コード	42017

**【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は主に人工呼吸器および麻酔器の呼吸回路に接続して、回路内を流れるガス中の粉塵などの除去を目的としたエアフィルタです。

＜製品概要＞

接続口径	内径／外径・・・22F／15M 内径／外径・・・15F／22M
原材料	本体・・・スチレン樹脂 内部フィルタ・・・ポリプロピレン


**【使用方法等】

＜使用方法＞（人工呼吸器に接続する場合）

1. 本品を必要により、あらかじめ消毒または滅菌を行います。
2. 本品の包装を開封して取り出し、キズやヒビ割れ等の損傷がないことを確認します。

3. 本品を呼吸回路等にしつかりと組み入れます。その際、緩みなど接合状態に異常が無いことを確認してください。
4. 使用前に人工呼吸器の取扱説明書に従い、サンプリングポート不使用时はキャップを確実に閉め、リークが無いことを確認してください。
5. 人工呼吸器の低圧アラーム（下限圧）などが正常に作動することを、必ず確認してください。また、本品の使用中也においても定期的に確認してください。
6. 使用中は定期的に接合具合や、リークなどが発生していないことを確認してください。また、本品を一日毎に新しい物と交換してください。

【図 2：人工呼吸器接続例】（①吸気側／②呼気側部分に接続）

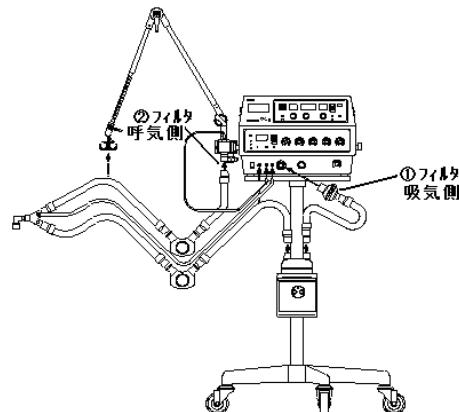

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品は未滅菌ですから使用前に、必要により消毒または滅菌を行ってください。
2. 本品にキズやヒビ割れ・バリ等がないことを確認してください。
3. 本品を呼吸回路等と組み合わせる場合は、必ず接続状態が適切であることを確認してください。
4. 本品は 24 時間毎又は患者 1 人毎に交換してください。また、水分等が溜まっていたら適宜交換してください。
5. 使用済み品は医療用廃棄物として適切に処理してください。
6. 人工呼吸器と併用する場合は、必ず低圧アラームなどが正常に作動することを確認してください。
7. 本品に異常が認められる場合は使用しないでください。

**【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

本品は水濡れに注意して高温多湿を避け、室温下で保管してください。

＜有効期間＞

単回使用製品のため患者一人毎または 24 時間毎に交換。

【保守・点検に係る事項】

＜消毒・滅菌＞

1. 本品を滅菌する場合は、EO ガス滅菌で行うことをお勧めします。
2. オートクレーブなど高温が加わる消毒・滅菌は行わないでください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

クロス・メディカルサービス株式会社

＜製造業者＞

・Galeded Corporation、台湾