

機械器具 48 注射筒
一般医療機器 汎用注射筒(13929001)

再使用禁止

BMAC シリンジ


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】


1. 形状・構造

(1) スタンダードシリンジ

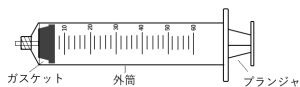

ルアーロックテーパー ISO594-1/2 適合

(2) ロック式シリンジ

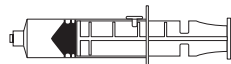

ルアーロックテーパー ISO594-1/2 適合

2. 原材料

ポリプロピレン、ポリカーボネート、MBS 樹脂、シリコーン
ポリイソプレン、スチレン・ブタジエンゴム

【使用目的又は効果】

液体を注射・注入または引き抜くために用いる。

【使用方法等】

- ① 包装を開封し、本品を取り出す。
- ② 必要に応じ筒先に注射針やチューブを接続し、プランジャを引き液体（薬剤又は血液等）又はガスを引き抜く。
- ③ 本品ないに充填した薬剤等を投与又は別の容器に注入する場合は、プランジャを押し筒先から薬剤等を放出させる。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ・ 本品の容量以上の液体を注入しないこと
- ・ プランジャは目盛線を超えて引き抜かないこと[液漏れが生じる可能性があります]。
- ・ プランジャはまっすぐ引き抜くこと[斜めに引いた場合、ガスケットの密着性が悪くなり、液漏れが生じる可能性があります]。
- ・ 使用する医療機器との接合において、緩みがないよう注意すること。
- ・ 筒先のテーパー部に薬液等を付着させないこと[接続部に緩みが生じる可能性があります]。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・ 薬液の吸引後は速やかに使用すること[薬液の結晶化により、詰まる可能性があります]。
- ・ 造影剤等の高圧注入には使用しないこと[破損する可能性があります]。

2. 併用注意

- ・ シリンジポンプに使用する場合は、予め適合性を確認すること[正しく作動できない場合があります]。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水漏れに注意し、高温多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 有効期間

外装表示参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

クリスメディカルソリューションズ株式会社

TEL 03-6425-7986

製造業者

Arteriocyte Medical Systems, Inc (米国)