

機械器具 80 はり又はきゅう用器具  
一般医療機器 非侵襲式家庭向け鍼用器具：34675001

## マグプレス チタン粒 2

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】


原材料に含まれる物質に対して、過去に過敏症やアレルギー反応を起こしたことのある方は、使用しないでください。

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状

粒子直径 : 1.2 mm

テープ直径 : 7.0 mm

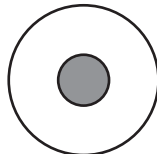

##### 2. 組成

粒子 : チタン

テープ : ポリ塩化ビニル

#### 【使用目的又は効果】

はり治療に使用するため、身体に刺入せず皮膚に貼付する器具

#### 【使用方法等】

- 1) 本品を貼付する箇所の皮膚を清潔にする。
- 2) 本品を剥離紙からはがす。
- 3) 経穴等の皮膚上に貼付する。
- 4) 使用後は、皮膚から剥がす。

#### 【使用上の注意】

- ・かゆみやかぶれが生じた場合は、直ちに使用を中止し、取り外してください。
- ・自分の意思で取り外すことのできない方は、使用しないでください。
- ・使用後、皮膚に貼付跡が残ることがあります。通常は数日で消失しますが、体質や体調で長期に貼付跡が残る場合もあります。
- ・使用中、粒子部が皮膚を傷付けることがあります。痛みや違和感を感じた場合には直ちに使用を中止し、取り外してください。
- ・長期に渡る使用はかゆみやかぶれ等を引き起こすため、7日を目安に貼りかえてください。
- ・再使用はしないで下さい。

#### 【保管方法及び有効期間】

- ・高温多湿、直射日光を避け、紫外線の当たらない場所で保管してください。
- ・テープの粘着力が劣化するため、冷蔵庫や低温化での保管は避けてください。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

クラボ株式会社

製造業者：

Wujiang City Cloud & Dragon Medical Device Co., Ltd.  
(中国)

販売元：

マグプレス

東京都杉並区南荻窪1-25-6

info@magpress.jp