

エコープローブカバー

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 本品のジェルは、プローブとプローブカバーの間に入れて使用し、それ以外の方法では使用しないこと。
[ジェルは、人体との接触を意図したものでないため]
3. プローブより小さなサイズの本品を使用しないこと。
[破損の恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

- ・本品は、プローブ先端及びケーブルを保護するプローブカバーと、それを束ねるゴムバンド、注入用のジェル及びドレープから構成されています。

プローブカバー *（原材料：ポリエーテルポリウレタン） ドレープ

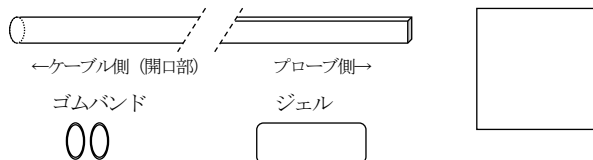

- ・プローブカバーのサイズ、ゴムバンドの数量は製品によって異なります。
- ・ジェル及びドレープが付属しない製品もあります。
- ・本品は滅菌済み製品です。

【使用目的又は効果】

- ・本品は、超音波画像診断装置等のプローブ等に装着し、診断手技を簡便にすると共に、二次感染を予防する目的で使用する。
- ・本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 平らな机等の上で滅菌バッグを開封し、内側のドレープ包装からプローブカバー及びジェルを取り出します。
2. プローブカバーが折りたたまれた状態で、開口部から内部にジェルを適量注入します。
3. プローブ先端部をプローブカバー内部に装着します。この時、プローブとプローブカバーの間のエア抜き、シワ取りを行って下さい。*また、プローブカバーのシール部分が、超音波振動子の邪魔にならないよう、位置を調節して下さい。
4. プローブカバー開口部を引っ張るように伸ばし、プローブ及びケーブルをプローブカバーで覆い、ゴムバンドで固定して下さい。
5. 必要に応じ、ゴムバンドを追加し固定して下さい。
6. 使用後は、装着と逆の手順でプローブカバーを外し、施設の基準に従って廃棄して下さい。また、プローブの洗浄は装置の使用方法に従って下さい。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 使用する前に破損等がないことを確認して下さい。
2. 装着するプローブの大きさに適切なサイズをご使用下さい。
3. 超音波画像診断装置等の使用方法・使用上の注意に従いご使用下さい。
4. 本品の再滅菌はしないで下さい。
5. *ジェルの注入後、漏れが生じていないことを確認して下さい。
6. ジェルは、使用量が少ないと画像が不鮮明になる恐れがあるので、適量をご使用下さい。
7. ゴムバンドは、ズレや落下等が生じないようにしっかりと固定して下さい。
8. プローブへの装着は、付属のドレープの上で行って下さい。ただし、ドレープが付属しない製品もあります。
9. 付属のドレープは、準備作業時に本品及びプローブ等を清潔に保つものであるため、治療行為には使用しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で保管して下さい。
2. 使用期限
使用期限は、ラベル等に記載しています。
[自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売元〉

ケーアイ株式会社

〒793-0027 愛媛県西条市朔日市 833-3

TEL：(0897) 47-6085