

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

BH ツール

【警告】


- ・ 本品使用の際は、適切な治療計画を行い、特徴や組み合わせ、使用方法などを正確に把握し、最良の選択を心がけるようお願いするものである。
- ・ 関連製品と組み合わせて使用すること。
- ・ 再使用する場合は、汚れや傷、損傷等の異常がない事を確認の上、機能的に問題がないと判断した場合にのみ使用すること。

【禁忌・禁止】

- ・ 本品又は本品に使用される材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状・種類

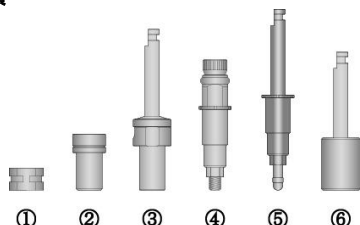

* 【使用目的又は効果】

	品名	種類	説明	材質	備考				
①	ガイドリングR	ガイドリング	φ3.5mm用 内径4.1mm	チタン、ステンレス					
	ガイドリングW		φ4.5mm用 内径5.0mm						
②	BH-ガイド ストッパー-R21	ガイド ストッパー	ガイドリングR用 カフ2.1mm	チタン、シリコンゴム	陽極酸化(黄)				
	BH-ガイド ストッパー-R30		ガイドリングR用 カフ3.0mm						
	BH-ガイド ストッパー-R36		ガイドリングR用 カフ3.6mm						
	BH-ガイド ストッパー-R45		ガイドリングR用 カフ4.5mm						
	BH-ガイド ストッパー-W21		ガイドリングW用 カフ2.1mm						
	BH-ガイド ストッパー-W30		ガイドリングW用 カフ3.0mm		陽極酸化(緑)				
	BH-ガイド ストッパー-W36		ガイドリングW用 カフ3.6mm						
	BH-ガイド ストッパー-W45		ガイドリングW用 カフ4.5mm						
	③		BH-CA エクステンション			延長ツール	延長ツール	ステンレス	
	④		BH-ラチェット ドライバー-R30			挿入ツール	ガイドリングR用 φ3.0mm用	ステンレス、シリコンゴム	ネジが 付属
BH-ラチェット ドライバー-R		ガイドリングR用 φ3.5mm用							
BH-ラチェット ドライバー-W		ガイドリングW用 φ4.5mm用							
⑤	BH-ハンドピース ドライバー-R30	挿入ツール	ガイドリングR用 φ3.0mm用	ステンレス、PEEK					
	BH-ハンドピース ドライバー-R		ガイドリングR用 φ3.5mm用						
	BH-ハンドピース ドライバー-W		ガイドリングW用 φ4.5mm用						
⑥	BH-ハンドピース- ラチェットドライバー	接続ツール	接続ツール	ステンレス					

- ・ 歯科用インプラントの外科手術に用いる器具をいう。手動式で再使用可能である。

【使用方法等】

使用方法

<ガイドリング>

- ・ フィクスチャーの植立時に使用する。

<ガイドストッパー>

- ・ フィクスチャーの植立時に使用する。

<延長ツール>

- ・ 関連ツールに取り付け延長させる。

<挿入ツール>

- ・ フィクスチャーに取り付け植立を行う。

<接続ツール>

- ・ 関連ツールに取り付け使用する。

使用方法に関連する使用上の注意

- ・ 本品は未滅菌製品であり、使用する直前に滅菌を行うこと。（滅菌法：高圧蒸気滅菌、滅菌条件：121℃ 20分間）
- ・ 再使用する場合は、医療機器洗浄剤で洗浄し汚れを完全になくすこと。必ず洗浄剤の使用方法に従うこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ 金属アレルギーによる異常が認められた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・ 過度の衝撃を加えないよう注意して取り扱うこと。また水濡れに注意し直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管すること。
- ・ 血液、体液、組織及び薬品等が付着したまま保管しないこと。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ケンテック株式会社

住所：東京都新宿区早稲田南町 52-2

電話番号：03-5155-2596

販売元：株式会社カイマンデンタル

住所：東京都千代田区一番町 8-15 一番町 MY ビル

電話番号：03-3238-7560