

13B3X10073-005-04
2009 年 8 月 18 日作成
2015 年 8 月 1 日改訂
2018 年 8 月 21 日改訂
2020 年 11 月 7 日改訂

*製造販売届出番号 13B3X10073000005

理学診療用器具 器 12 理学療法用器械器具
一般医療機器 冷却パック 37240020

クールパット

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 放射線治療に影響するので、照射直前は使用しない
- 冷やしすぎると凍傷を起こす可能性もあるので、1 回の使用時間は 30 分～1 時間に留めること。
- 万一破損による内容物の漏れが生じた場合は、製品の使用を中止する。
- 強い衝撃や圧力をかけないでください。
- 内容物に毒性はありませんが、食べたりしないよう、またお子様の手の届かない場所に保管してください。

【形状・構造及び原理等】

患部冷却用パック

製品例：

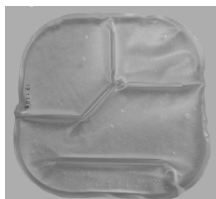

*【使用目的、効能または効果】

放射線治療中の乳房患部のほてり・熱感を緩和する

*【品目仕様等】

- ・周囲の熱溶着ならびに超音波溶着が確実に行われていること。
- ・特殊繊維が正しく圧着されていること。

【操作方法又は使用方法等】

- ・放射線を照射している乳房にあてて使用する。
- ・専用のポケットの付いたブラに挿入して使用することを推奨する。

【使用上の注意】

- ・使用に際しては医師の判断を仰ぐ。
- ・患部に腫れ・痛み・湿疹などが生じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談する。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

＜保管方法＞ 常温・常湿で保管

＜使用期限＞ 初回使用から 3 ヶ月間

【包装】

1 包 1 点入り

*【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社KEA工房

〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目 9 番 12 号

TEL：03-6228-5312

 **KEA工房**

製造業者：株式会社トライ・カンパニー

静岡県沼津市

KEA工房カスタマーセンター

0120-36-2727

電話受付時間 10:00～19:00

13B3X10073-005-04
2009 年 8 月 18 日作成
2015 年 8 月 1 日改訂
2018 年 9 月 21 日改訂
2020 年 11 月 7 日改訂

*製造販売届出番号 13B3X10073000005

理学診療用器具 器 12 理学療法用器械器具
一般医療機器 冷却パック 37240020

クールパット

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 放射線治療に影響するので、照射直前は使用しない
- 冷やしすぎると凍傷を起こす可能性もあるので、1 回の使用時間は 30 分～1 時間に留めること。
- 万一破損による内容物の漏れが生じた場合は、製品の使用を中止する。
- 強い衝撃や圧力をかけないでください。
- 内容物に毒性はありませんが、食べたりしないよう、またお子様の手の届かない場所に保管してください。

【形状・構造及び原理等】

患部冷却用パック

製品例：

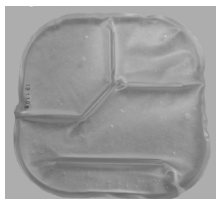

*【使用目的、効能または効果】

放射線治療中の乳房患部のほてり・熱感を緩和する

*【品目仕様等】

- ・周囲の熱溶着ならびに超音波溶着が確実に行われていること。
- ・特殊繊維が正しく圧着されていること。

【操作方法又は使用方法等】

- ・放射線を照射している乳房にあてて使用する。
- ・専用のポケットの付いたブラに挿入して使用することを推奨する。

【使用上の注意】

- ・使用に際しては医師の判断を仰ぐ。
- ・患部に腫れ・痛み・湿疹などが生じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談する。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

＜保管方法＞ 常温・常湿で保管

＜使用期限＞ 初回使用から 3 ヶ月間

【包装】

1 包 1 点入り

*【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社KEA工房

〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目 9 番 12 号

TEL：03-6228-5312



製造業者：株式会社トライ・カンパニー

静岡県沼津市

KEA工房カスタマーセンター

0120-36-2727

電話受付時間 10:00～19:00