

機械器具 32 医療用吸引器
管理医療機器 電動式可搬型吸引器 36616030


電動鼻水吸引器ハンディ

【禁忌・禁止】

- ・本書に記載されている使用目的以外の用途で使用しないでください。
- ・鼻の穴に傷、炎症、出血などが見られる場合は、使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

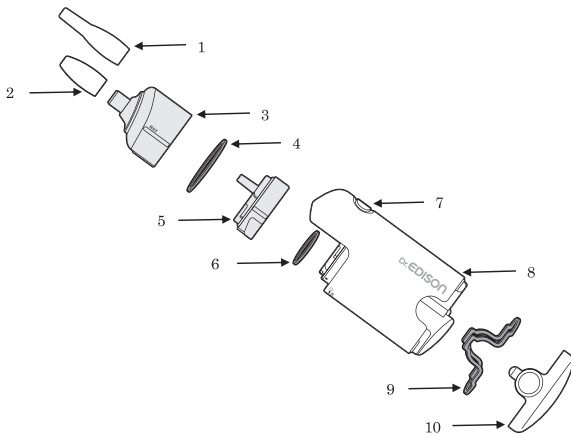

1	吸引ノズル 1	6	ゴムリング (小)
2	吸引ノズル 2	7	電源ボタン
3	吸引タンク	8	本体
4	ゴムリング (大)	9	ゴムパッキン
5	ベース	10	電池蓋

2. 寸法及び質量

- ・本体外観寸法：128mm×51.3mm×36.5mm
- ・本体質量：約 128g（本体のみ）
- ・吸引ノズル 1：42mm×10mm
- ・吸引ノズル 1 質量：約 2g
- ・吸引ノズル 2：27mm×10mm
- ・吸引ノズル 2 質量：約 2g

3. 電氣的定格

- ・電源：直流 3V（単三形乾電池）
- ・電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器
- ・電撃に対する保護の程度による分類：BF 形装着部
- ・電磁両立性：IEC60601-1-2:2014+A1:2020 ＊
- ・防塵防水保護等級：IP22

4. 原理

電動モーターを使ったポンプでタンク内を陰圧にして、タンクに取り付けた吸引ノズルから鼻水を吸引する。

5. 仕様に係る事項

- ・吸引圧：-63KPa±10%
- ・吸引ポンプの排気流量：2.0L/分±20%

6. 体に接触する部分の原材料

- ・吸引ノズル 1・2：シリコーン
- ・吸引タンク：ポリカーボネイト
- ・ベース：ポリカーボネイト
- ・本体：ABS

【使用目的又は効果】

鼻水の吸引に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- ・電池蓋を外し単三形電池 2 本を装填、電池蓋を閉めます。
- ・吸引タンクに吸引ノズル 1 又は吸引ノズル 2 を取り付けます。

2. 使用

鼻水の吸引

- ・吸引ノズルを鼻の穴に軽く押し当てます。
- ・電源ボタンを押すと、吸引が始まります。
- ・電源ボタンを離すと、吸引が止まります。

3. 使用後の処置

鼻水の廃棄

- ・鼻水を廃棄できる環境を準備します（洗面所、ごみ袋など）
- ・機器を立てた状態にしてベースと本体を切り離します。
- ・ベースと吸引タンクを切り離すと鼻水が捨てることができます。
- ・ノズル、吸引タンク、ベースを流水で洗浄し十分に乾燥させてください。

※吸引ノズルの使い分け

- ・鼻の穴が小さく、吸引ノズル 2 でうまく吸引できないときは、先端が細い吸引ノズル 1 を使用してください。

【使用上の注意】

- ・ ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- ・ 初めて又は長期間保管後にご使用になるときは、よく洗浄してからご使用ください。
- ・ ご使用後は必ず洗浄し乾燥した清潔な場所で保管してください。
- ・ 乳幼児の手の届かないところで保管してください。吸引ノズルを誤飲する恐れがあります。
- ・ 製品は必ず大人の方が操作してください。また、吸引するときは座るなど安定した姿勢で使用してください。
- ・ 浴室内で使用しないでください。防水構造ではありません。
- ・ 吸引ノズルは鼻に軽く押し当てる様にしてご使用ください。鼻の奥深くに吸引ノズルを無理に入れないでください。
- ・ 本体を水につけないでください。
- ・ 製品をヒーターなどの熱源に近づけないでください。
- ・ 本体を落下させる等、強い衝撃を与えないでください。
- ・ 分解、改造、修理をしないでください。
- ・ 本体に異常を感じたときは、使用しないでください。
- ・ 吸引ノズルは本製品専用のものをご使用ください。他社の製品の吸引ノズルは使用できません。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ケイジェイシー

東京都品川区北品川 1-10-4Y.B.ビル

電話：03-5796-9733

製造業者：HAPPIDEA Co.,Ltd

大韓民国