

皮膚赤外線体温計 光ナビ体温計 PRO

【警告】

- ・体温には個人差があります。本製品の測定結果による自己診断や治療はしないでください。[症状が悪化する原因となります。]
測定体温の異常を感じたら医師の指導に従ってください。


【禁忌・禁止】

- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
また、子供だけの使用は避けてください。
- ・センサー部に異物を挿入しないこと。[故障の原因となります。]
- ・LED ライトを見ないでください。
- ・本製品を落下したり、ぶつけたりして外部から強い衝撃を与えないこと。特に測定センサー部分に衝撃を与えないこと。
- ・仕様及び使用上の注意に示された使用条件を満たさない状況で使用したり、製造販売業以外が修理や改造、再調整などを行わないこと。これらに起因する損害について製造販売業者はその責任を負いかねます。

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

- 1, センサー部
- 2, LED 部
- 3, 液晶ディスプレイ
- 4, 電源／測定ボタン
- 5, バッテリーカバー

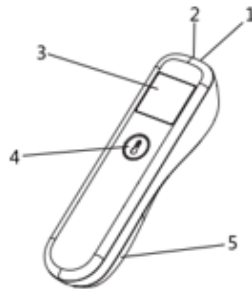

2. 寸法及び重量

寸法：W32 × D30 × H122 mm
重量：約 47g（電池含まず）

3. 電氣的定格

電源：単 4 形アルカリ乾電池 2 個
電源電圧：DC 3.0V
電撃に対する保護の型式による分類：内部電源機器
電撃に対する保護の程度による分類：BF 形装着部
電磁両立性：IEC60601-1-2:2014+A1:2020 ＊
防塵防水保護等級：IP22

4. 本製品は、額部から放射されている赤外線を非接触にて測定し、口腔部分の温度に換算して表示する皮膚赤外線体温計である。必ずしも口腔温度に一致するものではないことをご理解の上で、体温の目安として使用すること。

5. 仕様に係る事項

- ・測定温度範囲：34.0℃～43.0℃
- ・最大許容誤差：34.0℃～34.9℃：±0.3℃
35.0℃～42.0℃：±0.2℃
42.1℃～43.0℃：±0.3℃
- ・使用環境：温度 5℃～40℃、湿度 15～85%RH
- ・保管環境：温度 -20℃～55℃、湿度 15～93%RH
- ・測定部位：額
- ・最小表示単位：0.1℃

【使用目的又は効果】

本製品は、額の皮膚温度を測定することを目的とした皮膚赤外線体温計です。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- ・室内温度が 5～40℃であることを確認してください。
- ・室温に十分馴染ませてから使用してください。
- ・センサー部に汚れがないことを確認してください。
- ・汚れている場合は、「センサー部清掃」に従って清掃してください。

2. 電源を入れる

電源が OFF の場合は、電源ボタンを押してください。本体が起動する。

3. 体温測定

測定待機画面になりましたら、センサー部を額から 1～3cm 離れた状態にする。

部分測定：測定ボタンを短く押して額の一箇所を測定します。（約 2 秒）

範囲測定：測定ボタンを押しながら額の範囲内をゆっくりスライドさせて測定します。（約 3 秒）

- ・音が鳴りやむと、表示画面に体温が表示されます。
- ・測定が終了すると約 18 秒で電源が自動でオフになります。

4. メモリ機能

- ・体温測定の結果を 1 回分記録できます。測定結果は自動でメモリに保存されます。体温計が OFF の状態で電源ボタンを押すと、前回測定した体温の記録を確認することが可能です。

【使用上の注意】

- ・センサー部分に物を入れたり、触ったりしないでください。
- ・目に負担をかけないよう、先端の LED ライトを見ないでください。
- ・防水構造ではないため、水や液体につけないでください。

- ・修理・分解・改造等は絶対に行わないでください。発火や故障事故の原因となります。
- ・動物の体温測定には使用できません。
- ・落下などの強い衝撃を与えないでください。
- ・運動後、入浴後、飲食後などは30分間測定を避けてください。測定誤差の原因となります。
- ・正確な測定のために、髪、化粧、異物などは取り除いてください。測定誤差の原因となります。
- ・本製品は温度変化に敏感なため、長時間本製品を持った後やポケットに入れた後に使用しないでください。測定誤差の原因となります。
- ・強い静電気や電磁波を発生する機器を近づけないでください。故障・誤動作の原因となります。
- ・測定中に携帯電話を使用しないでください。誤動作の原因となります。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。
長時間（約1ヶ月使用しない場合は、電池を取り出してください。）
2. 耐用期間：5年（自己認証（製造元データによる））

【保守・点検に係る事項】

- ・センサー部に汚れがあった場合は、70~75%のエタノールを染みこませた綿棒や柔らかい布で清掃してください。
- ・本体の汚れは乾いた布で拭き取ってください。
- ・本体汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いてください。
- ・水洗いは絶対にしないでください。
- ・有機溶剤等は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ケイジェイシー
東京都品川区北品川1-10-4Y.B.ビル
電話：03-5796-9733

製造業者：Hetaida Technology Co., Ltd.
中華人民共和国