

機械器具 32 医療用吸引器
管理医療機器 電動式可搬型吸引器 36616030

電動鼻水吸引器 PochiSui

【警告】


- ・機器の操作は必ず取扱説明書に従い、正しく使用してください。
- ・使用の際に急激な吸引を避けるため、鼻腔に対しノズルを少し離れた位置から徐々に近づけるように吸引してください。
- ・乳幼児の手の届くところに保管しないでください。
- ・使用後は取扱説明書に従い、必ず洗浄と消毒を行ってください。

【禁忌・禁止】

- ・機器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。[破損や変形のおそれがあります]
- ・鼻水の吸引以外の目的で、本製品を使用しないでください。
- ・鼻の穴に傷、炎症、出血などが見られる場合は、使用しないでください。
- ・本体を稼働させたまま放置しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

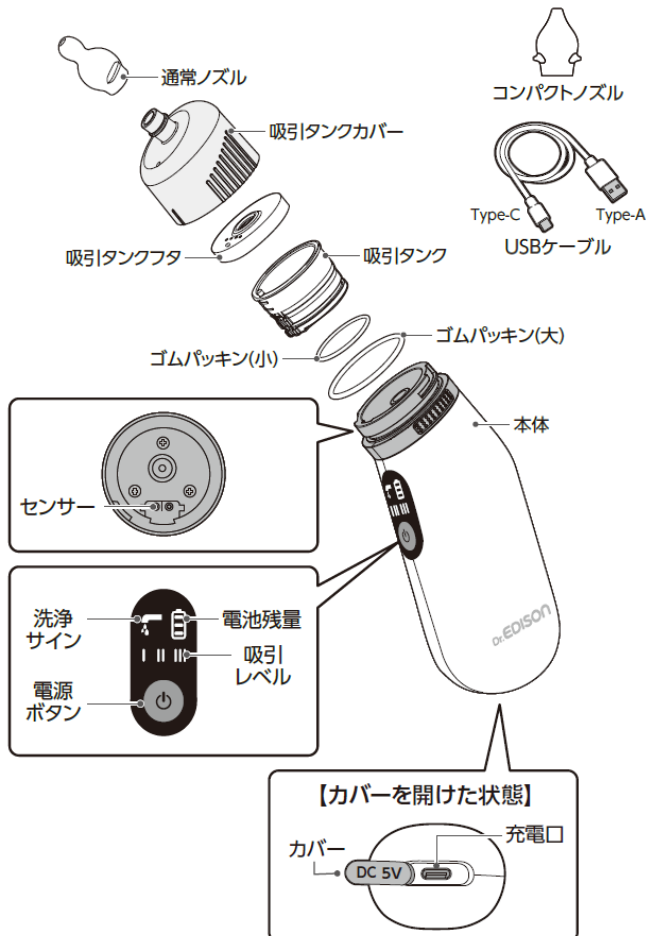

2. 寸法及び質量

- ・本体外観寸法：約 W48×D39×H145mm（ノズル含まず）
- ・本体質量：約 143g（ノズル含まず）
- ・通常ノズル：約 W17×D14×H27mm 質量：約 2g
- ・コンパクトノズル：約 W16×D15×H24mm 質量：約 2g

3. 電気的定格

- ・電源：直流 3.7V（リチウムポリマー電池）
- ・充電電圧：直流 5V
- ・電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器
- ・電撃に対する保護の程度による分類：BF 形装着部
- ・電磁両立性：IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020
- ・防塵防水保護等級：IP22

4. 原理

電動モーターで動作するポンプにより、吸引口から排出口への流体の流れを作り出す。この流れにより患者の鼻孔にあて、吸引ノズルより鼻水を吸引する。

5. 仕様に係る事項

- ・吸引圧：-70kPa±10%
- ・吸引ポンプの排気流量：Ⅰ、1.6L/Min±0.3
Ⅱ、2.2L/Min±0.3
Ⅲ、2.9L/Min±0.4

6. 原材料

- ・シリコーンゴム：通常ノズル、コンパクトノズル、吸引タンクフタ、ゴムパッキン（小）、ゴムパッキン（大）
- ・ポリカーボネート：吸引タンクカバー、吸引タンク
- ・ABS 樹脂：本体

【使用目的又は効果】

鼻腔内に溜まった鼻水の吸引に用いること。

【使用方法等】

1. 充電のしかた

- ・電源を切った状態にしてください。
カバーを開けて、USB ケーブルを本体充電口と USB 電源アダプタ（別売）（DC5V/2A）に接続します。
- ・コンセントに USB 電源アダプタを差し込みます。
※電池残量が青く点滅

取扱説明書を必ずご参照ください

- ・電池残量が青く点灯したら、USB 電源アダプタをコンセントから抜き、USB ケーブルを本体充電口から抜きます。
- ・カバーを閉めてください。

2. 使用中の操作

鼻水の吸引

- ・本体を手に持ち、電源ボタンを押して、鼻孔に吸引ノズルの先をゆっくりと挿入します。
- ・鼻水の状態に合わせて吸引圧を調節してください。
- ・操作をやめる時は電源ボタンを長押しして、電源を切ります。
- ・鼻水が最大容量を超えた場合には、本体の動作が自動的に停止します。吸引タンクに溜まった鼻水を廃棄して、よく洗浄してください。水気をよく拭いて、特に、センサーの部分に十分に乾燥させてから操作を再開します。

3. 使用後の処置

- ・本体から吸引タンクカバーを取り外し、吸引タンク内に溜まった鼻水を廃棄した後、各パーツをよく洗浄してください。
- ・洗浄後に十分乾燥させてから保管してください。

【使用上の注意】

- ・ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- ・初めて又は長期間保管後にご使用になるときは、必ず洗浄してからご使用ください。
- ・機器の使用中は、利用者の様子を常に見守り、異常や不安を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- ・機器を使用中に何らかの症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医療機関に相談してください。
- ・吸引中は息を止めたり、口を閉じたり、あるいは唾液を飲むといったことは避けてください。
- ・一回あたり、片方の鼻に5秒を超える吸引を行わないでください。
- ・吸引するときは、弱い吸引圧から段階的に調節しながら使用してください。
- ・複数人が使用する場合は、その都度、全パーツをよく洗浄してください。
- ・本体を落下させる等、強い衝撃を与えないでください。
- ・分解、改造、修理をしないでください。
- ・本体に異常を感じたときは、使用しないでください。
- ・吸引ノズルは本製品専用のものをご使用ください。
- ・本体を廃棄するときには、各自治体の規定に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。
- ・保管環境温湿度
温度：-20～55℃ 湿度：93%以下（結露なきこと）
- ・使用期間
3年[自己認証（当社データによる）]

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒の方法

「取扱説明書」をよく読み理解した上で、正しく安全に洗浄・消毒してください。

2. 使用者による保守点検（日常点検）

安全にお使いいただくため、日常点検（使用前点検）を行ってください。

<各パーツ>

- ・各部に折れ、ヒビ割れ、汚れ、亀裂がないか確認してください。

<本体>

- ・外観を確認し、大きなキズや変形がないことを確認してください。
- ・電源ボタンを操作して電源 ON/OFF が確実に行えることを確認してください。
- ・電源を ON にし、吸引が行われていることを確認してください。
- ・本体を軽く揺すり、異音がないことを確認してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ケイジェイシー

東京都品川区北品川 1-10-4Y. B. ビル

電話：03 - 5796 - 9733

製造業者：Hetaida Technology Co., Ltd.
中華人民共和国