

皮膚赤外線体温計 振動式体温計 PRO-M

【警告】


- ・体温には個人差があります。本製品の測定結果による自己診断や治療はしないでください。[症状が悪化する原因となります。]
測定体温の異常を感じたら医師の指導に従ってください。

【禁忌・禁止】

- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
また、子供だけの使用は避けてください。
- ・センサー部に異物を挿入しないこと。[故障の原因となります。]
- ・LED ライトを見ないでください。
- ・本製品を落下したり、ぶつけたりして外部から強い衝撃を与えないこと。特に測定センサー部分に衝撃を与えないこと。
- ・仕様及び使用上の注意に示された使用条件を満たさない状況で使用したり、製造販売業以外が修理や改造、再調整などを行わないこと。これらに起因する損害について製造販売業者はその責任を負いかねます。

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

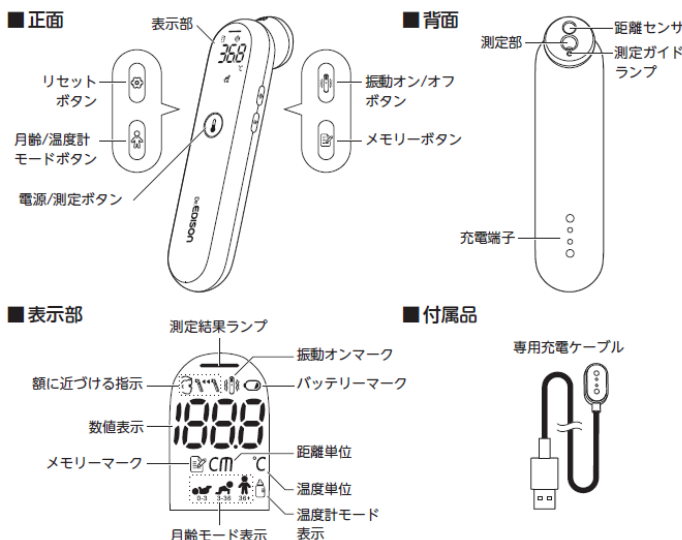

2. 寸法及び重量

寸法：W37 × D38 × H151 mm

重量：約 76g

3. 電氣的定格

電源：DC3.7V 500mAh（リチウムイオン電池）

電撃に対する保護の型式による分類：内部電源機器

電撃に対する保護の程度による分類：BF 形装着部

電磁妨害：IEC60601-1-2:2014/AMD1:2020

4. 本製品は、額から放射されている赤外線为非接触にて測定し、腋窩部分の温度に換算して表示する皮膚赤外線体温計です。必ずしも腋窩温度に一致するものではないことをご理解の上で、体温の目安として使用してください。

5. 仕様に係る事項

- ・測定温度範囲：体温計モード 32.0℃～43.0℃
温度計モード 0.0℃～100.0℃
- ・最大許容誤差：体温計モード
32.0℃～34.9℃：±0.3℃
35.0℃～42.0℃：±0.2℃
42.1℃～43.0℃：±0.3℃
温度計モード
0.0℃～100.0℃：±2.0℃
- ・使用環境：温度 5.0℃～40.0℃
湿度 ≤15～85%RH（結露なきこと）
- ・保管環境：温度 -20.0℃～55.0℃
湿度 ≤15～93%RH（結露なきこと）
- ・測定部位：額
- ・最小表示単位：0.1℃

【使用目的又は効果】

本製品は、額の皮膚温度を測定することを目的とした皮膚赤外線体温計です。

【充電方法】

- ・電源を切った状態にしてください。
- ・充電口に、専用充電ケーブルをつなぎ、USB 電源アダプタ（別売）（DC5V/1A）を接続してください。
- ・コンセントに USB 電源アダプタをしっかりと差し込みます。
※充電中は画面が点滅します。
- ・充電が完了したら、USB 電源アダプタをコンセントから抜き、USB プラグを本体から外してください。
※充電完了後もケーブルを本体に接続したままにすると、過充電になるおそれがあり、発熱、発火、故障の原因になります。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- ・室内温度が 5.0℃～40.0℃であることを確認してください。
- ・本製品を室温に十分馴染ませてから使用してください。
- ・距離センサー、測定部に汚れがないことを確認してください。汚れている場合は、アルコールで湿らせた綿棒で優しく拭いてください。

2. 電源を入れる

電源ボタンを押してください。

取扱説明書を必ずご参照ください

3. 体温計モード

待機画面になりましたら、赤外線センサーを額から1～3cm離れた状態にしてください。

■部分測定

測定ボタンを短く押して額の一箇所を測定します。(約2秒)

■範囲測定

測定ボタンを長押ししながら額の範囲内をゆっくりスライドさせて測定します。(約4秒)

振動設定をオンにしている場合は、振動して測定結果が表示されます。

振動設定をオフにしている場合は、ディスプレイに測定結果が表示されるので確認してください。

測定が終了すると自動でオフになります。

■測定結果

測定結果ランプ

モード	ランプの色			
	(消灯)	緑	黄	オレンジ
0～3か月	32.0～35.8℃	35.9～37.5℃	37.6～38.1℃	38.2～43.0℃
3～36か月	32.0～35.6℃	35.7～37.4℃	37.5～38.0℃	38.1～43.0℃
36か月～	32.0～35.4℃	35.5～37.3℃	37.4～38.0℃	38.1～43.0℃

4. 温度計モード

- 電源が入っているときに、年齢/温度計モードボタンを長押しすると、温度計モードに切り替わります。

表示部に哺乳瓶のマークが表示されます。

- 測定物に測定部を1～3cmまで近づけ、電源/測定ボタンを押します。

測定が完了すると、表示部に測定温度が表示されます。

※温度計は内部の温度ではなく、表面の温度を測ります。特にミルクや離乳食は、よくかき混ぜてから測ってください。

※浴槽などの湿度の高いところでは、結露のおそれがあります。測定後はすぐにその場から離れ、水分はよく拭き取ってください。

5. メモリー機能

- 体温測定の結果を50回分保存できます。測定結果は自動でメモリーに保存されます。体温計のメモリーボタンを押すと、1、50、49、48・・・と新しい体温の記録を確認できます。振動ボタンを押すと、1、2、3、4・・・と古い体温の記録を確認できます。

※温度計モードで測定した数値は保存されません。

- メモリーボタンを長押しすると、保存されたメモリーは全て消去されます。
- リセットボタンを長押しすると、保存されたメモリーを全て消去、年齢設定が初期設定に戻ります。

【使用上の注意】

- 距離センサー、測定部に物を入れたり、触ったりしないでください。
- 目に負担をかけないように、測定ガイドランプを見ないでください。
- 防水構造ではないため、水や液体につけないでください。
- 修理・分解・改造等は絶対に行わないでください。発火や故障事故の原因となります。

- 動物の体温測定には使用できません。
- 落下などの強い衝撃を与えないでください。
- 運動後、入浴後、飲食後などは30分間測定を避けてください。測定誤差の原因となります。
- 正確な測定のために、髪、化粧、異物などは取り除いてください。測定誤差の原因となります。
- 本製品は温度変化に敏感なため、長時間本製品を持った後やポケットに入れた後に使用しないでください。測定誤差の原因となります。
- 強い静電気や電磁波を発生する機器を近づけないでください。故障・誤動作の原因となります。
- 測定中に携帯電話を使用しないでください。誤動作の原因となります。

【保管方法及び有効期間等】

- 長期保管する場合は、バッテリーの劣化を防止するために、十分充電してください。保管中も、6ヵ月に1回程度は充電し直してください。
- 保管は-20.0℃～55.0℃で、ほこりや湿気のない場所で保管してください。
- 耐用期間：5年〔自己認証（製造元データによる）〕

【保守・点検に係る事項】

- 使用後はアルコールティッシュなどで拭いてください。
- 距離センサー、測定部を、アルコールで湿らせた綿棒で優しく拭いてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ケイジェイシー
東京都品川区北品川1-10-4Y. B. ビル
電話：03-5796-9733

製造業者：Hetaida Technology Co., Ltd.
中華人民共和国