

アドヒーズブデンバースプリント
(Non-Kit)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

〔使用方法〕

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、マジックテープ付アルミニウム板とマジックテープ付粘着シール、スポンジパッドからなる副木である。

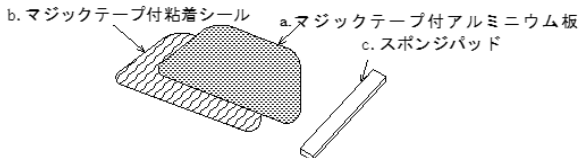


製品番号と規格

(単位：mm)

寸法図

製品番号	規格	サイズ	
		H	W
#1500NKLA	LA (Large)	43	69
#1500NKSM	SM (Small/Medium)	35	65
#1500NKPE	PE (Petite)	30	58
#1500NKMI	MI (Mini)	28	50

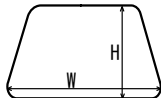

【使用目的又は効果】

鼻骨の骨折部位周辺を外部より支持固定する固定用材料であり、鼻稜部から顔面部の骨折部位をアルミニウム板で支持固定する。


【使用方法等】

【A. 装着するとき】

- 1) 本品を包装から取り出し、本品の点数が欠落していないか確認する。
- 2) 貼付部を清拭材（アルコール又は水）で拭い、乾かした後、皮膚被膜材で患部全体を軽く拭く。
- 3) 医療用テープ（以下、テープ）を患部に重ねるように貼り付ける。

〈注意〉


- ・必ず、貼付部が乾燥してからテープを貼ること。[テープが患部より剥がれ、上手く固定できないおそれがあるため。]

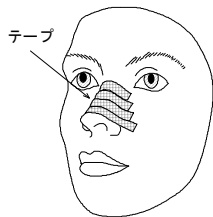

- 4) 本品のスポンジパッドの台紙を剥がし、テープの貼り付けられた患部の鼻筋にスポンジパッドを貼り付ける。

〈注意〉


- ・スポンジパッドは皮膚に直接触れないこと。[希に本品の粘着剤で皮膚に炎症をおこす場合がある。]

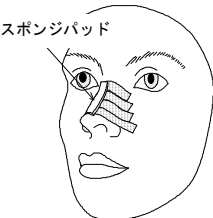

- 5) 本品のマジックテープ付粘着シール（以下、粘着シール）の台紙を剥がし、テープ、スポンジパッドの貼り付けられた患部に粘着シールを貼り付ける。

〈注意〉

- ・粘着シールは皮膚に直接触れないこと。[希に本品の粘着剤で皮膚に炎症をおこす場合がある。]

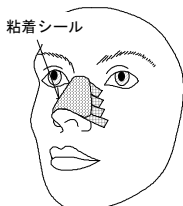


- 6) 本品のマジックテープ付アルミニウム板（以下、アルミニウム板）を患者の鼻の形に整える。
- 7) アルミニウム板をマジックテープ側から粘着シールに貼り付ける。


〈注意〉

- ・アルミニウム板は皮膚に直接触れないこと。[本品で皮膚に傷を付けてしまうことがある。]

- 8) 患者の装着状態を確認する。

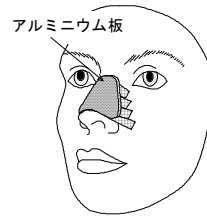

〈装着図〉

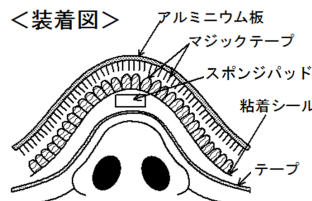

【B. 取りはずすとき】

上層から患部に負担をかけないようにゆっくり剥がす。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ① 本品は必ずマジックテープ付アルミニウム板、マジックテープ付粘着シール、スポンジパッドと組み合わせて使用すること。[これ以外の組み合わせ、あるいは単体使用では機能せず、適正使用範囲外となるため。]
- ② 本品は、MR 検査前に取り外すこと。[アルミニウム板の発熱による火傷や、画像に影響を与えるおそれがあるため。]

【不具合・有害事象】

本品の使用中に次の事象が起こることがある。使用期間中は十分な観察を行い、このような場合には本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。

- 1) その他の不具合
剥離
- 2) その他の有害事象
発赤、かぶれ、発疹

【保管方法及び有効期間等】

〔有効期間〕

3 年 [自己認証（当社データ）による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

株式会社 高研
TEL 03-3816-3500

【製造元】

Summit Medical, LLC
アメリカ合衆国