

イヤースプリント


【禁忌・禁止】

ヨード系の消毒薬は使用しないこと。[シリコンが劣化し破損等の恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

本品は、シリコンゴム製で形状を維持できるよう屈曲可能な軟鋼線が埋入されており、左右どちらの耳介にも対応できる。患者の衣服等に固定するための糸が付属している。

〈材質〉軟鋼線（SUS304）、糸（木綿）

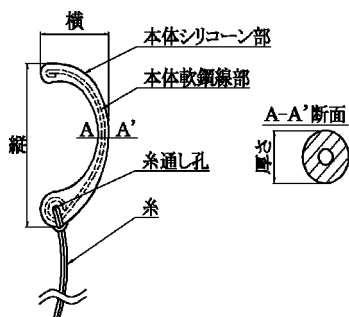

製品番号と寸法規格

製品番号	縦×横×厚さ (mm)
#1901	46×22×3.3


【使用目的又は効果】

本品は、軽度の先天的な耳介形成異常部位を固定するために用いる器具で、耳介に合うように予め成形されている。

【使用方法等】

【A. 固定するとき】

- ①本品を包装から取り出し、外観に異常がないか確認する。
- ②汚れがついている場合は、中性洗剤や水で洗い、乾燥させる。
- ③耳介を清拭する。
- ④本品の先端を三角窩に入れて耳輪の内側に沿うように本品の形状を整える。

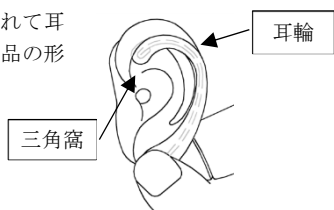

- ⑤装着状態を確認後、耳の外側から医療用テープで本品全体を固定する。



- ⑥医療用テープで患者に糸を固定する。



【B. 固定している間】

- ①本品の固定状態（本体及び糸の固定、医療用テープの剥がれ）、及び固定部分の皮膚の炎症等の有無など患者の十分な観察と管理を行う。医療用テープは1日1回交換することが望ましい。
- ②本品が汚れた場合は、中性洗剤や水で洗い、乾燥させた後に使用する。【A. 固定するとき】参照

【C. 取り外すとき】

- ①医療用テープをゆっくり剥がし、本品を取り外す。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ①本体シリコン部を切らないこと。[カット部より本体軟鋼線が飛び出す可能性があるため。]
- ②医療用テープの貼付部は、よく乾かしてから貼ること。[医療用テープが剥がれたり、上手く固定できないことがあるため。]
- ③糸を交換する際、木綿糸以外は使用しないこと。[木綿糸以外ではアレルギー反応を起こす可能性があるため]
- ④入浴時は本品を取り外すこと。[本品を濡れたまま固定すると雑菌が繁殖する可能性があるため]

【使用上の注意】*

【重要な基本的注意】*

- ①糸は口元には届かない程度の適切な場所で固定すること。[長すぎる場合、本品を誤飲する可能性や患者にからまる可能性があるため。]
- ②糸の固定が外れていないか確認すること。[使用中に外れた場合に誤って飲み込むおそれがあるため]
- ③本品は、MR検査前に取り外すこと。[軟鋼線の発熱による火傷や、画像に影響を与えるおそれがあるため。]

【不具合・有害事象】

- (1) 不具合
その他の不具合
切断・剥離
- (2) 有害事象
その他の有害事象
発赤・かぶれ・発疹・誤飲

【その他の注意】

院外で本品を使用する際、医療従事者は本品の取扱者に必ず安全な使用方法の説明を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

【有効期間】

3年「自己認証（当社データ）による。」

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

株式会社 高研
TEL 03-3816-3500

【製造元】

株式会社 高研