


コーケンウェッジ

【形状・構造及び原理等】

本品はポリカーボネート製のチューブ取り外し用ウェッジである。

本品は楔形でスロットの中央が開口しており、衣服等に付けるためのクリップが取り付けられている。

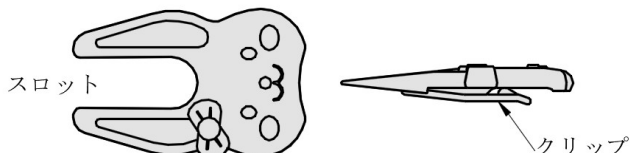


製品番号	#3355
------	-------

【使用目的又は効果】

呼吸装置のコネクタを接続端もしくは気管チューブ又は気管切開チューブ等のコネクタから外すために用いる器具である。本品は楔形でスロットの中央が開口しており、接続部にゆるく押し当ててふたつのものを引き離すもので、再使用可能である。


【使用方法等】

- 1) 本品のスロットを気管チューブ又は気管切開チューブ等のコネクタと呼吸回路等のコネクタとの隙間に差し込む。

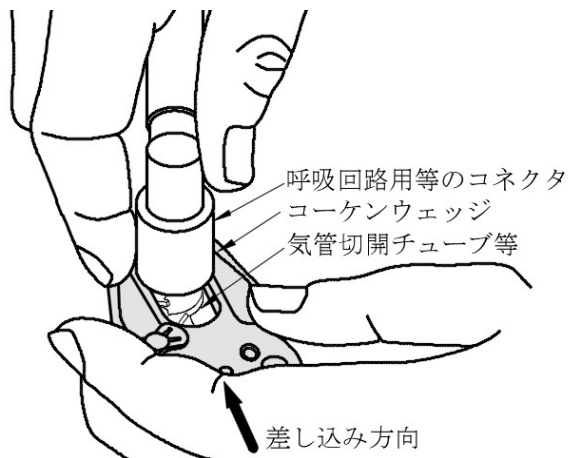


＜注意＞

- ① 本品の先端が呼吸回路用等のコネクタと気管切開チューブ等の隙間に入らない場合は使用できない。[無理に差し込もうとしてカニューレ本体が動き、患者に苦痛を与える可能性があるため。]

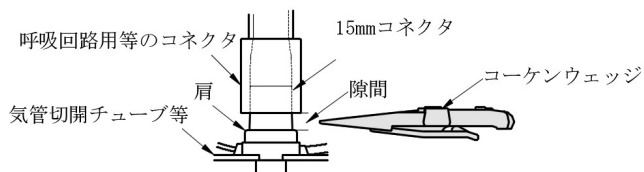


- ② てこの原理でこじ開けながら差し込もうとしないこと。[無理にこじ開けようとしてカニューレ本体が動き、患者に苦痛を与える可能性があるため。]
- ③ 呼吸回路用等のコネクタと気管切開チューブ等の隙間が本品より広いものには使用できない。

- 2) そのまま徐々に押し込み、隙間が広がってきたら、接続が外れるまでさらに押し込む。

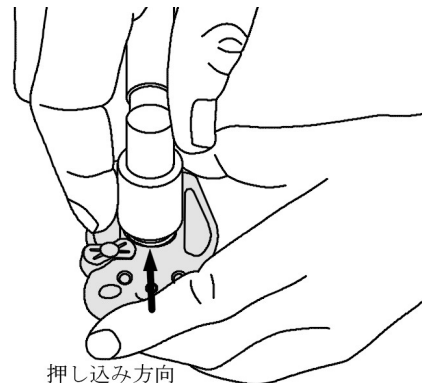

- 3) 注意してコネクタを取り外す。

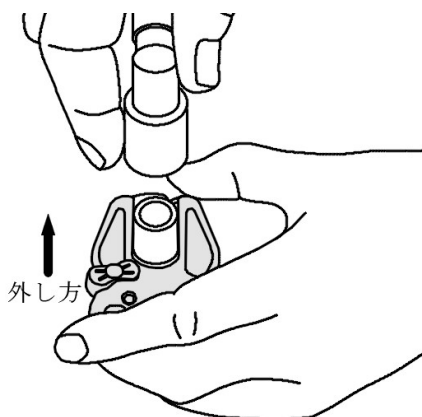

- 4) クリップを衣服等につけることができる。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1) JIS T 7201-2-1 に適合する 15mm コネクタが装備されている器具に使用すること。[15mm コネクタ以外には適合しないため]
但し、15mm コネクタに肩がない（又は一部しかない）器具には使用できない。[本品の先端を接続部に押し当てることのできないため]
- 2) 本品に薬液は使用しないこと。汚れた場合は水洗いすること。
[本品のひび割れや劣化、クリップが折れる恐れがあるため。]
- 3) クリップを変形させるような力を繰り返し加えないこと。
[クリップが折れる恐れがあるため。]

【保管方法及び有効期間等】

【有効期間】

3 年「自己認証（当社データ）による。」

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

株式会社 高研
TEL 03-3816-3500

【製造元】

株式会社 高研