

**2026 年 7 月（第 3 版）
*2025 年 5 月（第 2 版）

医療機器認証番号：301AFBZX00025000

類別：機械器具（30）結紮器及び縫合器
管理医療機器 一般の名称：体内用止血クリップ JMDN：34050000

ピコクランプ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

適用対象(患者)

1) 本品の使用により感作又はアレルギー反応を呈する可能性がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】 1. 参照]

使用方法

1) 再使用禁止

【二次感染のリスクが発生し、患者及び使用者への感染、伝染を引き起こす恐れがあるため】

2) 再滅菌禁止

【製品の劣化により折損等が生じるため】

3) 本品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は行わないこと。

【折損等の原因となるため】

4) 本品を次亜塩素酸塩溶液と接触させないこと。

【本品が腐食する恐れがあるため】

5) 電気メス等の接触凝固は行わないこと。

【相互作用の項参照】

【形状・構造及び原理等】


1. 構成

原材料

- a) 本体 : ポリエーテルエーテルケトン
b) 軸 : ステンレス鋼
c) スプリング : ステンレス鋼

2. 形状、構造

シングルクリップ ダブルクリップ

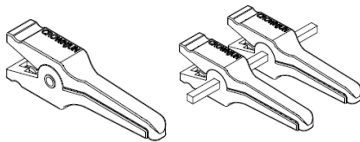

名称		本体色
LL	動脈用	緑色
	動脈（特殊）用	上部青色、下部緑色
	静脈用	青色
L	動脈用	緑色
	静脈用	青色
M	動脈用	緑色
	静脈用	青色
S	動脈用	緑色
	静脈用	青色
SS	兼用	青色

**

3. 原理

スプリングによる閉鎖力の確保。

【使用目的又は効果】

一時的な血管等の止血に用いる。

【使用方法等】

- 1) 血管径に適合したサイズのクリップを選択する。
2) ラインナップにより閉鎖力が異なるため、適切なものを選択する。**
3) クリップは、手または鉗子等を使用して、血管を一時的に止血する。

名称	血管径（Φmm）
LL	2.0～4.0
L	1.0～2.0
M	～1.0
S	0.2～1.0
SS	～0.5

*

**

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 1) 把持部の鉤で組織を把持しないこと。把持部の中間での把持が望ましい。
【把持部の鉤で血管等の組織を損傷する恐れがあるため】
2) 変形した製品、傷ついた製品は使用しないこと。
【破損の恐れがあるため】
3) 変形した製品を元の形状に戻さないこと。
【本来の把持力が低下する恐れがあるため】
4) 落下等による衝撃を受けた製品は、使用前に異常のないことを必ず確認すること。
【破損の恐れがあるため】
5) 使用後は直ちに破損・折損がなかったかを点検すること。折損等が見つかった場合は摘出等の適切な処置を行うこと。
【重大な有害自称に繋がる恐れがあるため】
6) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は使用を避けること。
【腐食の恐れがあるため】
7) 【使用方法等】に記載した血管径に適合したサイズのクリップを選択すること。
【血管への損傷又は血流の遮断不足の恐れがあるため】
8) 組織への過剰な負荷や、長時間の使用はしないこと。
【組織壊死の恐れがあるため】

【使用上の注意】

＜相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）＞

1) 併用禁忌

医療機器の名称等	臨床状態・措置方法	機序・危険因子
電気メス	感電・火傷・機器表面の損傷等	接触凝固

＜その他の注意＞

- 1) 開封後は、直ちに使用すること。
2) 使用後は、感染防止に留意し、衛生的に処理すること。
3) 脳血管一時止血専用のクリップではない。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること。
2) 包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。
3) 開封後、使用しなかったものは廃棄すること。

＜有効期間＞

- 1) 使用期限は製品に記載された通り。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元
株式会社 河野製作所
電話番号：047-372-3281