

ご使用に関して、この説明書をよくお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

届出番号:16B3X10011000001

販売名 ビ・ウォッシュ

一般医療機器 器55医療用洗浄器

一般的名称 鼻用洗浄器 41599000(JMDNコード)

形状、構造及び原理等

【構造】①キャップ ②ノズル ③ボトル(220mL)

【材質】ボトル・ノズル:ポリエチレン キャップ:ポリプロピレン

【原理】洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射流入され、鼻腔内を洗い流します。



使用目的又は効果

鼻腔内の洗浄

使用上の注意

●鼻が充分にかめない方は使用しないで下さい。●鼻の炎症(鼻づまり等)のひどい時、耳に疾患のある時は医師に相談のうえ使用して下さい。●使用中や使用後に異常を感じた時は使用を中止し、医師に相談して下さい。●鼻の洗浄のみに使用し、目や耳に使用しないで下さい。●共用して使用しないで下さい。
(感染予防のため) ●お子様が使用する際は保護者の指導の下で使用して下さい。●上を向いて使用しないで下さい。また、洗浄後、強く鼻をかまないで下さい。(耳の内部に洗浄液が入る恐れがあります)●洗浄する側の鼻が上になるように顔を傾けて使用して下さい。(洗浄液が目に流れることがあります)●洗浄液は、鼻から吸い込まずに自然に流し込んで下さい。●口に流れ込んだ洗浄液は、吐き出して下さい。●容器は電子レンジでは使用できません。●必ず、「ビ・ウォッシュ 専用鼻洗浄用粉末」を使用して下さい。


保管方法・有効期間

●初めて使用される際は、容器を洗浄して下さい。●容器の劣化、汚れ、雑菌の繁殖を防ぐため3ヶ月での交換を推奨します。(汚れ具合により、3か月より前の交換を検討して下さい)●使用後の洗浄液は、速やかに廃棄して下さい。(品質が変わります)●日光や、高温多湿を避けて保管して下さい。●小児の手の届かないところに保管して下さい。

取り扱い上の注意及び保守・点検に係る事項

●使用後は残った洗浄液を捨て、キャップ、ノズルを外し、よく洗って乾かし、清潔な場所で保管して下さい。●熱湯での洗浄、煮沸、ドライヤー等高温での乾燥はしないで下さい。(変形の恐れがあります)●洗剤等は使わず、きれいな水だけで洗って下さい。(破損の恐れがあります)●ブラシ等で洗わないで下さい。(容器にキズがついて汚れ付着の恐れがあります)●電子レンジや食洗器の使用は避けて下さい。

使用方法

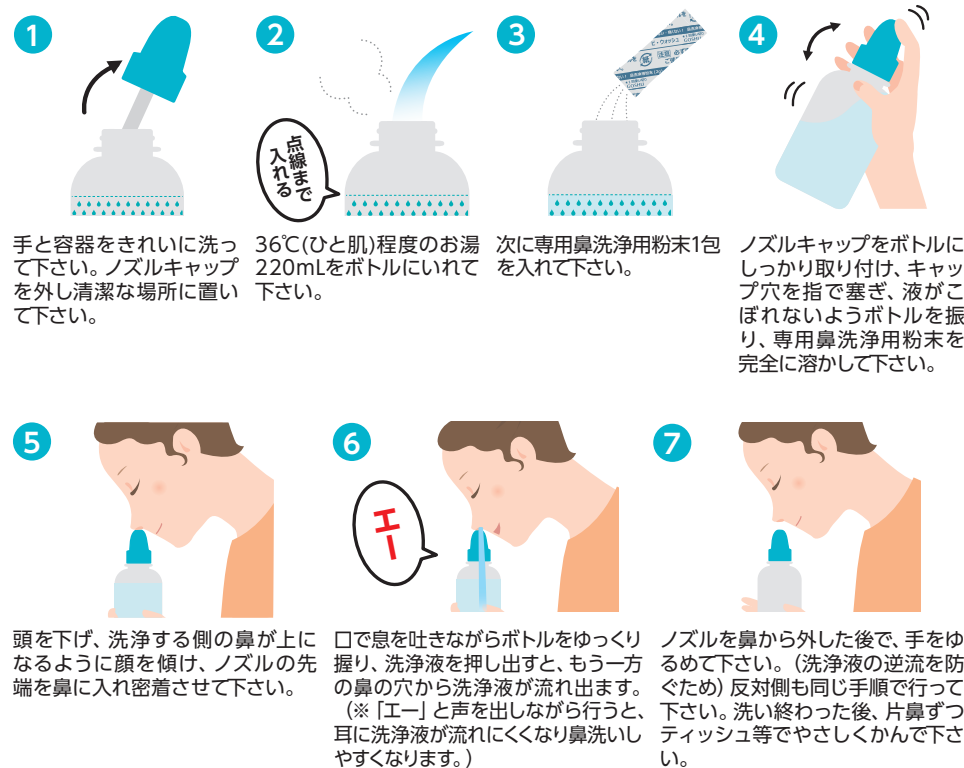

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

五洲薬品株式会社
〒939-8201
富山県富山市花園町1-1-5
MADE IN JAPAN

お客様相談室

☎ 0120-333058
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

洗浄器具:1個
専用鼻洗浄用粉末:2g(1包あたり)×30包
成分:塩化ナトリウム・重炭酸ナトリウム・海洋深層水塩・グリチルリチン酸ジカリウム