

*2008年12月 1日(第2版)
2003年 1月14日(第1版)

医療機器届出番号：13B2X10177000003

機械器具55 医療用洗浄器
一般医療機器 手動式生体用洗浄器 JMDN：34630000

エネマシリンジ 両先付

*【警告】


- 本品にお湯を通したり、高温を加えない事。
〔部品が変形し、機能しない恐れがあります〕
- 本品を刃物等鋭利な器具に触れさせない事。
〔部品が切断し、機能しない恐れがあります〕

*【禁忌・禁止】

- 本品は天然ゴムを使用しているため、過去に「天然ゴム」によるアレルギー症状を経験している患者への使用は禁止します。

【形状・構成及び原理等】

本品には一方に鼻腔挿入用のノズル、他方に液体吸入用の弁を装着し、その間に球状のスポイトを有する手動式の鼻腔洗浄器、及び洗腸器です。

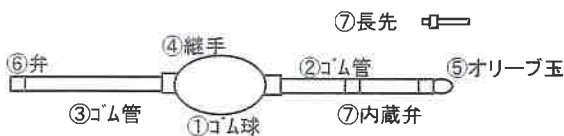

本品は天然ゴムを使用しています。

【使用目的、効能又は効果】

球状のスポイトを加圧することで内蔵されている弁が作動し、液体がノズル方向へ噴出する機能を持つ鼻腔洗浄器及び洗腸として使用します。

*【操作方法又は使用方法等】

- 1.使用前エネマシリンジ本体内部をあらかじめ洗い出すために吸引用弁を洗浄水に入れ球状のスポイトを手で握って離す動作を繰り返しノズルの先から噴水させエネマシリンジの中を数回洗浄する。
- 2.洗浄水は温水(いったん沸騰した水を体温程度にしたもの)をご使用下さい。
- 3.用意した温水に吸引用弁入れ球状のスポイトを手で握って離す動作を繰り返しノズルの先から噴水させ生体洗浄を行う。
- 4.鼻腔及び腸を刺激しすぎないようにゴム球の押圧加減によって噴水力を調整しながらご使用下さい。

5.洗浄後鼻腔内の残留水は軽く鼻をかみお出し下さい。

6.使用後は水を切り、先を下にして陰干しして下さい。

【使用上の注意】

- 1.この製品は天然ゴムを使用しています。
天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。
このような症状を起こした場合には直ちに使用を中止し医師に相談して下さい。
- 2.次の人は、使用前に医師又は、薬剤師に相談して下さい。
 - ・医師の治療を受けている人
 - ・症状により薬液を使用する人
 - ・炎症にひどい人、又鼻腔内に障害のある人
 - ・取り扱いについては、医師に従って使用して下さい。
- 3.洗浄水の温度には十分ご注意ください。
特にお子様のご使用に際しては、取扱及びやけど等に気をつけて下さい。
- 4.使用済みの本品を廃棄する場合には、周囲の環境を汚染しないように注意すること。また、医療廃棄物として適正に処理すること。

*【保管方法及び使用期間等】

- 1.保管方法
直射日光及び高温多湿を避けて保管して下さい。
- 2.使用期間
ラベル記載の製造年月日より2年以内

*【保守・点検に係る事項】

使用後は水抜きを完全に行なって下さい。
吸い込み弁を上にして垂直に吊るす様に保管して下さい。

【梱包】

1個/箱

*【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

*製造販売元：株式会社コクゴ 東京足立工場
東京都足立区谷在家2-5-12
TEL:03-3254-1341

製造元：株式会社コクゴ 東京足立工場