

医療用品04 整形用品

一般医療機器 整形外科用テープ JMDN32882000

プロヴォックス アドヒーズブ（ベースプレートアダプタ）

【警告】

適用患者

- ・意識不明の患者は常に監視すること。[装着した器具が誤ってアダプタ側から滑り落ちたり、ベースプレート側が気管孔から外れたりする場合がある。]

使用方法


- ・使用前、使用中は、ベースプレートアダプタにオイルやそのほかの潤滑剤が付いていないことを確認すること。
[潤滑剤を使用すると、アダプタ側から器具が外れたり、ベースプレート側から外れることがある。]

【禁忌・禁止】


- ・人工呼吸器には使用しない。

【形状・構造及び原理等】

*ベースプレートアダプタは、口径の異なる人工鼻（JIS T 7201-2-1: 2017 に適合する 15 mm 円すいコネクタを有する）を接続するために使用する。

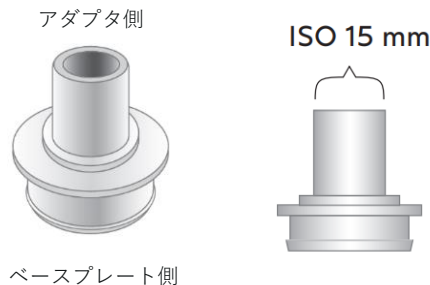

【使用方法等】

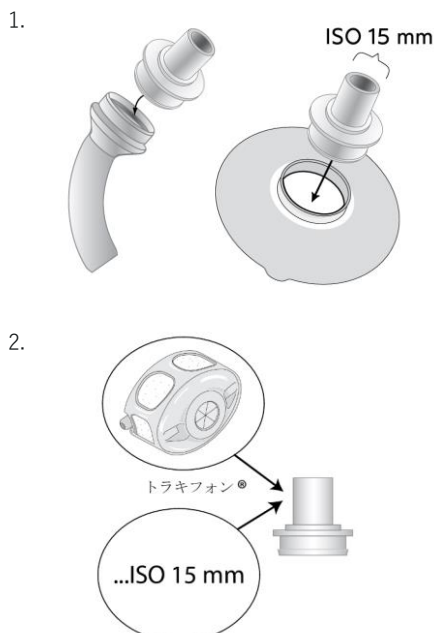

3. 洗浄及び消毒



【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・ベースプレートアダプタと併用する医療機器の指示を読み、それに従うこと。
- ・機器またはベースプレートアダプタ自体を着脱する際は、決して力を加えないこと。
- ・滅菌しないこと。
- ・本機器は一人の患者のみに使用すること。
- ・器具にひび割れや構造的損傷がある場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

<使用期間>

- * 本品は使用開始から最大で3か月経過したら交換すること。
破損の兆候が見られる場合は、速やかに交換すること。

<有効期間（未開封状態）>

- ・本製品外箱に記載されている表示のとおり。

【保守・点検に係る事項】

- * 本品は、使用方法3の指示に従って使用前に毎回洗浄及び消毒すること。本品の洗浄とすすぎには飲用水を使用すること。
- * 本品は少なくとも1日1回、3%過酸化水素水（オキシドール）で60分間、又は消毒用エタノール（濃度76.9～81.4 vol%）で10分間、又は70%イソプロピルアルコールで10分間浸漬すること。
- ・完全に乾燥するまで使用しないこと。消毒薬のガスを吸い込むと、重度の咳嗽及び気道の炎症を引き起こす可能性がある。
- * 本品は、汚染のリスクを避けるため、使用前に毎回洗浄及び消毒を行う必要がある。本品は単一患者用であり、患者間での再使用は交差感染が生じる恐れがある。
- * 入院中は、感染と器具の汚染の危険性が高まるため、本品の使用直後に洗浄・消毒を行い、使用直前にもう一度洗浄・消毒を行うことが重要となる。院内でのすすぎには飲料水ではなく滅菌水を使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：コロプラスト株式会社

住所：東京都千代田区九段南2-1-30

イタリア文化会館ビル

TEL：03-3514-4141

製造業者名：ATOS Medical AB（スウェーデン）