

医04 整形用品
一般医療機器 整形外科用テープ JMDN32882000
プロヴォックス アクセサリー（2）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

適用対象

- ・過敏な肌、又は傷のある肌へは使用しない。
- ・本品を皮膚アレルギーの既往歴のある患者には使用しない。
- ・本品の使用により肌に刺激や発赤、ただれなどの痛みを伴う炎症など異常を感じられた場合は、すぐに使用を止め、医師に相談すること。

併用医療機器

- ・本品は対応する気管切開チューブおよび付属品以外との組合せで使用しない。

使用方法

- ・初めて使用する場合は短時間の試用にとどめ、発赤などアレルギー症状が出ないことを確認すること。

【形状・構造及び原理等】

- (1) チューブホルダー（再使用可能）



原材料 ポリアミド
(2) ラリクリップ



原材料 アクリル酸

【使用目的又は効果】

本品は、喉頭摘出患者の永久気管孔に装着する気管切開チューブを固定する。

【使用方法等】

本品は、以下の気管切開チューブを固定する補助に用いる。
ラリチューブ、ラリボタン
(販売名：プロヴォックス Vega、承認番号22600BZX00135000)


1. チューブホルダー



- (1) 本品のフックをラリチューブまたはラリボタンのウイング部分に接続する。

- (2) 本品の本体を気管孔の首回りの適切な長さに調整してマジックテープを接着する。

2. ラリクリップ

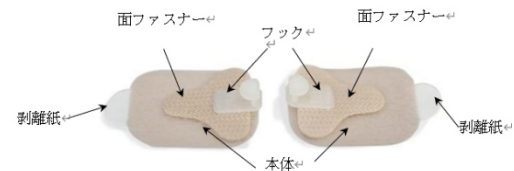

- (1) 本品のフックと本体のマジックテープを離す。
(2) フックをラリチューブまたはラリボタンのウイング部分に接続する。
(3) 本体の剥離紙を剥がし、気管孔周辺の首の適切な位置に直接シールで固定する。
(4) (2)のラリチューブまたはラリボタンを接続したフックと(3)の本体のマジックテープを接着する。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- ・肌に油分、水分などが付着したままでシール固定をしないこと。
- ・肌表面を完全に乾燥させてからシールを貼ること。
- ・必要に応じてプロヴォックス スキンバリア（別売）等で肌を保護すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。
- ・傾斜、振動、衝撃等のない安定した場所で保管してください。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管してください。

＜使用期間＞

1. チューブホルダー
・損傷の兆候が見られる場合は早めに交換してください。
2. ラリクリップ
・ラリクリップ本体の粘着力がなくなったときに交換してください。
・損傷の兆候がある場合は早めに交換してください。

＜有効期間（未開封状態）＞

- ・本品の外箱に記載されている表示をご確認ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：コロプラスト株式会社
住 所：東京都千代田区九段南2-1-30
イタリア文化会館ビル
TEL：03-3514-4141
製造業者名：ATOS Medical AB（スウェーデン）

取扱説明書を必ずご参照下さい。