

医療用品04 整形用品

一般医療機器 整形外科用テープ JMDN32882000

プロヴォックス ライフ アドヒーズブ
(プロヴォックス ライフ ベースプレートアダプター)

【警告】

適用患者

- ・意識不明の患者は常に監視すること。[装着した器具が誤ってアダプタ側から滑り落ちたり、ベースプレート側が気管孔から外れたりする場合があります。]

使用方法

- ・使用前及び使用中は、ベースプレートアダプタに油分やその他の潤滑剤が付着していないことを確認すること。[潤滑剤が付着すると、アダプタ側から器具が外れたり、ベースプレート側から外れたりすることがある。]


【禁忌・禁止】

併用医療機器

- ・人工呼吸器には使用しない。

【形状・構造及び原理等】


プロヴォックス ライフ製品（アドヒーズブ、別売りのラリチューブ及びラリボタン）とISO規格の15mm標準コネクタ付き医療機器（人工鼻等）を接続するためのアクセサリ。

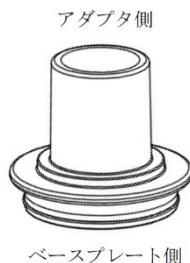

【使用方法等】


*＜アドヒーズブ等への取り付け＞

*ベースプレートアダプターをアドヒーズブ、ラリチューブ（別売）、ラリボタン（別売）のいずれかに取り付ける。

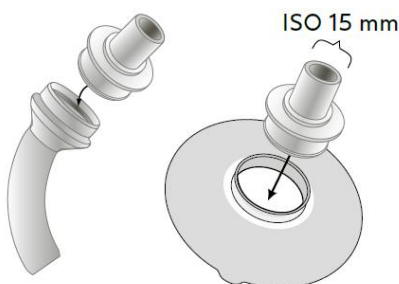

*＜機器の取り付け＞


*ISO規格の15 mm標準コネクタ付き医療機器（人工鼻など）をベースプレートアダプターに取り付ける。

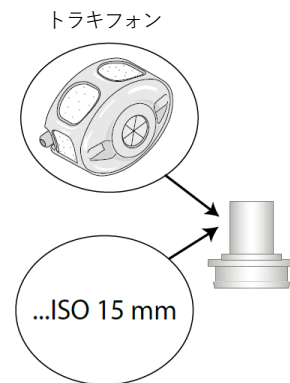


*＜洗浄＞

*使用前に洗浄と消毒を完了させる。洗浄には飲用水を使用する。


*1. 水ですすぐ。

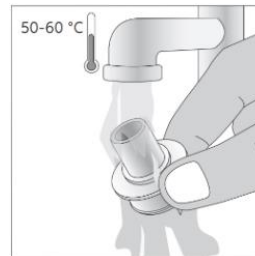

*2. 低刺激性の洗剤を溶かした水に15分間浸漬する。

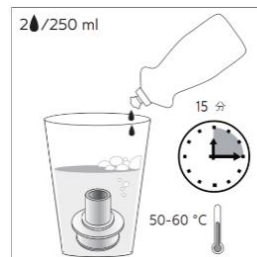


*3. プロヴォックス チューブブラシ（別売）などのブラシや綿棒を用いて、内側を水ですすぐ。

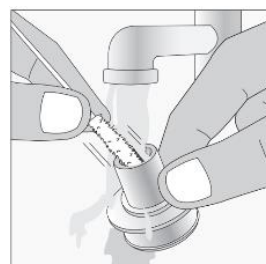


取扱説明書を必ずご参照下さい。

*4. 最低でも1日に1回、以下のいずれかの方法で消毒する。

- ・消毒用エタノール（濃度76.9～81.4 vol%）に10分間浸漬する。
- ・70%イソプロピルアルコールに10分間浸漬する。
- ・3%過酸化水素水（オキシドール）に60分間浸漬する。

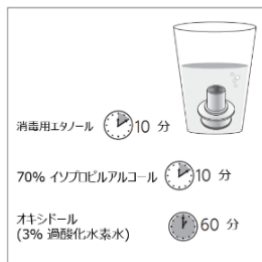

*5. 最低でも2時間または乾燥が確認できるまで、本品を乾かす。

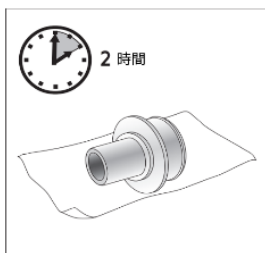

*＜組み合わせで使用可能な医療機器＞

*●プロヴォックス ライフ ラリチューブ

販売名：「プロヴォックス Vega」の付属品 プロヴォックス ライフ
ラリチューブ

一般的名称：再使用可能な気管切開チューブ

承認番号：22600BZX00135000

*●プロヴォックス ライフ ラリボタン

販売名：「プロヴォックス Vega」の付属品 プロヴォックス ライフ
ラリボタン

一般的名称：再使用可能な気管切開チューブ

承認番号：22600BZX00135000

*●トラキフォン

販売名：トラキフォン

一般的名称：気管切開患者用人工鼻

承認番号：22000BZX00297000

使用方法に関連する使用上の注意

- ・本品と併用する医療機器の添付文書を読み、それに従うこと。
- ・併用医療機器または本品を着脱する際は、過度な力を加えないこと。
- ・滅菌しないこと。本品は単一患者のみに使用する製品である。
- ・ひび割れや構造的な損傷がある場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

＜有効期間（未開封状態）＞

- ・箱のラベルを参照。[自己認証による]

＜使用期間＞

- ・開封後、最大で3か月経過したら交換すること。[自己認証による]

*損傷が見られた場合は、開封後3か月以内であっても交換すること。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

- ・消毒・洗浄後、完全に乾燥するまで使用しないこと。揮発した消毒剤の成分を吸い込むと、激しい咳や気道の炎症を引き起こす可能性がある。
- *・本品は、使用方法欄の指示に従って使用の度に洗浄と消毒を行うこと。
本品は、単一患者のみを対象としているため、複数の患者で再使用すると交差感染を引き起こす可能性がある。
- *・入院中に本品を使用する場合は、交差感染や汚染のリスクが高まるため、使用直後及び使用直前に洗浄と消毒をすることが重要となる。院内でのすすぎには、飲料水ではなく滅菌水の使用が推奨される。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

コロプラス株式会社

住所：東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル

TEL：03-3514-4141

＜製造業者＞

ATOS Medical AB

国名：スウェーデン

取扱説明書を必ずご参照下さい。